

STÓŁ CHIROPRAKTYCZNY · ELEKTRYCZNY

SIDO PRO

Ref. EL07PRO23.2.A66.WF



Wszechstronny stół chiropraktyczny do manipulacji o maksymalnej elastyczności. Do mobilizacji, manipulacji, masażu i terapii ruchem; wielokątowa regulacja do fizjoterapii i rehabilitacji. Wyjątkowe funkcje, takie jak przechył, pozycja inwersyjna i dolna rotacja lędźwiowa, poszerzają możliwości terapeutyczne.

PRODUKT

Producent	CONFY CARE
Nr referencyjny	EL07PRO23.2.A66.WF
Kategoria	Stół manipulacyjny (chiropraktyka)
Wersja	Elektryczna (Hi-Lo)


WYMIARY

Długość całkowita	210 cm
Szerokość	63 / 55 cm
Regulacja wysokości	52 – 90 cm

NAPĘD I OBSŁUGA

Regulacja wysokości	elektryczna (Hi-Lo), listwa nożna
Silnik	TiMOTION, wysoka niezawodność

Rysunek wymiarowy

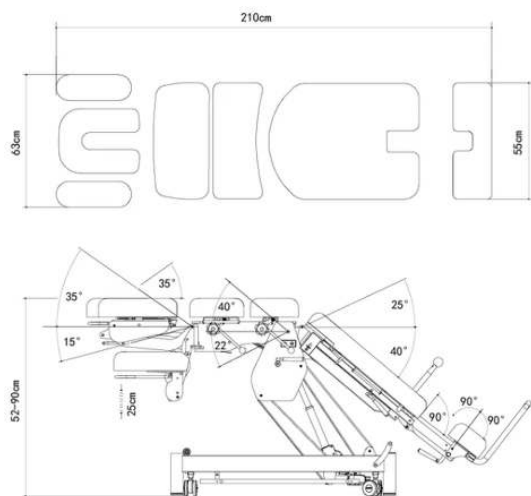

Cechy i wyposażenie

- Elektryczny system Hi-Lo przez listwę nożną; regulacja kąta górnej części ciała przyciskiem
- Podłokietniki z regulacją w dwóch pozycjach
- Funkcja przechyłu do wspomaganego pozycjonowania pacjenta
- Sekcja głowowa z wyściełaną platformą o regulowanej szerokości
- Uniesienie głowy sprężyną gazową (–15° do +35°), regulacja wysokości 10 cm, ruch boczny ±20°
- Dwie sekcje drop: szyjna i piersiowa; manualny mechanizm trakcji lędźwiowej
- Pionowa regulacja napięcia i pozioma fleksja dolnej części ciała przez T-bar
- Rotacja dolnej części ciała od 0° do 20°
- Dwufunkcyjny wysuw jako platforma przedłużająca i stopień

WYSYŁKA I OPAKOWANIE Wymiary opakowania 199 × 70 × 54 cm · Objętość opakowania 0,75 m³