

Medizinische Wagen & Stationsausstattung.

Gerätewagen · Reanimations- und Anästhesiewagen · Behandlungs- und Instrumententische · Transport und Entsorgung · Infusionsständer, Paravents und Tritte · MRT-Ausstattung · Schienensysteme



Gerätewagen APAR



Anästhesiewagen ANS / AVIT



So finden Sie sich zurecht	4
Materialien & Ausführungen	6
Farben & Oberflächen	7
Was über das ganze Programm gleich ist	10
01 Geräte- & Versorgungswagen	11
APAR – Modulare Gerätewagen	13
K-1 – Pflege- & Gerätewagen	14
ECO / TOP / MOD – Ablagenwagen zur Selbstmontage	15
02 Medizinische Wagen	16
ANS / AVIT – Anästhesie- & Spritzenwagen	18
REN / RVIT – Reanimations- & Notfallwagen	19
MULTI – Multifunktions- & Stationswagen	20
OPTIMUM – Behandlungs-, Reanimations- & Eingriffswagen	21
K-5 / K-6 – Beistell- & Assistenzwagen	22
03 Behandlungs-, Instrumenten- & Stationstische	23
STKO – Behandlungs- & Verbandwagen	25
SZ – Kompakter Behandlungstisch	26
E-01 – Mayo-Instrumententisch	27
E-02 / E-03 – Instrumententische, fahrbar	28
K-3 – Verband- & Stationswagen	29
MB-3 – Stationstisch mit ABS-Deckplatte	30
WL – Stationswagen mit Medikamenten-Organizern	31
04 Transport, Entsorgung & Sterilgutlogistik	32
WCB – Wäschewagen rein / unrein	35
MB – Abfall- & Wäschesackwagen	36
WZ / WZS – Wäschesackwagen Edelstahl	37
WZB – Wäschewagen Edelstahl, geschlossen	38
WMW – Wäsche- & Materialwagen	39
WT – Plattform- & Transportwagen	40
WPP – Speisentransportwagen	41
WK / WKS – Korbwagen	42
RKS – Rost- & Lagerregale	43
RM – Lagerregale	44
SL / WS – Regale für Steckbecken & Urinflaschen	45
ROB – Wandregal für Schuhe	46
SMO – Ständer für Abwurfbehälter	47
PAK – Packtische für die Sterilgutaufbereitung	48

05	Stations- & Ambulanzausstattung	49
	SK – Infusionsständer	51
	KO-2m – Teleskop-Infusionsständer	52
	PT – Teleskop-Sichtschutz	53
	WD – Nachtkästchen	54
	SP „FRIEND“ – Beistell- & Bettisch	55
	PO – Tritte	56
	WP-1 – Injektions- & Blutabnahmestuhl	57
06	MRT-Ausstattung, nicht-magnetisch	58
	SR4MR – Nicht-magnetische Behandlungs- & Rehaliege	61
	SK-01MR – Nicht-magnetischer Infusionsständer	62
	E-02MR – Nicht-magnetischer Instrumententisch	63
	K-3MR Typ C – Nicht-magnetischer Stationstisch	64
	K-3MR Typ D – Nicht-magnetischer Multifunktionsstisch	65
	PJ1-MR – Nicht-magnetischer mobiler Paravent	66
	WZ-MR – Nicht-magnetischer Wäsche- & Abfallwagen	67
	SMO-04MR – Nicht-magnetischer Abwurfbehälterständer	68
	PO-01MR – Nicht-magnetischer Tritt, einstufig	69
	PO-02MR – Nicht-magnetischer Tritt, zweistufig	70
07	Schienensysteme ISA	71
	So funktioniert das System	72
	Halter und Rohhalter	73
	Ablagen, Dokumentation und Leitungsführung	74
	Halter für Schalen und Behälter	75
	Katheter, Körbe und Flaschen	76
	Sauerstoff und Entsorgung	77
	Infusion, Sichtschutz, Ausleger und PMS	78
	Kontakt & Beschaffung	79

Aufbau des Katalogs. Das Sortiment ist in 46 Produktfamilien gegliedert. Eine Familie fasst zusammen, was sich nur im Material, in der Baugröße oder in der Bauform unterscheidet – die Varianten stehen jeweils in einer Tabelle. Jedes Kapitel beginnt mit einer Übersicht aller Familien; danach folgen die Familienseiten.

Produktwelt 07 folgt einer eigenen Logik: Schienensysteme sind kein Familienkatalog, sondern ein Baukasten aus Schiene, Halter und Zubehör – erklärt in drei Schritten ab Seite 71.



So finden Sie sich zurecht

Das Sortiment ist nach Produktart gegliedert. Statt jeder Materialvariante eine eigene Seite zu geben, fassen wir zusammen: Eine **Produktfamilie** ist ein Produkt mit einer Variantentabelle. Wer weiß, was er sucht, findet die Familie in einer der sieben Produktwelten – welche Ausführung es wird, entscheidet sich danach.

PRODUKTWELT 01

Geräte- & Versorgungswagen

Mobile Arbeitsplätze für Geräte, Monitoring und Pflege. Vom leichten Ablagenwagen zur Selbstmontage bis zum modularen Geräteträger, dessen Ablagen sich stufenlos anpassen lassen.

APAR · K-1 · ECO / TOP / MOD

Seite 11

3 Familien · 8 Varianten

PRODUKTWELT 02

Medizinische Wagen

Wagen für Reanimation, Anästhesie und Eingriffe. Alle teilen Korpusmaß, Arbeitshöhe und Zubehörbaukasten – unterschieden wird über Material, Bauplattform und Notfallausstattung.

ANS/AVIT · REN / RVIT · MULTI · OPTIMUM · ...

Seite 16

5 Familien · 16 Varianten

PRODUKTWELT 03

Behandlungs-, Instrumenten- & Stationstische

Tische und Wagen für Eingriffsraum, OP-Vorbereitung und Station. Edelstahl AISI 304 dort, wo Hygiene entscheidet, pulverbeschichteter Stahl dort, wo Wirtschaftlichkeit zählt.

STKO · SZ · E-01 · E-02 / E-03 · ...

Seite 23

7 Familien · 15 Varianten

PRODUKTWELT 04

Transport, Entsorgung & Sterilgutlogistik

Wäsche, Abfall und Material bewegen sich täglich durch das Haus. Dazu die Packtische und Regalsysteme für die Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte.

WCB · MB · WZ / WZS · WZB · ...

Seite 32

14 Familien · 43 Varianten

Produktwelten 05 bis 07 und die drei Arbeitsschritte auf der nächsten Seite.

Produktwelten 05 bis 07

PRODUKTWELT 05

Stations- & Ambulanzausstattung

Die Basisausstattung jedes Zimmers:
Infusionsständer und Stative, Sichtschutz,
Nachtkästchen, Bettische, Abwurfständer, Tritte
und der Blutabnahmestuhl.

SK · KO-2m · PT · WD · ...

Seite 49

7 Familien · 19 Varianten

PRODUKTWELT 06

MRT-Ausstattung, nicht-magnetisch

Komplett nicht-magnetische Einrichtung,
freigegeben für MRT-Räume bis einschließlich 3
Tesla – ein Raum, ein Lieferant, eine Optik.

SR4MR · SK-01MR · E-02MR · K-3MR **Seite 58**
Typ C · ...

10 Familien · 39 Varianten

PRODUKTWELT 07

Schienensysteme ISA

Kein Familienkatalog, sondern ein Baukasten: Normschiene, Halter, Zubehör. 65 Bausteine für den
Bettplatz - in drei Schritten erklärt.

Seite 71

Ablagen, Dokumentation und Leitungsführung

Halter für Schalen und Behälter

Katheter, Körbe und Flaschen

Sauerstoff und Entsorgung

Materialien & Ausführungen

ABS, ST, KO, HPL und Aluminium
– der wichtigste
Konfigurationsschalter im
Programm.

Seite 6

Farben & Oberflächen

70 Muster in fünf Gruppen, mit
Angabe, an welchem Bauteil sie
sitzen.

Seite 7

Programmweite Konstanten

Arbeitshöhe, Korpustiefe, Rollen
und Zubehörbaukasten – gelten
für alle Familien.

Seite 10

1

Übersicht

Alle Familien einer
Produktwelt mit
Varianten, Maßen und
Einsatzbereich
nebeneinander.

2

Familienseite

Variantentabelle,
Merkmale und das
Nutzenargument. Für
Auswahl und
Ausschreibung.

3

Konfiguration

Material, Größe, Farbe
und Zubehör legen wir
gemeinsam pro Auftrag
fest.

Drei Materialstufen – und was sie bedeuten

Die Kürzel ABS, ST und KO stehen für die Materialausführung und sind der wichtigste Konfigurationsschalter im ganzen Programm. Sie ändern nichts an Maßen, Funktion oder Zubehör – nur an Hygienestufe, Robustheit und Preis. Bei den meisten Familien sind Korpus, Deckplatte, Fronten und Sockel zusätzlich einzeln wählbar.

ABS	Stahlkorpus + ABS-Deckplatte	Korpus aus pulverbeschichtetem Stahl, Deckplatte aus schlagfestem ABS-Kunststoff. Leicht, geräuscharm und preislich attraktiv – die Standardwahl für Normalstation und Ambulanz.
ST	Korpus und Deckplatte pulverbeschichteter Stahl	Durchgehend lackierte Ausführung, robust und in jeder RAL-Farbe der TECH-MED-Palette lieferbar. Die widerstandsfähigste lackierte Variante.
KO	Vollständig Edelstahl 0H18N9 (AISI 304)	Korpus und Deckplatte aus Edelstahl. Vollflächig desinfizierbar, korrosionsfrei – für OP-nahe Bereiche, unreine Räume und die Sterilgutaufbereitung. Fronten auf Wunsch trotzdem in RAL lackierbar.
HPL	HPL-Laminat	Wasserfeste Arbeits- und Deckplatten für Nachtkästchen und Möbelbau.
AL	Aluminium, eloxiert oder RAL	Leichte Profilrahmen für Wagen und Möbelsysteme, nicht-magnetisch – Grundlage der MR-Serie.

Wo Farbe ins Spiel kommt

Nicht jedes Bauteil ist farbig wählbar. Diese fünf Gruppen decken alles ab, was im Programm eine Farbentscheidung braucht – die vollständigen Muster stehen auf den folgenden drei Seiten.

Pulverbeschichtung RAL

21 Farbtöne

Stahl- und Aluminiumteile in ABS und ST

[Seite 7](#)

Polsterung

17 Farbtöne

Liege- und Sitzflächen bei SR4MR und WP-1

[Seite 8](#)

Vorhänge

10 Farbtöne

Sichtschutz PT, PJ1-MR und PT-02

[Seite 8](#)

Laminatplatten

17 Dekore

Möbelplatten bei WCB und WD

[Seite 9](#)

Arbeitsplatten

5 Dekore

HPL-Deckplatten

[Seite 9](#)

Edelstahl KO

ohne Farbwahl

Edelstahl AISI 304 wird nicht beschichtet

–

HINWEIS In vielen Familien lassen sich Korpus, Fronten und Sockel getrennt wählen · Die Farbe der Fronten dient auf vielen Stationen als Bereichskennung






Pulverbeschichtung nach RAL

Die Grundpalette des Programms: 21 Farbtöne für alle pulverbeschichteten Teile aus Stahl, Aluminium und Möbelplatten.

WOFÜR · PULVERBESCHICHTETE STAHL- UND ALUMINIUMTEILE

Korpus, Fronten, Schubladen, Griffe, Rahmen, Sockel und Ablagen – in den Ausführungen **ABS** und **ST**. Betrifft damit fast das ganze Wagen-, Tisch- und Regalprogramm. Die Edelstahlausführung **KO** wird nicht beschichtet, dort entfällt die Farbwahl.

In vielen Familien sind Korpus, Fronten und Sockel getrennt wählbar – Stationskennung über die Frontfarbe ist der häufigste Fall.

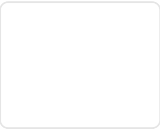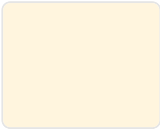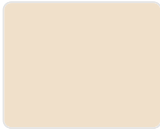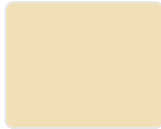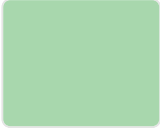					
RAL 9003 Weiß	RAL 9001 Creme	RAL 1013 Perlweiß	RAL 1015 Beige	RAL 1018 Gelb	RAL 3015 Rosa
					
RAL 4003 Pink	RAL 3000 Rot	RAL 1034 Apricot	RAL 2008 Orange	RAL 5021 Petrol	RAL 6033 Graugrün
					
RAL 6027 Mintgrün	RAL 6019 Hellgrün	RAL 6018 Grün	RAL 5012 Blau	RAL 5017 Dunkelblau	RAL 5002 Marineblau
					
RAL 9006 Aluminium	RAL 7035 Grau	RAL 9005 Schwarz			

MUSTER 1 VON 3 Die Darstellung ist drucktechnisch angenähert und kann vom Original abweichen. Für die verbindliche Auswahl stellen wir Originalmuster bereit. Möbelteile sind darüber hinaus in der gesamten RAL-CLASSIC-Palette lieferbar; weitere Farbtöne für Stahl und Aluminium auf Anfrage gegen Aufpreis.


Polsterung und Vorhänge

Textile Oberflächen. Die Polsterung ist waschbar und desinfektionsmittelbeständig, der Polyestervorhang wasserabweisend beschichtet, der waschbare Vorhang maschinenwaschbar.

WOFÜR · GEPOLSTERTE LIEGE- UND SITZFLÄCHEN

SR4MR Behandlungs- und Rehaliege und **WP-1** Blutabnahmestuhl. Das Material ist waschbar und desinfektionsmittelbeständig.

POLSTERUNG 17 FARBTÖNE

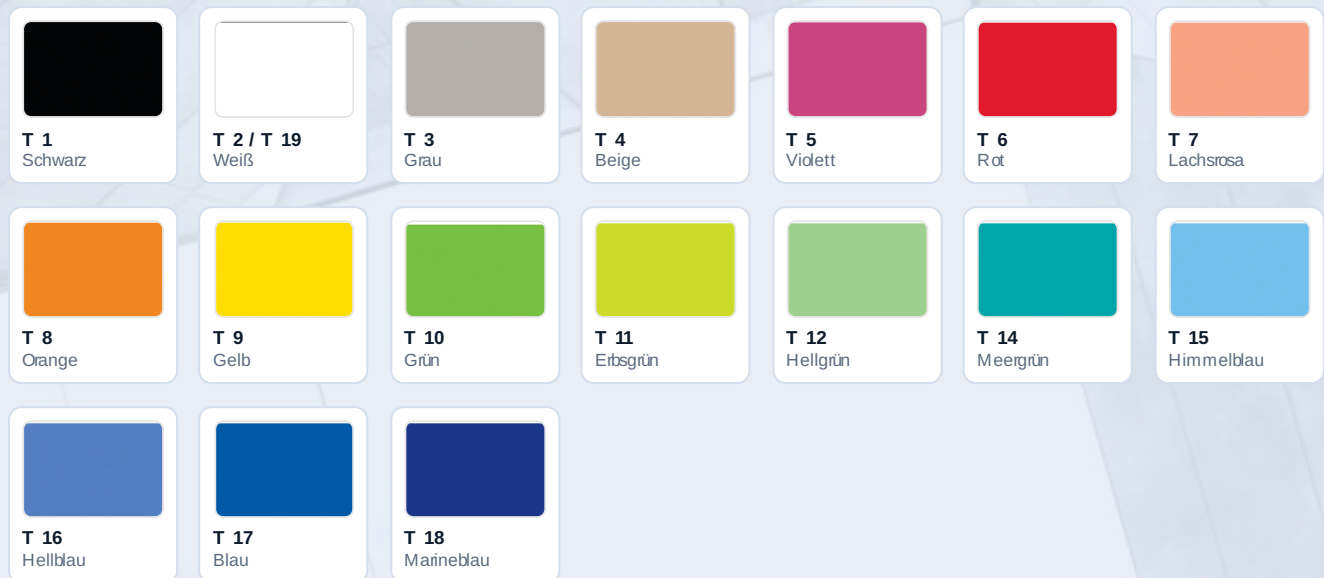

WOFÜR · SICHTSCHUTZ UND PARAVENTS

PT Teleskop-Sichtschutz, **PJ1-MR** mobiler Paravent und **PT-02** Schienen-Sichtschutz der Produktwelt 07. Zum Vorhang gehören immer 12 Clips.

Polyester ZP ist wasserabweisend beschichtet, ZZ ist maschinenwaschbar.

POLYESTERVORHANG ZP 7 FARBTÖNE



WASCHBARER VORHANG ZZ 3 FARBTÖNE



MUSTER 2 VON 3 Die Darstellung ist drucktechnisch angenähert und kann vom Original abweichen. Für die verbindliche Auswahl stellen wir Originalmuster bereit. Möbelteile sind darüber hinaus in der gesamten RAL-CLASSIC-Palette lieferbar; weitere Farbtöne für Stahl und Aluminium auf Anfrage gegen Aufpreis.

Laminatplatten und Arbeitsplatten


Plattenwerkstoffe. Gruppe I ist die Standardauswahl, Gruppe II wird gegen Aufpreis geliefert. Arbeitsplatten sind Postforming-Platten mit wasserfester HPL-Beschichtung.

WOFÜR · MÖBELPLATTEN

Korpus, Fronten und Füllungen in Plattenbauweise – **WCB** Wäschewagen mit Alu-Rahmen und Laminatfüllung sowie **WD** Nachtkästchen.

Gruppe I ist die Standardauswahl, Gruppe II wird gegen Aufpreis geliefert.

LAMINATPLATTEN GRUPPE I STANDARD

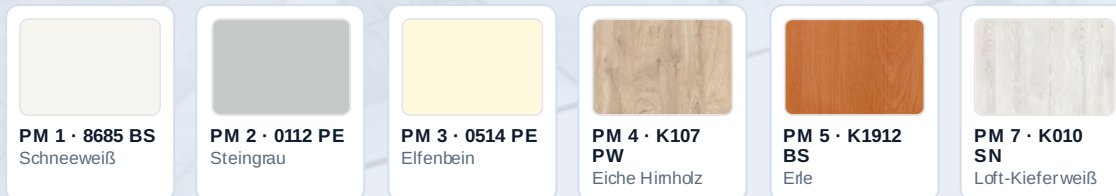

LAMINATPLATTEN GRUPPE II GEGEN AUFPREIS



WOFÜR · ARBEITS- UND DECKPLATTEN

Postforming-Platten mit HPL-Beschichtung, wasserfest. Für **WD** Nachtkästchen und überall dort, wo die Deckplatte optional in HPL-Laminat ausgeführt wird.

ARBEITSPLATTEN POSTFORMING, HPL-BESCHICHTET



MUSTER 3 VON 3 Die Darstellung ist drucktechnisch angenähert und kann vom Original abweichen. Für die verbindliche Auswahl stellen wir Originalmuster bereit. Möbelteile sind darüber hinaus in der gesamten RAL-CLASSIC-Palette lieferbar; weitere Farbtöne für Stahl und Aluminium auf Anfrage gegen Aufpreis.

Sechs Konstanten über alle Produktfamilien

Diese Merkmale gelten programmweit und werden auf den Produktseiten nicht wiederholt. Wer sie einmal kennt, muss auf jeder Familienseite nur noch lesen, was diese Familie *unterscheidet*.

Arbeitshöhe	1000 mm bei allen großen Wagen (ANS, REN, MULTI, OPTIMUM, VITAL)
Korpustiefe	500 mm bei allen großen Wagen
Arbeitsplatte	vertiefte Wanne mit umlaufender Randleiste an drei Seiten
Rollen	Ø 125 mm bei großen Wagen · Ø 75 mm bei Stationstischen · Ø 50–55 mm bei Kleingeräten, jeweils mindestens zwei feststellbar
Zubehör	identischer Baukasten über alle Familien: Instrumentenschiene, ausziehbare Seitenplatte, Infusionsstange, Abwurfbehälter, Handschuhbox, Kanülenabwurf, Katheterkorb, Zubehörkorb, Instrumentenbehälter, Steckdosenleiste
Farbe	weißer Korpus, Fronten und Griffe in RAL-Farbe als Stationskennung

Das einzige harte Funktionsmerkmal

Im gesamten Wagenprogramm gibt es genau einen Unterschied, der nicht über Konfiguration abbildbar ist: die **Notfallausstattung** – Defibrillator-Ablage, CPR-Brett und Sauerstoffflaschenhalter. Sie ist den Reanimationswagen vorbehalten: REN, RVIT und OPTIMUM Typ R. Alles andere – Material, Größe, Schubladenzahl, Farbe, Zubehör – wird zum Auftrag festgelegt.

Mit Notfallausstattung	REN / RVIT (Seite 19) · OPTIMUM Typ R (Seite 21)
Ohne Notfallausstattung	ANS / AVIT · MULTI · OPTIMUM Typ Z und Typ P · alle übrigen Familien

HINWEIS FÜR PLANER · Sämtliche Baureihen lassen sich nachträglich erweitern oder umrüsten, ohne in die Konstruktion einzugreifen – Zubehör wird an Instrumentenschiene oder Rahmen eingehängt.

Geräte- & Versorgungswagen

Mobile Arbeitsplätze für Geräte, Monitoring und Pflege. Vom leichten Ablagenwagen zur Selbstmontage bis zum modularen Geräteträger, dessen Ablagen sich stufenlos anpassen lassen.



3 PRODUKTFAMILIEN · 8 VARIANTEN

APAR

K-1

ECO / TOP / MOD

Familienseiten: APAR S. 13 · K-1 S. 14 · ECO / TOP / MOD S. 15

Übersicht · Geräte- & Versorgungswagen

	Produktfamilie	Var.	Varianten	Einsatzbereich	Seite
	APAR Modulare Gerätewagen Alu-Profilrahmen · Stahl pulverbeschichtet · ABS	3	APAR-1 APAR-2 APAR-3	Geräteträger für Intensiv, OP, Endoskopie und Diagnostik	13
	K-1 Pflege- & Gerätewagen Alu-Profilrahmen · Stahl pulverbeschichtet · LUX in RAL	2	K-1 (G-001...G-008) K-1 LUX	Pflege- und Verbandwagen für Station und Ambulanz	14
	ECO / TOP / MOD Ablagenwagen zur Selbstmontage Alu-Profilrahmen · Stahl ablagen pulverbeschichtet	3	ECO TOP MOD	Geräteablage und Materialwagen, Einstiegsklasse	15

Var. = Anzahl der Ausführungen dieser Familie. Alle aufgeführten Varianten sind lieferbar; die vollständigen Abmessungen stehen auf der Familienseite bzw. liegen als Variantenliste vor. Baureihen ohne eigene Seite stellen wir auf Anfrage im gleichen Umfang vor.

Produktwelt 01 · Geräte- & Versorgungswagen

APAR

Modulare Gerätewagen

Alu-Profilrahmen · Stahl pulverbeschichtet · ABS



Die APAR-Serie ist das modulare Rückgrat des Wagenprogramms. Auf einem Aluminium-Profilrahmen lassen sich Ablagen, Schubladen und Zubehör stufenlos in der Höhe anordnen – der Wagen wird auf das Gerät zugeschnitten, nicht umgekehrt. Drei Baugrößen decken alles vom schmalen Einzelgeräteträger bis zum doppelseitigen Arbeitswagen ab; das Zubehör ist über alle drei identisch und jederzeit nachrüstbar.

EINSATZBEREICH

Geräteträger für Intensiv, OP, Endoskopie und Diagnostik

AUSFÜHRUNGEN Variantenachse: Baugröße · 3 Ausführungen

Variante	Abmessungen & technische Daten	Merkmal
APAR-1	510×480 / 510×520 / 670×540 mm · H 800–1300 mm · Rollen Ø 75 mm	Einzelgeräteträger
APAR-2	Deckplatten 450 / 500 / 550 / 600 mm · Rollen Ø 100 mm	Standard-Gerätewagen
APAR-3	1200 × 580 mm · H 800–1800 mm · Deckplatte 1100×500 mm	Doppelseitiger Arbeitswagen

MERKMALE & AUSSTATTUNG

- Vertiefte Deckplatte verhindert Abrutschen von Geräten
- Ablagenabstand stufenlos wählbar, jederzeit veränderbar
- Sockel aus Stahl mit ABS-Abdeckung
- Dekorelemente pulverbeschichtet in RAL-Farbe
- Option: Deckplatte aus HPL-Laminat
- Zubehör: Monitorhalter, Steckdosenleiste, Zubehörkorb, Instrumentenschiene
- Zubehör: Kabelarm, Infusionsstange, Auslegerarm, Tastaturablage
- Zubehör: Abfallsackhalter, Sauerstoffflaschenhalter, ausziehbare Seitenplatte

KONFIGURATION Gleiche Plattform, drei Baugrößen. Zubehör über alle drei identisch. · Konstanten des Programms siehe Seite 10
· Farben ab Seite 7

Produktwelt 01 · Geräte- & Versorgungswagen

K-1

Pflege- & Gerätewagen

Alu-Profilrahmen · Stahl pulverbeschichtet · LUX in RAL



Der kompakte Pflege- und Verbandwagen für Station und Ambulanz. Auf denselben Aluminium-Tragsäulen wie APAR, aber in fester Baugröße und mit kleinerem Budget. Die LUX-Ausführung unterscheidet sich nur in der Oberfläche: Deckplatte und Sockel kommen dort in der RAL-Farbe der Station statt in Weiß.

EINSATZBEREICH

Pflege- und Verbandwagen für Station und Ambulanz

AUSFÜHRUNGEN Variantenachse: Ausführung · 2 Ausführungen

Variante	Abmessungen & technische Daten	Merkmal
K-1 (G-001...G-008)	530×400×800/900/1200 mm · 790×420×800 mm · Deckplatte 450×320 mm	Stahl pulverbeschichtet weiß
K-1 LUX	550 × 470 × 900 mm · Deckplatte 450×320 mm	Deckplatte und Sockel in RAL-Farbe, ABS-Sockelabdeckung

MERKMALE & AUSSTATTUNG

- Tragsäulen aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Ablagenabstand frei einstellbar, Zubehör nachrüstbar
- Vertiefte Deckplatte gegen Abrutschen
- Acht Bauformen G-001 bis G-008
- Rollen Ø 75 mm, zwei feststellbar
- Zubehör: Steckdosenleiste, Infusionsstange, Kabelarm, Instrumentenschiene, Zubehörkorb
- LUX zusätzlich mit ABS-Sockelabdeckung und WKP-Auslegerarm

KONFIGURATION LUX unterscheidet sich nur in Oberfläche und Farbgebung. · Konstanten des Programms siehe Seite 10 · Farben ab Seite 7

Produktwelt 01 · Geräte- & Versorgungswagen

ECO / TOP / MOD

Ablagenwagen zur Selbstmontage

Alu-Profilrahmen · Stahlablagen pulverbeschichtet



Drei schlanke Baureihen für alle Fälle, in denen kein Vollaussstattungswagen nötig ist. Die Wagen werden zerlegt geliefert und vor Ort montiert – der Ablagenabstand wird dabei frei gewählt. So entsteht eine preislich attraktive Ebene unterhalb der APAR-Serie, ohne bei Material und Rollen zu sparen.

EINSATZBEREICH

Geräteablage und Materialwagen, Einstiegsklasse

AUSFÜHRUNGEN Variantenachse: Baugröße · 3 Ausführungen

Variante	Abmessungen & technische Daten	Merkmal
ECO	500 × 460 × 1000 mm · Deckplatte 450×320 · Ablage 400×260 mm	schmal, hoch
TOP	530 × 400 × 900 mm · Deckplatte 450×320 mm	Standard
MOD	735 × 420 × 860 mm · Deckplatte 655×400 mm	breit

MERKMALE & AUSSTATTUNG

- Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminiumprofil
- Sockel und Ablagen aus pulverbeschichtetem Stahl
- Ablagen mit hochgezogenem Rand
- Ablagenabstand bei der Montage frei wählbar
- Rollen Ø 50 mm, zwei feststellbar
- Zubehör: Steckdosenleiste, Zubehörkorb, Instrumentenschiene
- Einfache Selbstmontage, platzsparender Versand

KONFIGURATION Identische Konstruktion, drei Formate. Rollen Ø 50 mm, Selbstmontage. · Konstanten des Programms siehe Seite 10 · Farben ab Seite 7

Medizinische Wagen

Wagen für Reanimation, Anästhesie und Eingriffe. Alle teilen Korpusmaß, Arbeitshöhe und Zubehörbaukasten – unterschieden wird über Material, Bauplattform und Notfallausstattung.



5 PRODUKTFAMILIEN · 16 VARIANTEN

ANS / AVIT

REN / RVIT

MULTI

OPTIMUM

K-5 / K-6

Familienseiten: ANS / AVIT S. 18 · REN / RVIT S. 19 · MULTI S. 20 · OPTIMUM S. 21 · K-5 / K-6 S. 22

Übersicht · Medizinische Wagen

	Produktfamilie	Var.	Varianten	Einsatzbereich	Seite
	ANS / AVIT Anästhesie- & Spritzenwagen ABS · ST · KO frei wählbar	4	ANS-ABS ANS-ST ANS-KO AVIT (VITAL)	Anästhesie, Narkoseeinleitung, Aufwachraum	18
	REN / RVIT Reanimations- & Notfallwagen ABS · ST · KO frei wählbar	4	REN-ABS REN-ST REN-KO RVIT (VITAL)	Reanimation und Notfall – Station, Ambulanz, Funktionsbereiche	19
	MULTI Multifunktions- & Stationswagen ABS · ST · KO frei wählbar	3	MULTI-ABS MULTI-ST MULTI-KO	Allgemeine Stationsversorgung, individuell konfigurierbar	20
	OPTIMUM Behandlungs-, Reanimations- & Eingriffswagen Stahl pulverbeschichtet · Alu-Rahmen · ABS- Deckplatte	3	OPTIMUM Z OPTIMUM R OPTIMUM P	Behandlung, Reanimation und Eingriffe – Notaufnahme, Intensiv, OP	21
	K-5 / K-6 Beistell- & Assistenzwagen Stahl pulverbeschichtet · optional Edelstahl	2	K-5 K-6	Behandlungszimmer, Praxis, OP-Assistenz	22

Var. = Anzahl der Ausführungen dieser Familie. Alle aufgeführten Varianten sind lieferbar; die vollständigen Abmessungen stehen auf der Familienseite bzw. liegen als Variantenliste vor. Baureihen ohne eigene Seite stellen wir auf Anfrage im gleichen Umfang vor.

Produktwelt 02 · Medizinische Wagen

ANS / AVIT

Anästhesie- & Spritzenwagen

ABS · ST · KO frei wählbar

Alles für die Narkoseeinleitung griffbereit. Vier Ordner des Herstellers sind hier eine Produktfamilie: Maße, Zubehör und Funktion sind identisch, gewählt wird nur das Material – und bei der VITAL-Ausführung zusätzlich die Bauplattform. ABS ist die preisattraktive Variante, ST die robuste lackierte, KO die vollflächig desinfizierbare Edelstahlversion.

EINSATZBEREICH

Anästhesie, Narkoseeinleitung, Aufwachraum

AUSFÜHRUNGEN Variantenachse: Material / Plattform · 4 Ausführungen

Variante	Abmessungen & technische Daten	Merkmal
ANS-ABS	600 × 500 × 1000 mm · Gesamthöhe 1300–1700 mm	Stahlkorpus, ABS-Deckplatte – preisattraktiv
ANS-ST	600 × 500 × 1000 mm	Korpus und Deckplatte pulverbeschichteter Stahl
ANS-KO	600 × 500 × 1000 mm	vollständig Edelstahl AISI 304 – höchste Hygienestufe
AVIT (VITAL)	Korpus 600 / 700 / 800 × 500 × 1000 mm	Alu-Profilrahmen, Material frei kombinierbar

MERKMALE & AUSSTATTUNG

- Schalldämmende Auskleidung reduziert Vibrationen
- Fronten und Griffe in RAL-Farbe als Stationskennung
- Deckplatte vertieft, mit Randleiste an drei Seiten
- Zentralverriegelung und Schubladenkennzeichnung
- Herausziehbare Schubladenteiler
- Ausziehbare Seitenplatte als zusätzliche Arbeitsfläche
- Zubehör: Instrumentenschiene, Infusionsstange, Abwurfbehälter
- Zubehör: Handschuhbox, Kanülenabwurf, Katheterkorb, Zubehörkorb


KONFIGURATION Vier Ordner, ein Produkt. Maße und Zubehör identisch – nur Material bzw. Plattform ändert sich. · Konstanten des Programms siehe Seite 10 · Farben ab Seite 7

Produktwelt 02 · Medizinische Wagen

REN / RVIT

Reanimations- & Notfallwagen

ABS · ST · KO frei wählbar

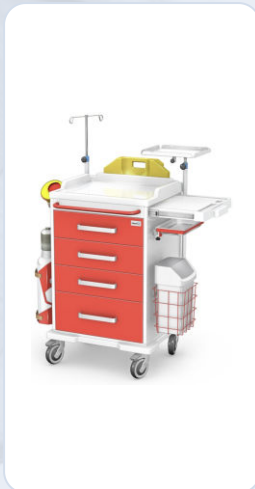

Der Unterschied zur Anästhesiefamilie ist präzise benennbar: Defibrillator-Ablage, CPR-Brett und Sauerstoffflaschenhalter. Das ist im gesamten Wagenprogramm das einzige echte Funktionsmerkmal – alles andere ist Konfiguration. Korpus, Deckplatte und Sockel werden wie bei ANS in ABS, Stahl oder Edelstahl gewählt.

EINSATZBEREICH

Reanimation und Notfall – Station, Ambulanz, Funktionsbereiche

AUSFÜHRUNGEN Variantenachse: Material / Plattform · 4 Ausführungen

Variante	Abmessungen & technische Daten	Merkmal
REN-ABS	600 × 500 × 1000 mm, REN-06 700 mm breit	Stahlkorpus, ABS-Deckplatte
REN-ST	600 × 500 × 1000 mm · REN-06 700 mm breit	Korpus und Deckplatte pulverbeschichteter Stahl in RAL
REN-KO	Korpus 600 × 500 mm · Arbeitshöhe 1000 mm · Modelle REN-01 bis REN-05	vollständig Edelstahl 0H18N9, Fronten optional in RAL lackierbar
RVIT (VITAL)	600 × 500 × 1000 mm	Alu-Profilrahmen, Material frei kombinierbar

MERKMALE & AUSSTATTUNG

- Defibrillator-Ablage, höhenverstellbar
- CPR-Brett für die Reanimation
- Sauerstoffflaschenhalter
- Schalldämmende Auskleidung, Zentralverriegelung
- Fronten in RAL-Farbe, auch bei der Edelstahlausführung lackierbar
- Modelle REN-01 bis REN-06, REN-06 mit 700 mm Korpusbreite
- Ausziehbare Seitenplatte, Infusionsstange, Steckdosenleiste
- Umbau und Erweiterung ohne Eingriff in die Konstruktion

KONFIGURATION Einziger echter Funktionsunterschied zur ANS-Familie: Defibrillator-Ablage, CPR-Brett, O₂-Flaschenhalter. · Konstanten des Programms siehe Seite 10 · Farben ab Seite 7

Produktwelt 02 · Medizinische Wagen

MULTI

Multifunktions- & Stationswagen

ABS · ST · KO frei wählbar



Der flexible Stationswagen – und die einzige Familie des Programms mit mehreren Baubreiten. Von 400 mm für den schmalen Flur bis 900 mm für die Vollversorgung, jeweils in ABS, Stahl oder Edelstahl.

Schubladeneinteilung, Körbe und Tablett werden pro Auftrag festgelegt.

EINSATZBEREICH

Allgemeine Stationsversorgung, individuell konfigurierbar

AUSFÜHRUNGEN Variantenachse: Material · Breite · 3 Ausführungen

Variante	Abmessungen & technische Daten	Merkmal
MULTI-ABS	400 / 700 / 800 / 900 × 500 × 1000 mm	Stahlkorpus, ABS-Deckplatte
MULTI-ST	400 / 700 / 800 / 900 × 500 × 1000 mm	pulverbeschichteter Stahl
MULTI-KO	400 / 700 / 800 / 900 × 500 × 1000 mm	Edelstahl AISI 304

MERKMALE & AUSSTATTUNG

- Vier Baubreiten: 400, 700, 800 und 900 mm
- Modelle MULTI-02 bis MULTI-06
- Korpus wahlweise ABS, Stahl pulverbeschichtet oder Edelstahl AISI 304
- Schalldämmende Auskleidung
- Schubladeneinteilung nach Kundenwunsch
- Aufnahme für Körbe und Küvetten im Format 400 × 300 mm
- Rollen Ø 125 mm, zwei feststellbar

KONFIGURATION Einzige Familie mit mehreren Baubreiten (MULTI-02 bis MULTI-06). · Konstanten des Programms siehe Seite 10
· Farben ab Seite 7

OPTIMUM

Behandlungs-, Reanimations- & Eingriffswagen

Stahl pulverbeschichtet · Alu-Rahmen · ABS-Deckplatte



Die Designlinie des Programms, in drei Typen: Z für die Behandlung, R für die Reanimation, P für Eingriffe. Alle drei teilen denselben Korpus mit Alu-Rahmen, Zentralverriegelung und 125-mm-Rollen. Der Unterschied zwischen Z und P ist ausschließlich die Arbeitsplatten-Mechanik: einschiebbar bei Z, nach vorne ausziehbar bei P.

EINSATZBEREICH

Behandlung, Reanimation und Eingriffe – Notaufnahme, Intensiv, OP

AUSFÜHRUNGEN Variantenachse: Typ · 3 Ausführungen

Variante	Abmessungen & technische Daten	Merkmal
OPTIMUM Z	700 × 500 × 1000 mm · Gesamthöhe 1700 mm · Korpus 600×500 mm	Behandlung, Arbeitsplatte einschiebbar
OPTIMUM R	700 × 500 × 1000 mm	Reanimation – Defi-Ablage, CPR-Brett, O2-Halter
OPTIMUM P	700 × 500 × 1000 mm	Eingriffe, Arbeitsplatte nach vorne ausziehbar

MERKMALE & AUSSTATTUNG

- Alu-Profilrahmen weiß, Korpus pulverbeschichteter Stahl
- Deckplatte aus ABS mit Randleiste an drei Seiten
- Ausziehbare bzw. einschiebbare Zusatz-Arbeitsplatte
- Sockel mit ABS-Abdeckung, Abrutschschutz und integrierten Puffern
- Zentralverriegelung, Fronten und Griffe in RAL
- Typ R zusätzlich mit Defibrillator-Ablage und CPR-Brett
- Option: Arbeitsplatte aus Edelstahl AISI 304
- Zubehör: Kippbehälter, Ablagen, Zubehörkorb, Abfallbehälter
- Zubehör: Instrumentenbehälter, Handschuhbox, Kanülenabwurf, Katheterkorb
- Zubehör: Infusionsstange, Sauerstoffflaschenhalter, Steckdosenleiste

KONFIGURATION Designlinie mit Alu-Rahmen. Unterschied Z und P ist ausschließlich die Arbeitsplatten-Mechanik. · Konstanten des Programms siehe Seite 10 · Farben ab Seite 7

Produktwelt 02 · Medizinische Wagen

K-5 / K-6

Beistell- & Assistenzwagen

Stahl pulverbeschichtet · optional Edelstahl



Zwei kompakte Helfer für Behandlungsraum und Ambulanz. K-5 steht auf einem Fünffußgestell und fährt leicht und kippsicher – auch bei voll ausgezogener Schublade. K-6 ist der kleine Multifunktionswagen mit Edelstahl-Deckplatte und einer Schublade.

EINSATZBEREICH

Behandlungszimmer, Praxis, OP-Assistenz

AUSFÜHRUNGEN Variantenachse: Bauform · 2 Ausführungen

Variante	Abmessungen & technische Daten	Merkmal
K-5	Platte 450×450 mm · H 800 mm · Fuß Ø 600 mm · Rollen Ø 55 mm, 3 Bremsen	Fünffußgestell, 1–4 Schubladen
K-6	500 × 400 × 800 mm · Deckplatte 450×320 · Schublade 450×320×155 mm	Fahrgestell, Edelstahl-Deckplatte

MERKMALE & AUSSTATTUNG

- K-5: Fünffußgestell, Rollen Ø 55 mm, drei feststellbar
- K-5: ein bis vier Schubladen, Fronten in RAL-Farbe
- K-5: Deckplatte 450 × 450 mm mit Vertiefung
- K-6: Edelstahl-Deckplatte mit hochgezogenen Kanten
- K-6: Schublade 450 × 320 × 155 mm, Rollen Ø 75 mm
- Beide optional vollständig aus Edelstahl AISI 304

KONFIGURATION Beide sind kompakte Helfer für Behandlungsraum und Ambulanz. · Konstanten des Programms siehe Seite 10 · Farben ab Seite 7

Behandlungs-, Instrumenten- & Stationstische

Tische und Wagen für Eingriffsraum, OP-Vorbereitung und Station. Edelstahl AISI 304 dort, wo Hygiene entscheidet, pulverbeschichteter Stahl dort, wo Wirtschaftlichkeit zählt.



7 PRODUKTFAMILIEN · 15 VARIANTEN

STKO

SZ

E-01

E-02 / E-03

K-3

MB-3

WL

Familienseiten: STKO S. 25 · SZ S. 26 · E-01 S. 27 · E-02 / E-03 S. 28 · K-3 S. 29 · MB-3 S. 30 · WL S. 31

Übersicht · Behandlungs-, Instrumenten- & Stationstische

	Produktfamilie	Var.	Varianten	Einsatzbereich	Seite
	STKO Behandlungs- & Verbandwagen Edelstahl AISI 304 (KO) oder Stahl pulverbeschichtet (ST)	2	STKO (KO) STKO ST-Typ	Ambulanz, Verbandzimmer, Eingriffsraum, Station	25
	SZ Kompakter Behandlungstisch Stahlrohrrahmen weiß · Deckplatte Edelstahl AISI 304	1	SZ	Kleine Eingriffsräume, Praxis, Untersuchung	26
	E-01 Mayo-Instrumententisch Edelstahl AISI 304	2	E-01KO · hydraulisch E-01KO/E · elektrisch	OP, Eingriffsraum, sterile Instrumentenablage	27
	E-02 / E-03 Instrumententische, fahrbar Edelstahl AISI 304 · Sockel Stahl oder Edelstahl	2	E-02 E-03KO	Instrumenten- und Materialablage, OP- Vorbereitung	28
	K-3 Verband- & Stationswagen Alu-Stahl-Rahmen · Tablett Edelstahl AISI 304	6	C-01 C-02 C-03 / C-04 D-01 / D-02 D-03 D-04	Station, Visite, Verbandwechsel, Materialtransport	29
	MB-3 Stationstisch mit ABS- Deckplatte Alu-Rahmen · ABS-Deckplatte · Edelstahl-Tablett	1	MB-3	Visite, Verbandwechsel, Materialbereitstellung	30
	WL Stationswagen mit Medikamenten-Organizern Alu-Stahl-Rahmen · Tablett Edelstahl AISI 304	1	WL	Medikamentenverteilung auf Station	31

Var. = Anzahl der Ausführungen dieser Familie. Alle aufgeführten Varianten sind lieferbar; die vollständigen Abmessungen stehen auf der Familienseite bzw. liegen als Variantenliste vor. Baureihen ohne eigene Seite stellen wir auf Anfrage im gleichen Umfang vor.

Produktwelt 03 · Behandlungs-, Instrumenten- & Stationstische

STKO

Behandlungs- & Verbandwagen

Edelstahl AISI 304 (KO) oder Stahl pulverbeschichtet (ST)



Der Klassiker unter den Behandlungswagen – in zwei Materialstufen. Typ KO besteht vollständig aus Edelstahl AISI 304, Typ ST aus pulverbeschichtetem Stahl mit farbigen Fronten. Beide haben integrierte Instrumentenschienen, an denen sich Abwurfschale, Kathetereinsatz und Handschuhbox ohne Werkzeug einhängen lassen. Die Deckplattengröße bestimmt das Gesamtmaß.

EINSATZBEREICH

Ambulanz, Verbandzimmer, Eingriffsraum, Station

AUSFÜHRUNGEN Variantenachse: Material · 2 Ausführungen

Variante	Abmessungen & technische Daten	Merkmal
STKO (KO)	STKO-02 570×550×900 mm · STKO-04 1270×550×900 mm · Deckplatten 450/500/550/600/1000 mm	vollständig Edelstahl AISI 304
STKO ST-Typ	STKO-01ST 570×550×900 mm · STKO-04ST 1270×550×900 mm · Deckplatten bis 1100 mm	pulverbeschichteter Stahl, Fronten in RAL

MERKMALE & AUSSTATTUNG

- Integrierte Instrumentenschienen für Anbauzubehör
- Vertiefte Deckplatte gegen Abrutschen
- Rollen Ø 100 mm mit Puffern, zwei feststellbar
- Deckplattenlängen 450 / 500 / 550 / 600 und 1100 mm
- Schiebegriffe an den Schmalseiten (ST-Typ)
- Zubehör: Überbauablage, Kippschalen, Aufsatz für 4, 5 oder 6 Kippbehälter
- Zubehör: Abfallsackhalter mit Deckel, Zubehörkorb, Katheterkorb
- Zubehör: Handschuhbox, Kanülenabwurf, Infusionsstange

KONFIGURATION Gleiche Baureihe in zwei Materialstufen. Rollen Ø 100 mm mit Puffern. · Konstanten des Programms siehe Seite 10 · Farben ab Seite 7

Produktwelt 03 · Behandlungs-, Instrumenten- & Stationstische

SZ

Kompakter Behandlungstisch

Stahlrohrrahmen weiß · Deckplatte Edelstahl AISI 304

Die kleinste Bauform im Behandlungstisch-Programm. Ein Stahlrohrrahmen in Weiß, eine Edelstahl-Deckplatte und eine kippbare Abwurfschale – mehr braucht es im kleinen Eingriffsraum oft nicht. Ergänzt die STKO-Reihe nach unten.

EINSATZBEREICH

Kleine Eingriffsräume, Praxis, Untersuchung

AUSFÜHRUNGEN Variantenachse: – · 1 Ausführungen

Variante	Abmessungen & technische Daten	Merkmal
SZ	740 × 410 × 810 mm	Edelstahl-Deckplatte, Kipp-Abwurfschale, Rollen Ø 50 mm

MERKMALE & AUSSTATTUNG

- Rahmen aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, weiß
- Deckplatte aus Edelstahl AISI 304
- Flache, kippbare Abwurfschale aus Edelstahl
- Gesamtmaß 740 × 410 × 810 mm
- Rollen Ø 50 mm, zwei feststellbar
- Option: Rahmen aus Edelstahl AISI 304

KONFIGURATION Kleinste Bauform – ergänzt STKO nach unten. · Konstanten des Programms siehe Seite 10 · Farben ab Seite 7

Produktwelt 03 · Behandlungs-, Instrumenten- & Stationstische

E-01

Mayo-Instrumententisch

Edelstahl AISI 304



Der Mayo-Tisch ist eines der meistgesuchten Einzelprodukte im medizinischen Mobiliar. TECH-MED liefert ihn in zwei Antriebsvarianten – und die elektrische ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal: Höhenverstellung per Fußschalter, 24-V-Akku mit Überlastschutz und optisch-akustischer Ladewarnung, externes Ladegerät. Beide Varianten bestehen vollständig aus Edelstahl AISI 304.

EINSATZBEREICH

OP, Eingriffsraum, sterile Instrumentenablage

AUSFÜHRUNGEN Variantenachse: Antrieb · 2 Ausführungen

Variante	Abmessungen & technische Daten	Merkmal
E-01KO · hydraulisch	750 × 500 × 950–1320 mm · Fußpedal · Platte 360° drehbar	Rollen Ø 75 mm, optional Doppelrollen
E-01KO/E · elektrisch	Hub 910–1310 mm · 24-V-Akku, Fußschalter, Ladegerät	einzigster elektrisch verstellbarer Mayo-Tisch am Markt, Platte abnehmbar

MERKMALE & AUSSTATTUNG

- Vollständig aus Edelstahl AISI 304
- Vertiefte Deckplatte, 360° drehbar
- Hydraulisch: Fußpedal, Hub 950–1320 mm
- Elektrisch: Fußschalter, Hub 910–1310 mm, 24-V-Sicherheitsspannung
- Akkupack mit automatischem Überlastschutz und Ladeanzeige
- Option: Drehsperre der Deckplatte
- Option: abnehmbare Deckplatte für die vollständige Desinfektion
- Rollen Ø 75 mm einfach oder doppelt, optional Ø 100 mm

KONFIGURATION Die Elektro-Version ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal – prominent zeigen. · Konstanten des Programms siehe Seite 10 · Farben ab Seite 7

Produktwelt 03 · Behandlungs-, Instrumenten- & Stationstische

E-02 / E-03

Instrumententische, fahrbar

Edelstahl AISI 304 · Sockel Stahl oder Edelstahl



Zwei Größen derselben Bauart: der fahrbare Instrumententisch mit höhenverstellbarer Edelstahl-Deckplatte. E-02 wird von Hand verstellt, E-03 über eine Handkurbel – bei 1100 mm Plattenlänge die angenehmere Lösung.

EINSATZBEREICH

Instrumenten- und Materialablage, OP-Vorbereitung

AUSFÜHRUNGEN Variantenachse: Baugröße · 2 Ausführungen

Variante	Abmessungen & technische Daten	Merkmal
E-02	750 × 500 × 850–1300 mm · manuelle Höhenverstellung	Edelstahl-Deckplatte, Stahlsockel oder ganz Edelstahl
E-03KO	1100 × 600 × 850–1200 mm · Handkurbel	vollständig Edelstahl, alle Rollen feststellbar

MERKMALE & AUSSTATTUNG

- Deckplatte aus Edelstahl AISI 304 mit Vertiefung oder hochgezogenen Kanten
- E-02: Höhenverstellung 850–1300 mm von Hand
- E-03: Höhenverstellung 850–1200 mm über Handkurbel
- E-02 optional vollständig aus Edelstahl
- E-03 vollständig aus Edelstahl, alle Rollen feststellbar
- Rollen Ø 75 mm

KONFIGURATION Zwei Größen derselben Bauart. · Konstanten des Programms siehe Seite 10 · Farben ab Seite 7

Produktwelt 03 · Behandlungs-, Instrumenten- & Stationstische

K-3

Verband- & Stationswagen

Alu-Stahl-Rahmen · Tablett Edelstahl AISI 304



Der meistverkaufte Stationswagen-Typ – und der Grund dafür ist die Tablettlösung. Bei Typ D sind Deckplatte und Ablagen herausnehmbare Edelstahl-Tabletts, die komplett in die Reinigungs- und Desinfektionsanlage wandern, während der Wagen weiterläuft. Typ C hat eine fest montierte Deckplatte mit Randleiste. Acht Bauformen decken jede Zimmergröße ab.

EINSATZBEREICH

Station, Visite, Verbandwechsel, Materialtransport

AUSFÜHRUNGEN Variantenachse: Typ · Bauform · 6 Ausführungen

Variante	Abmessungen & technische Daten	Merkmal
C-01	770 × 430 × 880 mm · lange Ausführung 950 mm	Deckplatte fest montiert, Randleiste
C-02	770 × 430–480 × 880 mm · lang 950/985 mm	mit Schublade
C-03 / C-04	770 × 430 × 880 mm · lang 950 mm	mehrere Ablagen
D-01 / D-02	805 × 430–480 × 890 mm	Deckplatte als herausnehmbares Tablett 610×358×17 mm
D-03	1000 × 430–480 × 890 mm	große Ausführung, sechs Bauformen A–F1
D-04	680 × 430 × 890 mm · Kurzversion 480 mm	kompakt

MERKMALE & AUSSTATTUNG

- Aluminium-Stahl-Rahmen, pulverbeschichtet weiß
- Typ C – Deckplatte fest montiert, mit hochgezogener Randleiste
- Typ D – Deckplatte als herausnehmbares Tablett 610 × 358 × 17 mm
- Kunststoffküvette 395 × 325 × 65 mm
- Korbablage 655 × 410 × 90 mm
- Abfallsackrahmen aus Stahl mit Kunststoffdeckel
- Rollen Ø 75 mm, zwei feststellbar
- Option: Wagen vollständig aus Edelstahl AISI 304
- Zubehör: Kipp-Abwurfschale, Zubehörkorb, Abwurfschale in Edelstahl

KONFIGURATION Acht Ordner, eine Familie. Typ C = fest montierte Deckplatte, Typ D = herausnehmbares Tablett. · Konstanten des Programms siehe Seite 10 · Farben ab Seite 7

Produktwelt 03 · Behandlungs-, Instrumenten- & Stationstische

MB-3

Stationstisch mit ABS-Deckplatte

Alu-Rahmen · ABS-Deckplatte · Edelstahl-Tablett

Der Stationstisch mit ABS-Deckplatte: leichter und geräuschärmer als eine Stahlplatte, dabei genauso gut zu reinigen. Das Edelstahl-Tablett ist auf Wunsch herausnehmbar, die Kuvette und der Abfallsackrahmen gehören zur Grundausstattung.

EINSATZBEREICH

Visite, Verbandwechsel, Materialbereitstellung

AUSFÜHRUNGEN Variantenachse: – · 1 Ausführungen

Variante	Abmessungen & technische Daten	Merkmal
MB-3	835 × 455 × 880 mm · Deckplatte 740×410 mm	ABS-Deckplatte, Edelstahl-Tablett, Kunststoffkuvette

MERKMALE & AUSSTATTUNG

- Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluminiumprofil, weiß
- Deckplatte und Ablage aus ABS mit Vertiefung
- Edelstahl-Tablett, optional herausnehmbar
- Kunststoffkuvette und Korbablage
- Abfallsackrahmen mit ABS-Deckel
- Gesamtmaß 835 × 455 × 880 mm, Deckplatte 740 × 410 mm
- Rollen Ø 75 mm, zwei feststellbar

KONFIGURATION Funktional nah an K-3, aber mit ABS-Deckplatte. · Konstanten des Programms siehe Seite 10 · Farben ab Seite 7

Produktwelt 03 · Behandlungs-, Instrumenten- & Stationstische

WL

Stationswagen mit Medikamenten-Organizern

Alu-Stahl-Rahmen · Tablett Edelstahl AISI 304



Der Spezialist für die Medikamentenverteilung. Pro Ebene liegen zwei herausnehmbare Edelstahl-Tablets und bis zu 60 Medikamenten-Organizer aus Kunststoff – die Visite ist damit in einem Gang vorbereitet, das Tablett wandert danach komplett in die Aufbereitung.

EINSATZBEREICH

Medikamentenverteilung auf Station

AUSFÜHRUNGEN Variantenachse: – · 1 Ausführungen

Variante	Abmessungen & technische Daten	Merkmal
WL	660 × 430 × 890 mm	zwei herausnehmbare Edelstahl-Tablets je Ebene, 60 Medikamenten-Organizer je Ebene

MERKMALE & AUSSTATTUNG

- Rahmen aus Aluminium und Stahl, pulverbeschichtet weiß
- Zwei herausnehmbare Edelstahl-Tablets je Ebene
- 60 Medikamenten-Organizer aus Kunststoff je Ebene
- Gesamtmaß 660 × 430 × 890 mm
- Rollen Ø 75 mm, zwei feststellbar
- Option: Rahmen und Zubehörkorb aus Edelstahl AISI 304

KONFIGURATION Spezialist für die Medikamentenverteilung – eigenes Verkaufsargument. · Konstanten des Programms siehe Seite 10 · Farben ab Seite 7

Transport, Entsorgung & Sterilgutlogistik

Wäsche, Abfall und Material bewegen sich täglich durch das Haus. Dazu die Packtische und Regalsysteme für die Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte.



14 PRODUKTFAMILIEN · 43 VARIANTEN



Familienseiten: WCB S. 35 · MB S. 36 · WZ / WZS S. 37 · WZB S. 38 · WMW S. 39 · WT S. 40 · WPP S. 41 · WK / WKS S. 42 · RKSS. 43 · RM S. 44 · SL / WS S. 45 · ROB S. 46 · SMO S. 47 · PAK S. 48

Übersicht · Transport, Entsorgung & Sterilgutlogistik (Teil 1)

	Produktfamilie	Var.	Varianten	Einsatzbereich	Seite
	WCB Wäschewagen rein / unrein Alu-Rahmen · Laminatfüllung RAL · ABS-Deckel	4	WCB-1111 / 1121 / 1221 / 1411 WCB-2123 / 2133 WCB-2200 WCB-2223	Stationsflur, Wäschelogistik, Hygienekonzept	35
	MB Abfall- & Wäschesackwagen Edelstahl AISI 304 · ABS-Deckel	4	MB-01 MB-02 MB-03 MB-4 (Sonderform)	Abfalltrennung auf Station, unreiner Arbeitsraum	36
	WZ / WZS Wäschesackwagen Edelstahl Edelstahl AISI 304	5	WZ-01 · 40 l WZ-01 WZ-02 WZ-03 WZS-01	Wäsche- und Abfallsammlung, wirtschaftliche Standardlösung	37
	WZB Wäschewagen Edelstahl, geschlossen Edelstahl AISI 304 · ABS-Deckel	1	WZB	Hygienisch anspruchsvoller Wäschetransport	38
	WMW Wäsche- & Materialwagen Stahl pulverbeschichtet RAL · optional ABS	5	WMW-1110 WMW-1210 WMW-1230 WMW-1450 WMW-2110	Wäsche- und Materialverteilung auf Station	39
	WT Plattform- & Transportwagen Edelstahl AISI 304 oder Stahl pulverbeschichtet	1	WT-01	Materialtransport im Haus, schwere Lasten	40
	WPP Speisentransportwagen Edelstahl AISI 304	3	WPP-01 WPP-01 mit Seitenablage WPP-02G	Speisenverteilung, Küchenlogistik	41

Var. = Anzahl der Ausführungen dieser Familie. Alle aufgeführten Varianten sind lieferbar; die vollständigen Abmessungen stehen auf der Familienseite bzw. liegen als Variantenliste vor. Baureihen ohne eigene Seite stellen wir auf Anfrage im gleichen Umfang vor.

Übersicht · Transport, Entsorgung & Sterilgutlogistik (Teil 2)

	Produktfamilie	Var.	Varianten	Einsatzbereich	Seite
	WK / WKS Korbwagen Edelstahl AISI 304 · optional Stahl	6	WK-01/A WK-02/A · B · C WK-03 WKS-1 WKS-2 WKS-3	Materialtransport, Stationsversorgung, Sterilgutlogistik	42
	RKS Rost- & Lagerregale Edelstahl AISI 304	6	RKS-2 RKS-3 RKS-4 RKS-5 RKS-6 / RKS-7 RK	Lager, unreiner Arbeitsraum, Sterilgutbereich	43
	RM Lagerregale Edelstahl AISI 304	1	RM	Lager, Vorratsraum, Apotheke	44
	SL / WS Regale für Steckbecken & Urinflaschen Edelstahl AISI 304	2	SL WS	Unreiner Arbeitsraum, Steckbeckenspüler	45
	ROB Wandregal für Schuhe Edelstahl AISI 304	1	ROB	Personalumkleide, Schleuse	46
	SMO Ständer für Abwurfbehälter Edelstahl AISI 304	3	SMO-01 / SMO-02 SMO-03 SMO-04 / SMO-05	Behandlungszimmer, Eingriffsraum, Labor	47
	PAK Packtische für die Sterilgutaufbereitung Edelstahl AISI 304	1	PAK-01 / PAK-02	AEMP / ZSVA, Sterilgutverpackung	48

Var. = Anzahl der Ausführungen dieser Familie. Alle aufgeführten Varianten sind lieferbar; die vollständigen Abmessungen stehen auf der Familienseite bzw. liegen als Variantenliste vor. Baureihen ohne eigene Seite stellen wir auf Anfrage im gleichen Umfang vor.

Produktwelt 04 · Transport, Entsorgung & Sterilgutlogistik

WCB

Wäschewagen rein / unrein

Alu-Rahmen · Laminatfüllung RAL · ABS-Deckel



Wäschewagen stehen im Flur und prägen das Bild einer Station mehr, als vielen bewusst ist. Die WCB-Serie löst das über ein Alu-Rahmensystem mit Laminatfüllung, das in jeder RAL-Farbe geliefert wird – der Wagen fügt sich in die Einrichtung ein, statt sie zu stören. Fünf Bauformen von 900 bis 1450 mm, ein- oder zweikammerig.

EINSATZBEREICH

Stationsflur, Wäschelogistik, Hygienekonzept

AUSFÜHRUNGEN Variantenachse: Bauform · 4 Ausführungen

Variante	Abmessungen & technische Daten	Merkmal
WCB-1111 / 1121 / 1221 / 1411	1050 × 580 × 1080 mm	einkammerig
WCB-2123 / 2133	1100 × 580 × 1080 mm	zweikammerig
WCB-2200	900 × 580 × 1080 mm	kompakt
WCB-2223	1450 × 580 × 1080 mm	groß

MERKMALE & AUSSTATTUNG

- Rahmen aus geschlossenen Alu-Profilen mit ABS-Verbindern
- Füllung aus beidseitig laminierter Spanplatte
- Rahmen eloxiert oder in RAL-Farbe pulverbeschichtet
- Deckel aus ABS, manuell oder per Fußpedal
- Edelstahlring mit Clips gegen Abrutschen des Sacks
- Option: Silikon-Klemmring statt Clips
- Rollen Ø 100 mm, zwei feststellbar, umlaufende Eckpuffer
- Deckplatte mit Randleiste an drei Seiten

KONFIGURATION Alu-Rahmen mit Laminatfüllung in RAL-Farbe – der optisch hochwertigste Wäschewagen. · Konstanten des Programms siehe Seite 10 · Farben ab Seite 7

Produktwelt 04 · Transport, Entsorgung & Sterilgutlogistik

MB

Abfall- & Wäschesackwagen

Edelstahl AISI 304 · ABS-Deckel



Abfalltrennung ist auf Station tägliche Routine und zugleich ein Dauerthema in Audits. Die MB-Serie bildet sie mit ein bis drei Ringen auf einem Fahrgestell ab und ist auf Wunsch mit Trennungs-Kennzeichnung beschriftet. Der ABS-Deckel schließt gedämpft, wahlweise per Hand oder Fußpedal – letzteres ist im hygienisch sensiblen Bereich die richtige Wahl.

EINSATZBEREICH

Abfalltrennung auf Station, unreiner Arbeitsraum

AUSFÜHRUNGEN Variantenachse: Ringzahl · Volumen · 4 Ausführungen

Variante	Abmessungen & technische Daten	Merkmal
MB-01	395 × 495 × 695 mm (60–80 l) · 875 mm (100–120 l)	ein Ring
MB-02	815 × 495 × 695 / 875 mm	zwei Ringe
MB-03	1225 × 495 × 695 / 875 mm	drei Ringe
MB-4 (Sonderform)	880 × 405 × 860 mm (100–120 l)	schmale Bauform

MERKMALE & AUSSTATTUNG

- Rahmen und Sackring aus Edelstahlrohr AISI 304
- Deckel aus ABS in Weiß oder Grau, mit Soft-Close
- Deckelöffnung manuell oder per Fußpedal
- Sockel aus Stahl mit ABS-Abdeckung
- Rollen Ø 50 mm, zwei feststellbar
- Option: Silikonring gegen Abrutschen des Sacks
- Option: Wagen mit Trennungs-Kennzeichnung
- Volumen 60–80 l und 100–120 l

KONFIGURATION Edelstahlrahmen, ABS-Deckel mit Soft-Close, optional Fußpedal und Trennungs-Kennzeichnung. · Konstanten des Programms siehe Seite 10 · Farben ab Seite 7

WZ / WZS

Wäschesackwagen Edelstahl

Edelstahl AISI 304



Die wirtschaftliche Standardlösung für Wäsche und Abfall: ein Edelstahlrahmen, ein Sackring, fertig. Ein bis drei Ringe, Volumen von 40 bis 120 Litern. WZS ist die faltbare Variante – zusammengeklappt braucht sie kaum Lagerplatz.

EINSATZBEREICH

Wäsche- und Abfallsammlung, wirtschaftliche Standardlösung

AUSFÜHRUNGEN Variantenachse: Ringzahl · Volumen · 5 Ausführungen

Variante	Abmessungen & technische Daten	Merkmal
WZ-01 · 40 l	315 × 385 × 520 mm	Kleinstausführung
WZ-01	355 × 410 × 680 mm (60–80 l) · 410 × 465 × 850 mm (100–120 l)	ein Ring
WZ-02	790 × 440 × 680 / 900 × 495 × 850 mm	zwei Ringe
WZ-03	1190 × 440 × 680 / 1355 × 495 × 860 mm	drei Ringe
WZS-01	klappbar, für 100-l-Säcke	Faltgestell, platzsparend zu lagern

MERKMALE & AUSSTATTUNG

- Vollständig aus Edelstahl AISI 304
- Ein-, zwei- und dreiringige Ausführungen
- Volumen 40 l, 60–80 l und 100–120 l
- Sackring mit Clips gegen Abrutschen
- Option: Silikonring statt Clips
- WZS-01 klappbar, für 100-l-Säcke
- Rollen Ø 50 mm, zwei feststellbar

KONFIGURATION Die wirtschaftliche Standardlösung. WZS ist die faltbare Variante. · Konstanten des Programms siehe Seite 10 · Farben ab Seite 7

Produktwelt 04 · Transport, Entsorgung & Sterilgutlogistik

WZB

Wäschewagen Edelstahl, geschlossen

Edelstahl AISI 304 · ABS-Deckel



Der geschlossene Wäschewagen aus Edelstahl – dort, wo der Sack nicht sichtbar sein darf. Korpus, Deckel und Ablage bilden eine glatte, vollflächig desinfizierbare Einheit; Eckpuffer schützen Wagen und Wand.

EINSATZBEREICH

Hygienisch anspruchsvoller Wäschetransport

AUSFÜHRUNGEN

Variantenachse: – · 1 Ausführungen

Variante	Abmessungen & technische Daten	Merkmal
WZB	1050 × 580 × 1080 mm mit Puffern · Schrank 540 × 520 × 910 mm · Ablage 500 × 480 mm	geschlossener Edelstahlkorpus

MERKMALE & AUSSTATTUNG

- Vollständig aus Edelstahl AISI 304
- ABS-Deckel, manuell oder per Fußpedal
- Sackring mit Clips oder Silikonklemmung
- Gesamtmaß 1050 × 580 × 1080 mm mit Puffern
- Schrankmaß 540 × 520 × 910 mm, Ablage 500 × 480 mm
- Rollen Ø 100 mm mit Puffern, zwei feststellbar

KONFIGURATION

Für hygienisch anspruchsvollen Wäschetransport. · Konstanten des Programms siehe Seite 10 · Farben ab Seite 7

Produktwelt 04 · Transport, Entsorgung & Sterilgutlogistik

WMW

Wäsche- & Materialwagen

Stahl pulverbeschichtet RAL · optional ABS

Der Wäsche- und Materialwagen für die Stationsverteilung, in fünf Bauhöhen von 960 bis 1160 mm. Pulverbeschichteter Stahl in RAL-Farbe macht ihn zum sichtbaren Teil der Stationsgestaltung; Deckplatte und Sockelabdeckung sind optional in ABS lieferbar.

EINSATZBEREICH

Wäsche- und Materialverteilung auf Station

AUSFÜHRUNGEN Variantenachse: Bauhöhe · 5 Ausführungen

Variante	Abmessungen & technische Daten	Merkmal
WMW-1110	640 × 540 × 960 mm	Grundausführung, auch als /ABS
WMW-1210	640 × 540 × 1030 mm	mit Aufbau
WMW-1230	640 × 540 × 1100 mm	hoher Aufbau
WMW-1450	640 × 540 × 1160 mm	Maximalausführung, auch als /ABS
WMW-2110	845 × 545 × 960 mm	breite Ausführung

MERKMALE & AUSSTATTUNG

- Stahl pulverbeschichtet in RAL-Farbe
- Fünf Bauformen WMW-1110 bis WMW-2110
- Bauhöhen 960 / 1030 / 1100 / 1160 mm
- Breite Ausführung WMW-2110 mit 845 mm
- Option: Deckplatte und Sockelabdeckung aus ABS
- Rollen Ø 100 mm, zwei feststellbar

KONFIGURATION Pulverbeschichteter Stahl in RAL, optional ABS-Deckplatte und Sockelabdeckung. · Konstanten des Programms
siehe Seite 10 · Farben ab Seite 7

Produktwelt 04 · Transport, Entsorgung & Sterilgutlogistik

WT

Plattform- & Transportwagen

Edelstahl AISI 304 oder Stahl pulverbeschichtet



Der Arbeitswagen für schwere Lasten im Haustransport. 200-mm-Räder rollen auch über Türschwellen und Fugen, die Eckpuffer nehmen den Anstoß auf. Wahlweise in Edelstahl oder pulverbeschichtetem Stahl.

EINSATZBEREICH

Materialtransport im Haus, schwere Lasten

AUSFÜHRUNGEN Variantenachse: – · 1 Ausführungen

Variante	Abmessungen & technische Daten	Merkmal
WT-01	800 × 600 × 900 mm	Edelstahl oder pulverbeschichtet, Rollen Ø 200 mm, Eckpuffer

MERKMALE & AUSSTATTUNG

- Edelstahl AISI 304 oder Stahl pulverbeschichtet in RAL
- Gesamtmaß 800 × 600 × 900 mm
- Rollen Ø 200 mm, zwei feststellbar
- Eckpuffer am Sockel
- Zwei Ebenen, Ablagen mit hochgezogenem Rand

KONFIGURATION Für schwere Lasten im Haustransport. · Konstanten des Programms siehe Seite 10 · Farben ab Seite 7

Produktwelt 04 · Transport, Entsorgung & Sterilgutlogistik

WPP

Speisentransportwagen

Edelstahl AISI 304



Der Speisentransportwagen aus Edelstahl, in drei Bauformen. Deckplatte und Ablage sind herausnehmbare Tablett – nach dem Transport geht alles komplett in die Spülung. Die Variante mit Seitenablage schafft zusätzliche Abstellfläche beim Verteilen.

EINSATZBEREICH

Speisenverteilung, Küchenlogistik

AUSFÜHRUNGEN Variantenachse: Bauform · 3 Ausführungen

Variante	Abmessungen & technische Daten	Merkmal
WPP-01	1015 × 600 × 900 mm	ein Tablett
WPP-01 mit Seitenablage	1015 × 600 × 900 mm · Seitenablage 510×335 mm	mit ausklappbarer Ablage
WPP-02G	1290 × 680 × 900 mm	zwei Ebenen, groß

MERKMALE & AUSSTATTUNG

- Vollständig aus Edelstahl AISI 304
- Deckplatte und Ablage als herausnehmbare Tablett
- WPP-01: 1015 × 600 × 900 mm
- WPP-01 mit Seitenablage 510 × 335 mm
- WPP-02G: 1290 × 680 × 900 mm
- Rollen Ø 125 mm, zwei feststellbar

KONFIGURATION Vollständig Edelstahl, Rollen Ø 125 mm. · Konstanten des Programms siehe Seite 10 · Farben ab Seite 7

WK / WKS

Korbwagen

Edelstahl AISI 304 · optional Stahl



Zwei Systeme für den Materialtransport: WK ist der Rahmenwagen, in den Drahtkörbe eingehängt werden – ein bis drei Körbe, mit Schiebegriff. WKS ist der Korbregalwagen für die Sterilgutlogistik, in der Ausführung WKS-1 zusätzlich höhenverstellbar.

EINSATZBEREICH

Materialtransport, Stationsversorgung, Sterilgutlogistik

AUSFÜHRUNGEN Variantenachse: System · Baugröße · 6 Ausführungen

Variante	Abmessungen & technische Daten	Merkmal
WK-01/A	410 × 420 × 800 mm (mit Griff 540 mm)	ein Korb
WK-02/A · B · C	730 × 420 × 800 mm (mit Griff 860 mm)	zwei Körbe
WK-03	780 × 420 × 800 mm (mit Griff 910 mm)	drei Körbe
WKS-1	575 × 750 × 950–1250 mm	höhenverstellbar
WKS-2	575 × 750 × 950 mm	fixe Höhe
WKS-3	700 × 300 × 900 mm	schmal

MERKMALE & AUSSTATTUNG

- Rahmen aus Edelstahlrohr AISI 304
- WK-01 bis WK-03 mit ein bis drei Körben
- Korbmaße 335 × 405 × 90 und 655 × 405 × 90 mm
- WKS-1 höhenverstellbar 950–1250 mm
- WKS-3 als schmale Ausführung 700 × 300 × 900 mm
- Rollen Ø 75 mm (WK) bzw. Ø 100 mm (WKS), zwei feststellbar
- Option: Wagen vollständig aus Edelstahl

KONFIGURATION WK = Rahmenwagen mit Körben, WKS = Korbregalwagen für die Sterilgutlogistik. · Konstanten des Programms siehe Seite 10 · Farben ab Seite 7

Produktwelt 04 · Transport, Entsorgung & Sterilgutlogistik

RKS

Rost- & Lagerregale

Edelstahl AISI 304



Das Regalsystem für Lager, unreinen Arbeitsraum und Sterilgutbereich. Rostböden aus Edelstahl lassen Luft und Feuchtigkeit durch – der entscheidende Unterschied zu geschlossenen Böden. Zwei Breiten, zwei Höhen, fahrbar oder feststehend.

EINSATZBEREICH

Lager, unreiner Arbeitsraum, Sterilgutbereich

AUSFÜHRUNGEN Variantenachse: Baugröße · 6 Ausführungen

Variante	Abmessungen & technische Daten	Merkmal
RKS-2	Maße nach Konfiguration	Rostregal mit Ständer
RKS-3	550 × 450 × 1800 mm	schmal
RKS-4	550 × 750 × 1800 mm	breit
RKS-5	550 × 450 × 1900 mm	schmal, hoch
RKS-6 / RKS-7	550 × 750 × 1900 mm	breit, hoch
RK	Maße nach Konfiguration	Grundregal

MERKMALE & AUSSTATTUNG

- Vollständig aus Edelstahl AISI 304
- Rostböden für Luftzirkulation
- Breiten 450 und 750 mm, Höhen 1800 und 1900 mm
- Sieben Bauformen RKS-2 bis RKS-7 sowie Grundregal RK
- Fahrbare Ausführung mit Rollen Ø 100 mm, zwei feststellbar
- Bestückung mit Körben und Ablagen kombinierbar

KONFIGURATION Sieben Ordner, eine Regalfamilie in zwei Breiten und zwei Höhen. · Konstanten des Programms siehe Seite 10 · Farben ab Seite 7

Produktwelt 04 · Transport, Entsorgung & Sterilgutlogistik

RM

Lagerregale

Edelstahl AISI 304



Das klassische Lagerregal aus Edelstahl, in drei Längen und zwei Tiefen. Vier oder fünf Ebenen, wahlweise mit geschlossenen oder Stabböden – letztere mit optionaler Tropfwanne für den feuchten Bereich.

EINSATZBEREICH

Lager, Vorratsraum, Apotheke

AUSFÜHRUNGEN Variantenachse: Baugröße · 1 Ausführungen

Variante	Abmessungen & technische Daten	Merkmal
RM	L 800 / 1000 / 1200 mm · T 400 / 500 mm · H 1800 mm	vier oder fünf Ebenen, Edelstahl

MERKMALE & AUSSTATTUNG

- Vollständig aus Edelstahl AISI 304
- Längen 800, 1000 und 1200 mm
- Tiefen 400 und 500 mm, Höhe 1800 mm
- Vier oder fünf Ebenen
- Ausführung mit Stabböden verfügbar
- Option: Tropfwanne aus Edelstahl

KONFIGURATION Für Lager, Vorratsraum und Apotheke. · Konstanten des Programms siehe Seite 10 · Farben ab Seite 7

SL / WS

Regale für Steckbecken & Urinflaschen

Edelstahl AISI 304



Zwei Systeme für den unreinen Arbeitsraum. SL nimmt Steckbecken, Deckel und Urinflaschen zum Trocknen auf und wird nach Bestückung zwischen 600 und 2000 mm hoch. WS ist das Wand- und Standregal in fester Höhe.

EINSATZBEREICH

Unreiner Arbeitsraum, Steckbeckenspüler

AUSFÜHRUNGEN Variantenachse: System · 2 Ausführungen

Variante	Abmessungen & technische Daten	Merkmal
SL	H 600–2000 mm je nach Bestückung	Trockner für Steckbecken, Deckel und Urinflaschen
WS	H 1800 mm je nach Bestückung	Wand- und Standregal

MERKMALE & AUSSTATTUNG

- Vollständig aus Edelstahl AISI 304
- SL: Trockner für Steckbecken, Deckel und Urinflaschen
- SL: Höhe 600–2000 mm je nach Bestückung
- WS: Höhe 1800 mm je nach Bestückung
- Tropfwanne aus Kunststoff, optional Edelstahl
- Wand- oder Standmontage

KONFIGURATION Ausstattung des unreinen Arbeitsraums · Konstanten des Programms siehe Seite 10 · Farben ab Seite 7

Produktwelt 04 · Transport, Entsorgung & Sterilgutlogistik

ROB

Wandregal für Schuhe

Edelstahl AISI 304

Das wandmontierte Schuhregal für Umkleide und Schleuse. Vollständig aus Edelstahl, Hakenabstand 80 mm, Länge und Ebenenzahl nach Raumsituation.

EINSATZBEREICH

Personalumkleide, Schleuse

AUSFÜHRUNGEN Variantenachse: – · 1 Ausführungen

Variante	Abmessungen & technische Daten	Merkmal
ROB	Maße nach Konfiguration, Hakenabstand 80 mm	Edelstahl, wandmontiert

MERKMALE & AUSSTATTUNG

- Vollständig aus Edelstahl AISI 304
- Wandmontage, platzsparend
- Hakenabstand 80 mm
- Vier oder fünf Ebenen
- Maße nach Konfiguration
- Vollflächig desinfizierbar

KONFIGURATION Personalumkleide und Schleuse. · Konstanten des Programms siehe Seite 10 · Farben ab Seite 7

Produktwelt 04 · Transport, Entsorgung & Sterilgutlogistik

SMO

Ständer für Abwurfbehälter

Edelstahl AISI 304



Fünf Bauformen für drei Behältergrößen: die kleinen Schalenständer mit 3 bis 5 Litern für Behandlungszimmer und Labor, der 10-Liter-Eimer mit oder ohne Deckel und der große 30-Liter-Bodenbehälter. Alle auf Fünffußgestell und fahrbar.

EINSATZBEREICH

Behandlungszimmer, Eingriffsraum, Labor

AUSFÜHRUNGEN Variantenachse: Behältergröße · 3 Ausführungen

Variante	Abmessungen & technische Daten	Merkmal
SMO-01 / SMO-02	Fuß Ø 600 mm · H 840 mm · Schale 3–5 l	Schalenständer, ein oder zwei Schalen
SMO-03	Fuß Ø 600 mm · Ständerhöhe 310 mm · Behälter 30 l	großer Bodenbehälter
SMO-04 / SMO-05	Fuß Ø 480 mm · Behälter 10 l, H 250 mm	Eimer mit oder ohne Deckel

MERKMALE & AUSSTATTUNG

- Vollständig aus Edelstahl AISI 304
- Fünffußgestell, fahrbar
- SMO-01 / SMO-02: Schale 3–5 l, Fuß Ø 600 mm, Höhe 840 mm
- SMO-03: Behälter 30 l, Ständerhöhe 310 mm
- SMO-04 / SMO-05: Eimer 10 l, Fuß Ø 480 mm
- Rollen Ø 50 mm
- Schale und Behälter herausnehmbar

KONFIGURATION Fünf Ordner, eine Familie mit drei Behältergrößen. · Konstanten des Programms siehe Seite 10 · Farben ab Seite


7

Produktwelt 04 · Transport, Entsorgung & Sterilgutlogistik

PAK

Packtische für die Sterilgutaufbereitung

Edelstahl AISI 304

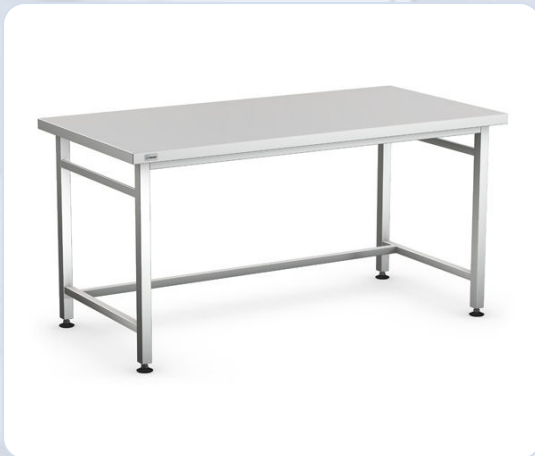

Die Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte ist ein eigenes Planungsthema mit hohen Anforderungen an Ergonomie und Reinigbarkeit. Die PAK-Packtische bestehen vollständig aus Edelstahl AISI 304 und werden aus Bausteinen zusammengestellt. Vier Längen und zwei Tiefen erlauben es, eine vorhandene Raumkontur exakt auszunutzen.

EINSATZBEREICH

AEMP / ZSVA, Sterilgutverpackung

AUSFÜHRUNGEN Variantenachse: Baugröße · 1 Ausführungen

Variante	Abmessungen & technische Daten	Merkmal
PAK-01 / PAK-02	L 800 / 1000 / 1200 / 1400 mm · T 500 / 700 mm · H 800 mm	Nivellierfüße oder Rollen Ø 125 mm, Sterilisationskörbe KS-1...KS-3, Kippbehälter-Aufsätze

MERKMALE & AUSSTATTUNG

- Vollständig aus Edelstahl AISI 304
- Längen 800 / 1000 / 1200 / 1400 mm, Tiefen 500 und 700 mm
- Arbeitshöhe 800 mm
- Nivellierfüße oder Rollen Ø 125 mm, alle feststellbar
- Sterilisationskörbe KS-1, KS-2 und KS-3 integrierbar
- Aufsatz für 4, 5 oder 6 Kippbehälter
- Überbauablagen, Abfallsackhalter, Schrank und Schublade
- Zusammenstellung nach individueller Raumplanung

KONFIGURATION Zusammenstellung nach individueller Raumplanung. · Konstanten des Programms siehe Seite 10 · Farben ab Seite 7

Stations- & Ambulanzausstattung

Die Basisausstattung jedes Zimmers: Infusionsständer und Stative, Sichtschutz, Nachtkästchen, Bettische, Abwurfständer, Tritte und der Blutabnahmestuhl.



7 PRODUKTFAMILIEN · 19 VARIANTEN

SK

KO-2m

PT

WD

SP „FRIEND“

PO

WP-1

Familienseiten: SK S. 51 · KO-2m S. 52 · PT S. 53 · WD S. 54 · SP „FRIEND“ S. 55 · PO S. 56 · WP-1 S. 57

Übersicht · Stations- & Ambulanzausstattung

	Produktfamilie	Var.	Varianten	Einsatzbereich	Seite
	SK Infusionsständer Edelstahl AISI 304 · Säule Stahl oder Edelstahl	2	SK-01 SK-02	Alle Bereiche – Station, Ambulanz, Intensiv, Praxis	51
	KO-2m Teleskop-Infusionsständer Edelstahl AISI 304	3	KO-2m KO-2m doppelt KO-2m Edelstahl komplett	Bettplatz, Decken- und Schienenmontage	52
	PT Teleskop-Sichtschutz Edelstahl AISI 304 · Vorhang waschbar oder Polyester	2	PT-01 PT-02	Bettplatz, Aufwachraum, Notaufnahme	53
	WD Nachtkästchen HPL-Laminat · ABS · Stahl pulverbeschichtet	3	WD-2 WD-7 WD-8	Bettplatz auf Normal- und Privatstation	54
	SP „FRIEND“ Beistell- & Bettisch Stahl weiß oder Edelstahl · Platte Stahl oder ABS	5	SP-1 SP-1/ABS SP-1/ABS-2 SP-2 SP-2/ABS-2	Bettplatz – Essen, Lesen, Arbeiten im Bett	55
	PO Tritte Edelstahl AISI 304	3	PO-01 PO-02 PO-03 mit Haltegriff	Bettplatz, Untersuchung, Röntgen	56
	WP-1 Injektions- & Blutabnahmestuhl Stahlrahmen weiß · Polsterung desinfektionsmittelbeständig	1	WP-1	Blutabnahme, Injektion, Labor und Ambulanz	57

Var. = Anzahl der Ausführungen dieser Familie. Alle aufgeführten Varianten sind lieferbar; die vollständigen Abmessungen stehen auf der Familienseite bzw. liegen als Variantenliste vor. Baureihen ohne eigene Seite stellen wir auf Anfrage im gleichen Umfang vor.

Produktwelt 05 · Stations- & Ambulanzausstattung

SK

Infusionsständer

Edelstahl AISI 304 · Säule Stahl oder Edelstahl



Der Infusionsständer ist der meistgesuchte Einzelartikel des gesamten Programms und für viele Häuser der erste Berührungspunkt mit einem Lieferanten. Zwei Fußvarianten und fünf Kopfformen decken praktisch jeden Bedarf ab – von zwei Haken bis zur Aufnahme für vier Flaschen. Kopf und Innensäule bestehen durchgehend aus Edelstahl AISI 304.

EINSATZBEREICH

Alle Bereiche – Station, Ambulanz, Intensiv, Praxis

AUSFÜHRUNGEN Variantenachse: Fußausführung · 2 Ausführungen

Variante	Abmessungen & technische Daten	Merkmal
SK-01	Höhenverstellung 1320–2150 mm · Säule außen 16 / innen 25 mm	Kunststofffuß
SK-02	Höhenverstellung 1320–2150 mm	Fuß Edelstahl oder Stahl weiß

MERKMALE & AUSSTATTUNG

- Kopf und Innensäule aus Edelstahl AISI 304
- Höhenverstellung 1320–2150 mm
- Außensäule Ø 16 mm, Innensäule Ø 25 mm
- SK-01 mit Kunststofffuß, SK-02 mit Fuß aus Edelstahl oder Stahl weiß
- Kopfformen G01 bis G05 – 2 oder 4 Haken, 2 oder 4 Flaschen
- Zubehör: Griff, Ablage, Steckdosenleiste
- Zubehör: Abwurfbehälter, Tropfbehälter

KONFIGURATION Fünf Kopfformen G01–G05 und umfangreiches Zubehör für beide Ausführungen gleich. · Konstanten des Programms siehe Seite 10 · Farben ab Seite 7

Produktwelt 05 · Stations- & Ambulanzausstattung

KO-2m

Teleskop-Infusionsständer

Edelstahl AISI 304

Der Teleskop-Infusionsständer für den Bettplatz: eingefahren 700 mm, ausgefahren 2000 mm. Vier ineinander laufende Rohrelemente, unlösbar verbunden. Montiert wird an der Wand, an der Instrumentenschiene oder auf einem Fahrgestell.

EINSATZBEREICH

Bettplatz, Decken- und Schienenmontage

AUSFÜHRUNGEN Variantenachse: Bauform · 3 Ausführungen

Variante	Abmessungen & technische Daten	Merkmal
KO-2m	eingefahren 700 mm · ausgefahren 2000 mm	einfacher Ausleger
KO-2m doppelt	eingefahren 700 mm · ausgefahren 2000 mm	zwei Ausleger
KO-2m Edelstahl komplett	eingefahren 700 mm · ausgefahren 2000 mm	vollständig Edelstahl AISI 304

MERKMALE & AUSSTATTUNG

- Vollständig aus Edelstahl AISI 304
- Vierteiliges Teleskop, 700 zu 2000 mm
- Kopf mit zwei Haken
- Einfache und doppelte Ausführung
- Montage an Wand, Schiene (USU-01) oder Fahrgestell
- Option: mit Vorhangclips als Sichtschutzträger

KONFIGURATION Vierteiliges Teleskop, Wand-, Schienen- oder Fahrgestellmontage. · Konstanten des Programms siehe Seite 10 · Farben ab Seite 7

Produktwelt 05 · Stations- & Ambulanzausstattung

PT

Teleskop-Sichtschutz

Edelstahl AISI 304 · Vorhang waschbar oder Polyester



Der Teleskop-Sichtschutz kombiniert Ausleger und Vorhang: 700 mm eingefahren, 2000 mm ausgefahren. Er verschwindet, wenn er nicht gebraucht wird – der entscheidende Vorteil gegenüber dem mobilen Paravent im engen Bettplatz.

EINSATZBEREICH

Bettplatz, Aufwachraum, Notaufnahme

AUSFÜHRUNGEN Variantenachse: Material · 2 Ausführungen

Variante	Abmessungen & technische Daten	Merkmal
PT-01	Teleskop 700 zu 2000 mm · Basis 730–765 × 455 mm · H 1680–1700 mm	Standardausführung
PT-02	Teleskop 700 zu 2000 mm	vollständig Edelstahl AISI 304

MERKMALE & AUSSTATTUNG

- Vollständig aus Edelstahl AISI 304
- Vierteiliges Teleskop, 700 zu 2000 mm
- Basis 730–765 × 455 mm, Gesamthöhe 1680–1700 mm
- Vorhänge waschbar in Blau, Weiß und Beige
- Polyestervorhänge wasserabweisend in sieben Farben
- Montage an Wand, Schiene oder Fahrgestell
- Sockel aus Stahl weiß, Edelstahl oder mit ABS-Abdeckung

KONFIGURATION Vorhänge waschbar oder Polyester wasserabweisend. · Konstanten des Programms siehe Seite 10 · Farben ab Seite 7

Produktwelt 05 · Stations- & Ambulanzausstattung

WD

Nachtkästchen

HPL-Laminat · ABS · Stahl pulverbeschichtet



Drei Baureihen für unterschiedliche Ansprüche am Bettplatz. WD-2 hat einen Alu-Rahmen in Weiß und ist optional mit einem höhenverstellbaren, um $\pm 60^\circ$ neigbaren Beistelltisch lieferbar. WD-7 und WD-8 sind Stahlbauweisen mit farbigen Fronten. Alle drei haben eine wasserfeste Deckplatte und Rollen – reinigbar, verschiebbar und farblich an die Station anpassbar.

EINSATZBEREICH

Bettplatz auf Normal- und Privatstation

AUSFÜHRUNGEN Variantenachse: Baureihe · 3 Ausführungen

Variante	Abmessungen & technische Daten	Merkmal
WD-2	430 × 410 × 880 mm	Alu-Rahmen weiß, optional mit Beistelltisch, neigbar $\pm 60^\circ$
WD-7	525 × 460 × 880 mm	Deckplatte HPL oder ABS mit Vertiefung
WD-8	480 × 400 × 880 mm	Stahlkorpus mit ABS-Sockelabdeckung

MERKMALE & AUSSTATTUNG

- Deckplatte aus wasserfestem HPL-Laminat oder ABS mit Vertiefung
- Fronten pulverbeschichtet in RAL-Farbe
- WD-2 optional mit höhenverstellbarem Beistelltisch, neigbar $\pm 60^\circ$
- Korbablage aus Stahl in RAL, optional Edelstahl
- Rollen $\varnothing$ 55 mm, zwei feststellbar
- WD-2 430 × 410 × 880 mm · WD-7 525 × 460 × 880 mm · WD-8 480 × 400 × 880 mm

KONFIGURATION Drei Baureihen, alle mit Rollen $\varnothing$ 55 mm und farbigen Fronten. · Konstanten des Programms siehe Seite 10 · Farben ab Seite 7

Produktwelt 05 · Stations- & Ambulanzausstattung

SP „FRIEND“

Beistell- & Bettisch

Stahl weiß oder Edelstahl · Platte Stahl oder ABS



Der Bettisch ist das Möbel, mit dem der Patient am meisten zu tun hat – er wird mehrmals täglich verschoben und verstellt. Fünf Ausführungen unterscheiden sich in Plattenmaterial, Basisbreite und Verstellart: manuell über den ganzen Bereich 850–1300 mm oder per Gasfeder mit Handhebel von 850–1150 mm.

EINSATZBEREICH

Bettplatz – Essen, Lesen, Arbeiten im Bett

AUSFÜHRUNGEN Variantenachse: Fußform · Höhenverstellung · 5 Ausführungen

Variante	Abmessungen & technische Daten	Merkmal
SP-1	Basis 730 × 430 mm · Platte 735 × 430 mm · H 850–1300 mm	Handverstellung, Platte Stahl
SP-1/ABS	Basis 730 × 430 mm · Platte 730 × 410 mm · H 850–1300 mm	Handverstellung, ABS-Platte
SP-1/ABS-2	H 850–1300 mm manuell oder 850–1150 mm Gasfeder	ABS-Platte, Gasfeder-Option
SP-2	Basis 765 × 455 mm · Platte 730 × 410 mm · H 850–1300 mm	breitere Basis
SP-2/ABS-2	H 850–1300 mm manuell oder 850–1150 mm Gasfeder	breitere Basis mit Gasfeder

MERKMALE & AUSSTATTUNG

- Rahmen und Sockel Stahl weiß, optional Edelstahl AISI 304
- Platte aus Stahl oder ABS-Kunststoff
- Manuelle Höhenverstellung 850–1300 mm
- Option: Gasfeder-Höhenverstellung 850–1150 mm über Handhebel
- Basis 730 × 430 mm (SP-1) bzw. 765 × 455 mm (SP-2)
- Rollen Ø 75 mm, zwei feststellbar
- Unterfahrbar, kippsicher auch bei ausgezogener Platte

KONFIGURATION Fünf Ordner, eine Familie. Unterschiede: Plattenmaterial, Basisbreite und Verstellart. · Konstanten des Programms siehe Seite 10 · Farben ab Seite 7

Produktwelt 05 · Stations- & Ambulanzausstattung

PO

Tritte

Edelstahl AISI 304



Tritte gehören zu den Artikeln, die überall gebraucht und selten geplant werden. Drei Bauformen: einstufig in drei Höhen, zweistufig und die Variante mit höhenverstellbaren Handläufen für unsichere Patienten.

EINSATZBEREICH

Bettplatz, Untersuchung, Röntgen

AUSFÜHRUNGEN Variantenachse: Stufenzahl · 3 Ausführungen

Variante	Abmessungen & technische Daten	Merkmal
PO-01	Stufenhöhe 130 / 220 / 280 mm	einstufig
PO-02	Höhe 400 mm	zweistufig
PO-03 mit Haltegriff	Stufenhöhe 400 mm · Gesamthöhe 1115–1360 mm	mit höhenverstellbaren Handläufen

MERKMALE & AUSSTATTUNG

- Vollständig aus Edelstahl AISI 304
- Rutschfeste Auflage
- PO-01 einstufig: Stufenhöhe 130, 220 oder 280 mm
- PO-02 zweistufig: Höhe 400 mm
- PO-03 mit Handläufen: Gesamthöhe 1115–1360 mm, verstellbar
- Standfest, vollflächig desinfizierbar

KONFIGURATION Edelstahl, rutschfeste Auflage. · Konstanten des Programms siehe Seite 10 · Farben ab Seite 7

Produktwelt 05 · Stations- & Ambulanzausstattung

WP-1

Injektions- & Blutabnahmestuhl

Stahlrahmen weiß · Polsterung desinfektionsmittelbeständig

Der Blutabnahme- und Injektionsstuhl deckt einen Anwendungsfall ab, den kein anderes Möbel im Programm übernimmt: Die Armlehnen sind in Höhe und Drehung verstellbar, sodass der Arm für die Punktion sicher aufliegt. Sitz, Rückenlehne und Armlehnen sind desinfektionsmittelbeständig gepolstert.

EINSATZBEREICH

Blutabnahme, Injektion, Labor und Ambulanz

AUSFÜHRUNGEN Variantenachse: – · 1 Ausführungen

Variante	Abmessungen & technische Daten	Merkmal
WP-1	Gesamthöhe 950 mm · Sitz 500 × 450 mm · Sitzhöhe 510 mm	Armlehnen in Höhe und Drehung verstellbar

MERKMALE & AUSSTATTUNG

- Rahmen pulverbeschichtet weiß, optional Edelstahl AISI 304
- Armlehnen in Höhe und Drehung verstellbar
- Sitz 500 × 450 mm, Sitzhöhe 510 mm
- Gesamthöhe 950 mm
- Polsterung waschbar und desinfektionsmittelbeständig
- Edelstahl-Ablage als herausnehmbares Tablett
- Polsterfarbe aus der TECH-MED-Palette wählbar

KONFIGURATION Bewusste Ausnahme vom Stuhl-Ausschluss: Blutabnahme und Injektion sind ein eigener Anwendungsfall, den das WHEELKO-Programm nicht abdeckt. · Konstanten des Programms siehe Seite 10 · Farben ab Seite 7

MRT-Ausstattung, nicht-magnetisch

Komplett nicht-magnetische Einrichtung, freigegeben für MRT-Räume bis einschließlich 3 Tesla – ein Raum, ein Lieferant, eine Optik.



10 PRODUKTFAMILIEN · 39 VARIANTEN

SR4MR

SK-01MR

E-02MR

K-3MR Typ C

K-3MR Typ D

PJ1-MR

WZ-MR

SMO-04MR

PO-01MR

PO-02MR

Familienseiten: SR4MR S. 61 · SK-01MR S. 62 · E-02MR S. 63 · K-3MR Typ C S. 64 · K-3MR Typ D S. 65 · PJ1-MR S. 66 · WZ-MR S. 67 · SMO-04MR S. 68 · PO-01MR S. 69 · PO-02MR S. 70

Übersicht · MRT-Ausstattung, nicht-magnetisch (Teil 1)

	Produktfamilie	Var.	Varianten	Einsatzbereich	Seite
	SR4MR Nicht-magnetische Behandlungs- & Rehaliege Alu-Profil RAL 7035 · Polsterung · nicht-magnetisch bis 3 T	4	SR4MR SR4MR mit Seitengittern SR4MR mit Papierrollenhalter SR4MR mit Schiebegriff	MRT-Raum – Lagerung, Vorbereitung, Transfer	61
	SK-01MR Nicht-magnetischer Infusionsständer Kunststofffuß · Innensäule eloxiertes Alu · nicht-magnetisch bis 3 T	5	SK-01MR/G01 SK-01MR/G02 SK-01MR/G03 SK-01MR/G04 SK-01MR/G05	MRT-Raum – Infusion und Injektion am Patienten	62
	E-02MR Nicht-magnetischer Instrumententisch Aluminium RAL 7035 · nicht-magnetisch bis 3 T	1	E-02MR	MRT-Raum – Instrumente und Material am Untersuchungsplatz	63
	K-3MR Typ C Nicht-magnetischer Stationstisch Aluminium RAL 7035, optional eloxiert · nicht-magnetisch bis 3 T	4	C-01-33MR / C-01-66MR C-02-33MR / C-02-66MR C-03-33MR / C-03-66MR C-04-33MR / C-04-66MR	MRT-Raum – Material und Dokumentation am Platz	64
	K-3MR Typ D Nicht-magnetischer Multifunktionstisch Aluminium RAL 7035, optional eloxiert · nicht-magnetisch bis 3 T	4	D-01-33MR / D-01-66MR D-02-33MR / D-02-66MR D-03-33MR / D-03-66MR D-04-33MR / D-04-66MR	MRT-Raum – Vorbereitung, Verbandwechsel, Materialtransport	65

Var. = Anzahl der Ausführungen dieser Familie. Alle aufgeführten Varianten sind lieferbar; die vollständigen Abmessungen stehen auf der Familienseite bzw. liegen als Variantenliste vor. Baureihen ohne eigene Seite stellen wir auf Anfrage im gleichen Umfang vor.

Übersicht · MRT-Ausstattung, nicht-magnetisch (Teil 2)

	Produktfamilie	Var.	Varianten	Einsatzbereich	Seite
	PJ1-MR Nicht-magnetischer mobiler Paravent Alu-Profil RAL 7035 · Polyester-Vorhang · nicht-magnetisch bis 3 T	3	PJ1-MR einflügelig 1000 PJ1-MR einflügelig 1200 PJ1-MR mehrflügelig	MRT-Raum und Vorbereitung – Sichtschutz und Raumteilung	66
	WZ-MR Nicht-magnetischer Wäsche- & Abfallwagen Aluminium RAL 7035 · Deckel Alu oder ABS · nicht-magnetisch bis 3 T	13	WZ-2/40MR WZ-1/60MR WZ-2/60MR WZ-1/100MR WZ-2/100MR WZ2-1/60MR WZ2-2/60MR WZ2-1/100MR WZ2-2/100MR WZ3-1/60MR WZ3-2/60MR WZ3-1/100MR WZ3-2/100MR	MRT-Raum – Wäsche und Abfall am Entstehungsort	67
	SMO-04MR Nicht-magnetischer Abwurfbehälterständer Aluminium RAL 7035 · Kunststoffbehälter · nicht-magnetisch bis 3 T	1	SMO-04MR	MRT-Raum – Abwurf direkt am Untersuchungsplatz	68
	PO-01MR Nicht-magnetischer Tritt, einstufig Aluminium RAL 7035, optional eloxiert · nicht-magnetisch bis 3 T	3	PO-01MR/13 PO-01MR/22 PO-01MR/28	MRT-Raum – Aufstieg auf Liege und Untersuchungstisch	69
	PO-02MR Nicht-magnetischer Tritt, zweistufig Aluminium RAL 7035, optional eloxiert · nicht-magnetisch bis 3 T	1	PO-02MR	MRT-Raum – Aufstieg bei größerer Höhendifferenz	70

Var. = Anzahl der Ausführungen dieser Familie. Alle aufgeführten Varianten sind lieferbar; die vollständigen Abmessungen stehen auf der Familienseite bzw. liegen als Variantenliste vor. Baureihen ohne eigene Seite stellen wir auf Anfrage im gleichen Umfang vor.

Produktwelt 06 · MRT-Ausstattung, nicht-magnetisch

SR4MR

Nicht-magnetische Behandlungs- & Rehaliege

Alu-Profil RAL 7035 · Polsterung · nicht-magnetisch bis 3 T



Im MRT-Raum wird jedes ferromagnetische Teil zum Geschoss. Die SR4MR ist die Behandlungs- und Rehaliege für genau diese Umgebung: Rahmen aus verstärktem Aluminiumprofil, Rollen in Kunststoffgehäusen, kein Stahl im Kraftfluss. Die zweiteilige Polsterliege mit manuell verstellbarem Kopfteil dient zur Lagerung vor der Untersuchung, zum Umsetzen und zur Nachbeobachtung – ohne dass die Liege den Raum verlassen muss.

EINSATZBEREICH

MRT-Raum – Lagerung, Vorbereitung, Transfer

AUSFÜHRUNGEN

Variantenachse: Ausstattung · 4 Ausführungen

Variante	Abmessungen & technische Daten	Merkmal
SR4MR	1850 × 560 × 600 mm · Liegefläche 1850 × 560 × 50 mm · Kopfteil manuell bis +45°	Grundausführung, zweiteilige Polsterliege
SR4MR mit Seitengittern	Breite über Seitengitter 710 mm	Patientensicherung, Gitter absenkbar
SR4MR mit Papierrollenhalter	Aufnahme für Einmal-Papierrolle am Kopfende	Hygiene bei Wechsel
SR4MR mit Schiebegriff	Führungsgriff am Kopfende	sicheres Rangieren im Untersuchungsraum

MERKMALE & AUSSTATTUNG


- Freigegeben für MRT-Räume bis einschließlich 3 Tesla
- Rahmen aus verstärktem Alu-Profil, pulverbeschichtet RAL 7035
- Rollen Ø 125 mm in Kunststoffgehäusen, alle feststellbar
- Zweiteilige Polsterliege, Kopfteil manuell bis +45°
- Liegefläche 1850 × 560 × 50 mm
- Optional Seitengitter, Schiebegriff und Papierrollenhalter
- Polsterfarbe frei aus der Polsterpalette wählbar

KONFIGURATION Rollen Ø 125 mm, alle feststellbar. Polsterfarbe aus der Polsterpalette (Farbkarte). · Konstanten des Programms siehe Seite 10 · Farben ab Seite 7

Produktwelt 06 · MRT-Ausstattung, nicht-magnetisch

SK-01MR

Nicht-magnetischer Infusionsständer

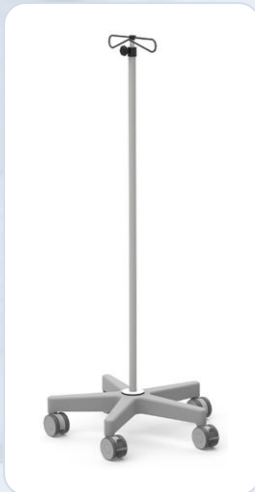Kunststofffuß · Innensäule eloxiertes Alu · nicht-magnetisch bis 3 T

Der meistgesuchte Einzelartikel des MR-Programms. Fünffuß aus Kunststoff, Rollen in Kunststoffgehäusen, Innensäule aus eloxiertem Aluminium – der Ständer bleibt auch unmittelbar am Magneten sicher. Über die fünf austauschbaren Köpfe G01 bis G05 wird er zum Haken-, Flaschen- oder Kombiständer, ohne dass ein zweites Grundgerät nötig ist.

EINSATZBEREICH

MRT-Raum – Infusion und Injektion am Patienten

AUSFÜHRUNGEN Variantenachse: Kopfform · 5 Ausführungen

Variante	Abmessungen & technische Daten	Merkmal
SK-01MR/G01	Fuß Ø 575 mm · Höhenverstellung 1320–2150 mm · Säulen Ø 25 / Ø 16 mm	Kopf mit zwei Haken
SK-01MR/G02	Maße wie G01	Kopf mit vier Haken
SK-01MR/G03	Maße wie G01	Kopf mit zwei Flaschenhaltern
SK-01MR/G04	Maße wie G01	zwei Haken und zwei Flaschenhalter
SK-01MR/G05	Maße wie G01	Kopf mit vier Haltern

MERKMALE & AUSSTATTUNG

- Freigegeben für MRT-Räume bis einschließlich 3 Tesla
- Fünffuß aus Kunststoff, Ø 575 mm, sehr kippsicher
- Rollen Ø 75 mm in Kunststoffgehäusen, drei feststellbar
- Innensäule aus eloxiertem Aluminium, Ø 16 mm
- Höhenverstellung 1320 bis 2150 mm
- Fünf Kopfformen G01 bis G05, werkzeugfrei tauschbar
- Köpfe aus eloxiertem Aluminium

KONFIGURATION Köpfe aus eloxiertem Aluminium, austauschbar. Fünffuß aus Kunststoff, Rollen Ø 75 mm, drei feststellbar. · Konstanten des Programms siehe Seite 10 · Farben ab Seite 7

Produktwelt 06 · MRT-Ausstattung, nicht-magnetisch

E-02MR

Nicht-magnetischer Instrumententisch

Aluminium RAL 7035 · nicht-magnetisch bis 3 T



Der Instrumententisch der Baureihe K-4MR ist das Ablagegerät direkt am Untersuchungsplatz. Die Deckplatte hat hochgezogene Kanten, damit nichts herunterrollen kann, und lässt sich über einen weiten Bereich manuell in der Höhe verstellen – vom Arbeiten im Sitzen bis zum Überfahren der Patientenliege.

EINSATZBEREICH

MRT-Raum – Instrumente und Material am Untersuchungsplatz

AUSFÜHRUNGEN Variantenachse: Ausführung · 1 Ausführungen

Variante	Abmessungen & technische Daten	Merkmal
E-02MR	750 × 500 × 850–1300 mm · Deckplatte 750 × 500 mm mit hochgezogenen Kanten	Höhe manuell verstellbar

MERKMALE & AUSSTATTUNG

- Freigegeben für MRT-Räume bis einschließlich 3 Tesla
- Sockel aus Aluminium, pulverbeschichtet RAL 7035
- Rollen Ø 75 mm in Kunststoffgehäusen, zwei feststellbar
- Deckplatte 750 × 500 mm mit hochgezogenen Kanten
- Höhe manuell verstellbar von 850 bis 1300 mm
- Unterfahrbar, damit direkt am Patienten einsetzbar

KONFIGURATION Baureihe K-4MR. Sockel Aluminium pulverbeschichtet RAL 7035, Rollen Ø 75 mm, zwei feststellbar. · Konstanten des Programms siehe Seite 10 · Farben ab Seite 7

Produktwelt 06 · MRT-Ausstattung, nicht-magnetisch

K-3MR Typ C

Nicht-magnetischer Stationstisch

Aluminium RAL 7035, optional eloxiert · nicht-magnetisch bis 3 T



Der Stationstisch in MR-Ausführung. Typ C hat die fest montierte Deckplatte – die robuste Lösung für Material, Dokumentation und Verbrauchsgüter im Untersuchungsraum. Zwei Breiten, vier Bauformen: schmal für den Platz neben der Gantry, breit für die Vorbereitung.

EINSATZBEREICH

MRT-Raum – Material und Dokumentation am Platz

AUSFÜHRUNGEN

Variantenachse: Bauform · 4 Ausführungen

Variante	Abmessungen & technische Daten	Merkmal
C-01-33MR / C-01-66MR	456 × 430 × 880 mm bzw. 770 × 430 × 880 mm	Bauform 01
C-02-33MR / C-02-66MR	456 × 430 × 880 mm bzw. 770 × 430 × 880 mm	Bauform 02
C-03-33MR / C-03-66MR	456 × 430 × 880 mm bzw. 770 × 430 × 880 mm	Bauform 03
C-04-33MR / C-04-66MR	456 × 430 × 880 mm bzw. 770 × 430 × 880 mm	Bauform 04

MERKMALE & AUSSTATTUNG

- Freigegeben für MRT-Räume bis einschließlich 3 Tesla
- Rahmen, Deckplatte und Ablage aus Aluminium RAL 7035
- Rollen Ø 75 mm in Kunststoffgehäusen
- Zwei Breiten: 456 mm und 770 mm
- Optional Rahmen mit Küvetten statt Deckplatte und Ablage
- Optional Rahmen aus eloxiertem Aluminium
- Zubehör aus eloxiertem Aluminium oder PP-Kunststoff

KONFIGURATION Die Bauformen 01 bis 04 entsprechen der Baureihe K-3 und unterscheiden sich in der Kombination aus Deckplatte, Ablagen und Zubehör. · Konstanten des Programms siehe Seite 10 · Farben ab Seite 7

Produktwelt 06 · MRT-Ausstattung, nicht-magnetisch

K-3MR Typ D

Nicht-magnetischer Multifunktionstisch

Aluminium RAL 7035, optional eloxiert · nicht-magnetisch bis 3 T



Typ D ist die Multifunktionsausführung: gleiche Plattform wie Typ C, aber auf wechselnde Aufgaben ausgelegt. Über den Zubehörbaukasten wird derselbe Tisch zum Verbandwagen, zum Vorbereitungstisch oder zum Entsorgungswagen – Abwurfsackhalter, Instrumentenschiene, Handschuhboxen und Kanülenbehälter werden eingehängt, nicht angeschraubt.

EINSATZBEREICH

MRT-Raum – Vorbereitung, Verbandwechsel, Materialtransport

AUSFÜHRUNGEN

Variantenachse: Bauform · 4 Ausführungen

Variante	Abmessungen & technische Daten	Merkmal
D-01-33MR / D-01-66MR	490 × 430 × 890 mm bzw. 805 × 430 × 890 mm	Bauform 01
D-02-33MR / D-02-66MR	490 × 430 × 890 mm bzw. 805 × 430 × 890 mm	Bauform 02
D-03-33MR / D-03-66MR	490 × 430 × 890 mm bzw. 805 × 430 × 890 mm	Bauform 03
D-04-33MR / D-04-66MR	490 × 430 × 890 mm bzw. 805 × 430 × 890 mm	Bauform 04

MERKMALE & AUSSTATTUNG

- Freigegeben für MRT-Räume bis einschließlich 3 Tesla
- Rahmen, Deckplatte und Ablage aus Aluminium RAL 7035
- Rollen Ø 75 mm in Kunststoffgehäusen
- Zwei Breiten: 490 mm und 805 mm
- Zubehör: Abwurfsackhalter, Instrumentenschiene, Handschuhboxen, Kanülenbehälter
- Optional Rahmen mit Küvetten statt Deckplatte und Ablage
- Optional Rahmen aus eloxiertem Aluminium

KONFIGURATION Deckplatte und Ablage optional durch einen Rahmen mit Küvetten ersetzbar; Rahmen optional aus eloxiertem Aluminium. · Konstanten des Programms siehe Seite 10 · Farben ab Seite 7

Produktwelt 06 · MRT-Ausstattung, nicht-magnetisch

PJ1-MR

Nicht-magnetischer mobiler Paravent

Alu-Profil RAL 7035 · Polyestervorhang · nicht-magnetisch bis 3 T



Sichtschutz und Raumteilung ohne Metallmasse im Feld. Der Rahmen besteht aus Aluminiumprofil in RAL 7035, die Füllung aus wasserabweisend beschichtetem Polyester – abwischbar und in sieben Farben lieferbar. Einflügelig für den einzelnen Platz, mehrflügelig und faltbar dort, wo der Sichtschutz nach Gebrauch verschwinden soll.

EINSATZBEREICH

MRT-Raum und Vorbereitung – Sichtschutz und Raumteilung

AUSFÜHRUNGEN

Variantenachse: Flügelzahl & Breite · 3 Ausführungen

Variante	Abmessungen & technische Daten	Merkmal
PJ1-MR einflügelig 1000	Flügel 1000 × 1700 mm · Basisbreite 450 mm	Standardausführung
PJ1-MR einflügelig 1200	Flügel 1200 × 1700 mm · Basisbreite 600 mm	breite Ausführung
PJ1-MR mehrflügelig	Flügelbreite je 700 mm · Flügelhöhe 1700 mm	faltbar, mehrere Flügel

MERKMALE & AUSSTATTUNG

- Freigegeben für MRT-Räume bis einschließlich 3 Tesla
- Rahmen aus Alu-Profil, pulverbeschichtet RAL 7035
- Rollen Ø 75 mm, alle feststellbar
- Flügelhöhe 1700 mm
- Vorhang aus Polyester mit wasserabweisender Beschichtung
- Sieben Farben ZP-1 bis ZP-7, siehe Farbkarte
- Vorhang abnehmbar und waschbar

KONFIGURATION Vorhang aus wasserabweisend beschichtetem Polyester in sieben Farben ZP-1 bis ZP-7 (Farbkarte). · Konstanten des Programms siehe Seite 10 · Farben ab Seite 7

Produktwelt 06 · MRT-Ausstattung, nicht-magnetisch

WZ-MR

Nicht-magnetischer Wäsche- & Abfallwagen

Aluminium RAL 7035 · Deckel Alu oder ABS · nicht-magnetisch bis 3 T



Wäsche und Abfall entstehen auch im MRT-Raum. Die Baureihe WZMR bildet das komplette Entsorgungsprogramm in nicht-magnetischer Ausführung ab – vom kleinen 40-Liter-Wagen bis zur dreifachen Trennstation mit 3 × 120 Litern. Der Rahmen ist so konstruiert, dass er sich nachträglich um weitere Segmente erweitern lässt: aus einfach wird zweifach, ohne Neubeschaffung.

EINSATZBEREICH

MRT-Raum – Wäsche und Abfall am Entstehungsort

AUSFÜHRUNGEN Variantenachse: Volumen & Bauform · 13 Ausführungen

Variante	Abmessungen & technische Daten	Merkmal
WZ-2/40MR	315 × 385 × 520 mm · Sack 40 l	einfach
WZ-1/60MR	355 × 410 × 680 mm · Sack 60–80 l	einfach
WZ-2/60MR	390 × 440 × 680 mm · Sack 60–80 l	einfach
WZ-1/100MR	410 × 465 × 850 mm · Sack 100–120 l	einfach
WZ-2/100MR	445 × 495 × 850 mm · Sack 100–120 l	einfach
WZ2-1/60MR	760 × 410 × 680 mm · Sack 60–80 l	zweifach
WZ2-2/60MR	790 × 440 × 680 mm · Sack 60–80 l	zweifach
WZ2-1/100MR	865 × 465 × 850 mm · Sack 100–120 l	zweifach
WZ2-2/100MR	900 × 495 × 850 mm · Sack 100–120 l	zweifach
WZ3-1/60MR	1155 × 410 × 680 mm · Sack 60–80 l	dreifach
WZ3-2/60MR	1190 × 440 × 680 mm · Sack 60–80 l	dreifach
WZ3-1/100MR	1320 × 465 × 850 mm · Sack 100–120 l	dreifach
WZ3-2/100MR	1355 × 495 × 850 mm · Sack 100–120 l	dreifach

MERKMALE & AUSSTATTUNG

- Freigegeben für MRT-Räume bis einschließlich 3 Tesla
- Rahmen aus Aluminium, pulverbeschichtet RAL 7035
- Nachträglich um weitere Segmente erweiterbar
- Deckel aus Aluminium RAL 7035 oder ABS-Kunststoff grau, von Hand angehoben
- Clips am Rand verhindern das Abrutschen des Sacks
- Rollen Ø 75 mm in Kunststoffgehäusen, zwei feststellbar

KONFIGURATION Rahmen jederzeit um weitere Segmente erweiterbar. Deckel aus Aluminium RAL 7035 oder ABS grau. · Konstanten des Programms siehe Seite 10 · Farben ab Seite 7

Produktwelt 06 · MRT-Ausstattung, nicht-magnetisch

SMO-04MR

Nicht-magnetischer Abwurfbehälterständer

Aluminium RAL 7035 · Kunststoffbehälter · nicht-magnetisch bis 3 T



Der Abwurfbehälterständer bringt den 10-Liter-Eimer dorthin, wo er gebraucht wird – direkt an den Untersuchungsplatz. Fünffuß aus pulverbeschichtetem Aluminium, Rollen in Kunststoffgehäusen, niedriger Schwerpunkt. Nach Gebrauch wird er einfach weggerollt statt getragen.

EINSATZBEREICH

MRT-Raum – Abwurf direkt am Untersuchungsplatz

AUSFÜHRUNGEN Variantenachse: Ausführung · 1 Ausführungen

Variante	Abmessungen & technische Daten	Merkmal
SMO-04MR	Fuß Ø 480 mm · Gesamthöhe 340 mm · Behälter 10 l	Fünffuß, fahrbar

MERKMALE & AUSSTATTUNG

- Freigegeben für MRT-Räume bis einschließlich 3 Tesla
- Fünffuß aus Aluminium, pulverbeschichtet RAL 7035
- Rollen Ø 75 mm in Kunststoffgehäusen, drei feststellbar
- Fußdurchmesser 480 mm, Gesamthöhe 340 mm
- Behältervolumen 10 Liter
- Behälter entnehmbar, Maßabweichung bis 10 Prozent möglich


KONFIGURATION Behältermaße können um bis zu 10 Prozent abweichen. Rollen Ø 75 mm, drei feststellbar. · Konstanten des Programms siehe Seite 10 · Farben ab Seite 7

Produktwelt 06 · MRT-Ausstattung, nicht-magnetisch

PO-01MR

Nicht-magnetischer Tritt, einstufig

Aluminium RAL 7035, optional eloxiert · nicht-magnetisch bis 3 T

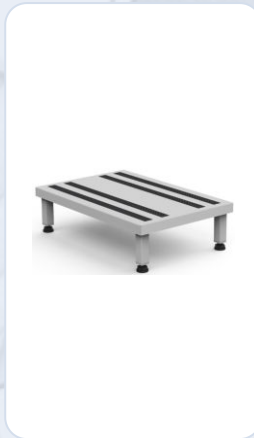

Der einstufige Tritt ist vollständig aus Aluminium gefertigt und deshalb auch unmittelbar am Magneten einsetzbar. Drei Stufenhöhen decken den Aufstieg auf Liege, Untersuchungstisch und Patiententisch ab. Die Füße aus hochfestem Kunststoff lassen sich einzeln nivellieren – der Tritt steht auch auf unebenem Boden wackelfrei.

EINSATZBEREICH

MRT-Raum – Aufstieg auf Liege und Untersuchungstisch

AUSFÜHRUNGEN Variantenachse: Stufenhöhe · 3 Ausführungen

Variante	Abmessungen & technische Daten	Merkmal
PO-01MR/13	480 × 320 × 130 mm	flache Stufe
PO-01MR/22	480 × 320 × 220 mm	mittlere Stufe
PO-01MR/28	480 × 320 × 280 mm	hohe Stufe

MERKMALE & AUSSTATTUNG

- Freigegeben für MRT-Räume bis einschließlich 3 Tesla
- Vollständig aus Aluminium, pulverbeschichtet RAL 7035
- Drei Stufenhöhen: 130, 220 und 280 mm
- Trittfäche 480 × 320 mm mit Antirutschstreifen
- Füße aus hochfestem Kunststoff, einzeln nivellierbar
- Optional vollständig aus eloxiertem Aluminium


KONFIGURATION Optional vollständig aus eloxiertem Aluminium. Trittfäche mit Antirutschstreifen belegt. · Konstanten des Programms siehe Seite 10 · Farben ab Seite 7

Produktwelt 06 · MRT-Ausstattung, nicht-magnetisch

PO-02MR

Nicht-magnetischer Tritt, zweistufig

Aluminium RAL 7035, optional eloxiert · nicht-magnetisch bis 3 T

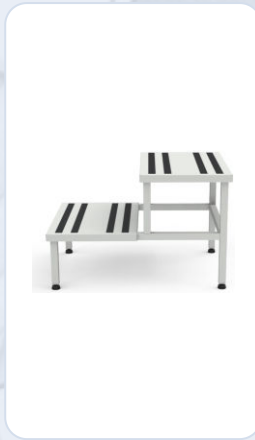

Wo eine Stufe nicht reicht, übernimmt der zweistufige Tritt. Aufbau, Werkstoff und Oberfläche entsprechen dem einstufigen PO-01MR, die Gesamthöhe von 420 mm überbrückt auch den Aufstieg auf höher gestellte Patiententische. Beide Trittflächen sind mit Antirutschstreifen belegt.

EINSATZBEREICH

MRT-Raum – Aufstieg bei größerer Höhendifferenz

AUSFÜHRUNGEN Variantenachse: Ausführung · 1 Ausführungen

Variante	Abmessungen & technische Daten	Merkmal
PO-02MR	480 × 650 × 420 mm (Länge × Breite × Höhe)	zwei Stufen

MERKMALE & AUSSTATTUNG

- Freigegeben für MRT-Räume bis einschließlich 3 Tesla
- Vollständig aus Aluminium, pulverbeschichtet RAL 7035
- Gesamtmaß 480 × 650 × 420 mm
- Beide Trittflächen mit Antirutschstreifen belegt
- Füße aus hochfestem Kunststoff, einzeln nivellierbar
- Optional vollständig aus eloxiertem Aluminium

KONFIGURATION Optional vollständig aus eloxiertem Aluminium. Füße aus hochfestem Kunststoff, nivellierbar. · Konstanten des Programms siehe Seite 10 · Farben ab Seite 7

Schienensysteme ISA

Eine Normschiene an der Wand, ein Halter darauf, das Zubehör daran: So entsteht der Bettplatz. Nichts wird gebohrt, nichts fest verbaut - jedes Teil lässt sich werkzeugfrei umsetzen, wenn sich die Nutzung ändert.



65 BAUSTEINE · 3 SCHRITTE ZUR KONFIGURATION

Ablagen, Dokumentation und Leitungsführung

Halter für Schalen und Behälter

Katheter, Körbe und Flaschen

Sauerstoff und Entsorgung

So funktioniert das System S. 72 · Halter S. 73 · Zubehör ab S. 74 · Infusion, Sichtschutz und PMS S. 78

So funktioniert das System - in drei Schritten

Das ISA-System trennt konsequent zwischen Träger und Inhalt. Die Schiene nimmt die Last auf, der Halter stellt die Verbindung her, das Zubehör macht die Funktion. Weil alle Halter auf beide Schienenprofile passen, ist jede spätere Umrüstung eine Frage von Minuten - und keine von Handwerkern.

- 1 Schiene wählen**
MODUR für schwere Anbauten, EUROSTANDARD für alles Übrige. Beide unten auf dieser Seite.

- 2 Halter wählen**
Acht Bauformen, vom einfachen Klemmhalter bis zum Rohrhalter mit Gelenk. Seite 73.

- 3 Zubehör einhängen**
Ablagen, Behälter, Körbe, Flaschen- und Abfallhalter. Ab Seite 74.

SCHRITT 1 DIE NORMSCHIENE



MODUR

MD-01

Aluminium eloxiert · 30 × 10 mm

Schwerlastschiene – für Auslegerarme, Sichtschutz, Regaleinheiten und alles, was Hebelkräfte einträgt.



EUROSTANDARD

MD-02

Edelstahl AISI 304 · 25 × 10 mm

Standardschiene – für Halter, Ablagen, Behälter und Körbe. Die übliche Wahl am Bettplatz.

Wandkonsole ZMD-01 / ZMD-02

je Schientyp eine eigene Konsole

Endkappen ZPL / ZPP / ZP

links, rechts bzw. universal

Schienenlänge nach Bettplatz

Standard 300–500 mm bis raumlang



Bettplatz mit ISA-Schiene. Intensivstation im Universitätsklinikum Bydgoszcz: eine durchgehende Wandschiene je Bettplatz nimmt Monitor, Flowmeter, Ablagen und Entsorgung auf und hält Leitungen und Geräte vom Boden fern.

PLANUNG Schienenhöhe, Schienenlänge und Halterbestückung werden je Bettplatz festgelegt · Quelle der Artikelnummern und Maße: Herstellerkatalog „System Szynowy ISA“

Schritt 2 - der Halter

Der Halter ist das einzige Teil, das die Schiene berührt. Alle acht Bauformen passen sowohl auf MODUR 30 × 10 mm als auch auf EUROSTANDARD 25 × 10 mm und lassen sich ohne Werkzeug versetzen. Jedes Zubehörteil auf den folgenden Seiten wird mit einem dieser Halter geliefert - welcher es ist, kann bei der Bestellung getauscht werden.



USU-01
Universalhalter, einfach
54 × 40 mm · Klemmschraube M6



USU2-01
Universalhalter, doppelt
54 × 60 mm · zwei Klemmschrauben



USU-02
Zwingenhalter
96 × 40 mm · Schiene 25–40 mm, Rohr Ø 20–40 mm



USU2-02
Zwingenhalter, breit
96 × 60 mm · für hohe Anbaulasten



USU-02PZ
Zwingenhalter über Eck
zwei Zwingen im rechten Winkel



EL50
Rohrhalter, senkrecht
Rohr Ø 25 mm · Arm 50 / 100 / 150 mm



EL50PZ
Rohrhalter, waagrecht
Rohr Ø 25 mm · Arm 50 / 100 / 150 mm



EL50-165
Rohrhalter mit Gelenk
zusätzlicher Arm 165 mm, schwenkbar

Welcher Halter wofür. **USU-01** und **USU2-01** sind der Standard für Ablagen, Behälter und Körbe. **USU-02** und **USU2-02** klemmen zusätzlich auf Rohre Ø 20–40 mm und tragen hohe Lasten - für Auslegerarme, Sichtschutz und Regaleinheiten. Die **EL-Rohrhalter** nehmen Rundrohre Ø 25 mm auf und bringen den Anbau mit 50, 100 oder 150 mm Abstand von der Wand.

SCHRITT 3 DAS ZUBEHÖR - VIER GRUPPEN



Ablagen, Dokumentation und Leitungsführung

12 Artikel

Seite 74



Halter für Schalen und Behälter

12 Artikel

Seite 75



Katheter, Körbe und Flaschen

12 Artikel

Seite 76



Sauerstoff und Entsorgung

11 Artikel

Seite 77

KONFIGURATION Halter und Zubehör sind einzeln bestellbar · Zubehörteile werden mit dem angegebenen Standardhalter geliefert, ein Tausch ist ohne Aufpreis möglich

Ablagen, Dokumentation und Leitungsführung

Alles, was Fläche schafft oder Leitungen ordnet. Die Monitorablagen tragen bis 10 kg, die leichten Ablagen und Dokumentenhalter bis 3,5 kg.

ABLAGEN UND DOKUMENTATION



KB-01
Monitorablage mit Schublade

450 × 320 × 155 mm · bis 10 kg



KB-02
Monitorablage

450 × 320 mm · Höhe 100 / 180 / 280 mm



PL-01/S
Klappablage, leicht

450 × 320 mm · Edelstahl, einklappbar



PL-01
Ablage, leicht

320 × 250 mm · Edelstahl



PD-01
Dokumentenablage, quer

333 × 273 × 62 mm



PD-02
Dokumentenablage, hoch

258 × 348 × 62 mm



PD-03
Dokumentenhalter, flach

300 × 218 mm · bis 3,5 kg

KABEL UND SCHLÄUCHE



GR-01
Kabelkamm

für Leitungen Ø 6–25 mm



WC-01
Schlauchklemme

für Drainagen Ø 6–12 mm



WR-01
Hakenhalter, einfach

Beatmungsbeutel · bis 8 kg



WR2-01
Hakenhalter, doppelt

zwei Haken · bis 8 kg



UK-01
Kabelhalter

Breite 35 mm

ZUBEHÖR

Ablagen, Dokumentation und Leitungsführung

74

Halter für Schalen und Behälter

75

Katheter, Körbe und Flaschen

76

Sauerstoff und Entsorgung

77

12 ARTIKEL Alle Teile werden an Normschiene MODUR oder EUROSTANDARD eingehängt · Halter siehe Seite 73 · Edelstahl ist AISI 304 (0H18N9), Stahl pulverbeschichtet in den Farbtönen ab Seite 7

Halter für Schalen und Behälter

Ein Rahmen an der Schiene, ein Behälter darin. Rahmen und Behälter sind einzeln bestellbar – Edelstahl für den Sterilbereich, Kunststoff dort, wo Sichtbarkeit zählt.

RECHTECKHALTER, GROSS – RAHMEN 310 × 160 MM



UPP-01
Rahmen ohne
Behälter

310 × 160 × 60 mm



UPP-03KO/40
mit
Edelstahlschale

325 × 175 × 40 mm



UPP-03TW/65
mit
Kunststoffschale,
weiß

325 × 175 × 65 mm



UPP-03TW/65
mit
Kunststoffschale,
klar

325 × 175 × 65 mm



UPP-03TW/100
mit
Kunststoffschale,
tief

325 × 175 × 100 mm

RECHTECKHALTER, KLEIN · RUNDHALTER · HANDSCHUHBOXEN



UPK-01
Rahmen ohne
Behälter

155 × 145 × 60 mm



UPK-03KO/145
mit
Edelstahlbehälter

175 × 160 × 145 mm



UPK-03TW/145
mit
Kunststoffbehälter

175 × 160 × 145 mm,
transparent



UPO-01
Rundhalter
ohne Schale

Ring Ø 140 / 220
/ 240 / 260 mm



UPO-03/KO
Rundhalter mit
Edelstahlschale

0,75 / 2,5 / 3,5 / 4,5 l



PR-01
Handschuhboxhalter

eine Box, senkrecht



PR-03
Handschuhboxhalter,
dreifach

waagrecht · 124 × 75 × 690
mm

ZUBEHÖR

Ablagen, Dokumentation und Leitungsführung

74

Halter für Schalen und Behälter

75

Katheter, Körbe und Flaschen

76

Sauerstoff und Entsorgung

77

12 ARTIKEL Alle Teile werden an Normschiene MODUR oder EUROSTANDARD eingehängt · Halter siehe Seite 73 · Edelstahl ist AISI 304 (0H18N9), Stahl pulverbeschichtet in den Farbtönen ab Seite 7

Katheter, Körbe und Flaschen

Was am Bettplatz griffbereit hängen muss. Die Zubehörkörbe gibt es in Edelstahl (KO) und in pulverbeschichtetem Stahl (ST) – gleiche Maße, gleiche Halterung.

KATHETER UND KANÜLENABWURF



PC-03
Katheterköcher, einfach
Ø 67 × 370 mm



PC2-03
Katheterköcher, doppelt
2 × Ø 67 × 370 mm



PC-04
Katheterkorb
115 × 115 × 500 mm ·
Edelstahl



PC-05
Katheterbehälter, 2-kammrig
122 × 62 × 540 mm ·
Front ausziehbar



PZI-03
Kanülenabwurf mit Behälter
2,5 l · Halter um ±45°
kipubar

ZUBEHÖRKÖRBE UND FLASCHENHALTER



KR-01KO
Zubehörkorb groß, Edelstahl
360 × 150 × 160 mm ·
bis 4 kg



KR-01ST
Zubehörkorb groß, Stahl
360 × 150 × 160 mm ·
pulverbeschichtet



KR-02KO
Zubehörkorb klein, Edelstahl
290 × 96 × 90 mm · bis
2,5 kg



KR-02ST
Zubehörkorb klein, Stahl
290 × 96 × 90 mm ·
pulverbeschichtet



UB-01
Flaschenhalter, einfach
Flasche Ø 100 mm, H
150 mm



UB2-01
Flaschenhalter, doppelt
2 Flaschen · bis 4 kg



UB-02
Sekretflaschenhalter
Saugflasche 1 l und 2 l

ZUBEHÖR

Ablagen, Dokumentation und Leitungsführung

74

Halter für Schalen und Behälter

75

Katheter, Körbe und Flaschen

76

Sauerstoff und Entsorgung

77

12 ARTIKEL Alle Teile werden an Normschiene MODUR oder EUROSTANDARD eingehängt · Halter siehe Seite 73 · Edelstahl ist AISI 304 (0H18N9), Stahl pulverbeschichtet in den Farbtönen ab Seite 7

Sauerstoff und Entsorgung

Die Sauerstoffhalter nehmen Flaschen bis Ø 140 mm und 500 mm Höhe auf, mit Lederspanngurt und rutschfestem Boden – wahlweise an der Schiene oder direkt an der Wand.

SAUERSTOFFFLASCHENHALTER



UBT-01 einfach, an der Schiene

bis 16 kg · Gurt und Antirutschboden



UBT2-01 doppelt, an der Schiene

bis 32 kg · zwei Flaschen



UBT-01/S einfach, an der Wand

ohne Schiene montierbar



UBT2-01/S doppelt, an der Wand

ohne Schiene montierbar

ABFALL



UWR-03/P-KO Abfallsackhalter, Edelstahldeckel

Sack 15 l · 192 × 209 × 273 mm



UWR-03/P-ABS Abfallsackhalter, ABS-Deckel

Sack 15 l · 194 × 229 × 274 mm



STW-01/P Abfallsackständer, fahrbar

Sack 40–80 l · frei stehend



KK-01 Knieabwurfbehälter

Einsatz 8 l



KK-02 Knieabwurfbehälter, groß

Einsatz 20 l



KW-01/Z Abfallbehälter mit Z-Halter

9 l · Deckel arretierbar



KW-02/Z Abfallbehälter mit Z-Halter

8 l · Deckel arretierbar

ZUBEHÖR

Ablagen, Dokumentation und Leitungsführung

74

Halter für Schalen und Behälter

75

Katheter, Körbe und Flaschen

76

Sauerstoff und Entsorgung

77

11 ARTIKEL Alle Teile werden an Normschiene MODUR oder EUROSTANDARD eingehängt · Halter siehe Seite 73 · Edelstahl ist AISI 304 (0H18N9), Stahl pulverbeschichtet in den Farbtönen ab Seite 7

Infusion, Sichtschutz, Auslegerarme und das mobile System

Die großen Anbauten. Sie ersetzen am festen Bettplatz, was sonst fahrbar im Raum steht - Infusionsständer, Sichtschutz, Monitorstativ. Wo keine Wandschiene möglich ist, bringt PMS dieselbe Zubehörwelt auf Rollen.



MP-05 Infusionsständer mit Pumpenmast

Mast 1100 mm, Ø 25/16 mm, höhenverstellbar. Kopf G-01 bis G-05 wählbar – bis zu fünf Haken. Traglast Kopf 2–5 kg, Ständer 10 kg.



MP-03 / MP-04 Infusionsgalgen, U- und L-Form

Ausleger 600 mm, um 180° schwenkbar. Trägt Infusionspumpen neben dem Bett, ohne dass ein Ständer im Weg steht.



KO-2m Teleskop-Infusionsständer an der Schiene

Edelstahl, vier Teleskopstufen, 700 auf 2000 mm, 180° schwenkbar. Ersetzt den fahrbaren Ständer am festen Bettplatz.



PT-02 Teleskop-Sichtschutz mit Vorhang

Ausladung 700 auf 2000 mm, Neigung und Schwenkung einstellbar. Vorhang aus Polyester (ZP) oder PVC (ZZ), 12 Clips im Lieferumfang.



WKP-02 Auslegerarm, ein- bis dreigelenkig

Arme 200 / 300 / 450 / 550 mm, Rohr Ø 16 / 20 mm, Aluminium oder Edelstahl. Kabelköpfe KL-01 bis KL-12 aufsteckbar. Winkeldiagramme liegen vor.



PMS-01 Mobiles Schienensystem

Fahrbarer Alu-Rahmen mit fünf Schienenabschnitten, 800 × 605 × 1700 mm, vier Rollen Ø 125 mm. Für Bettplätze ohne Wandschiene und für den Transport.



UMK-06 / UMK-07 Monitorhalter mit Gasfeder

Für Bildschirme 15 bis 27 Zoll und 2 bis 7 kg. Höhe 155 mm verstellbar, Neigung +50°/-35°, Bildschirm und Arm je 180° drehbar, UMK-07 zusätzlich mit Pivot.



Steckdosenleiste Stromversorgung am Bettplatz

3 bis 9 Schutzkontaktplätze, Netzschalter mit Spannungsanzeige, Überspannungsschutz, Zuleitung 3 m. Wird an der Schiene oder am PMS-Rahmen montiert.

Ergänzendes Zubehör. Zu Infusionsständern und Galgen gehören die Halterköpfe **G-01** bis **G-05** mit zwei bis fünf Haken, zu den Auslegerarmen die Kabelköpfe **KL-01** bis **KL-12** und die Kabelscheibe **TR-01**. Sie werden zum Auftrag ausgewählt und sind untereinander tauschbar.

ZUBEHÖR

Ablagen, Dokumentation und Leitungsführung 74

Halter für Schalen und Behälter 75

Katheter, Körbe und Flaschen 76

Sauerstoff und Entsorgung 77

PLANUNG Für die Auslegerarme liegen Winkeldiagramme aller Gelenkkombinationen vor · Vorhänge und Polsterfarben stehen in der separaten Farbkarte

KONTAKT

Ihr Partner für Klinik & Praxis.

medeqon plant und liefert medizinische Einrichtung herstellerunabhängig. Neben der Stationsausstattung dieses Katalogs umfasst unser Programm Strahlenschutz, medizinische Einrichtung sowie Heilbehelfe und Hilfsmittel. Für Projekte übernehmen wir die Zusammenstellung über alle Gewerke – von der Bedarfsermittlung bis zur Übergabe.

MEDEQON GMBH

Bergstrasse 42/5/3
2102 Hagenbrunn
Österreich

KONTAKT

office@medeqon.com
+43 1 3580045
www.medeqon.com

FIRMENDATEN

FN 672926y
UID ATU83016237

HERSTELLER



Zakład Techniki Medycznej „Tech-Med” Sp. z o.o. · Bydgoszcz, Polen
Qualitätsmanagement nach PN-EN ISO 9001:2015 und PN-EN ISO
13485:2016-04

