

Ochrona radiologiczna montowana na suficie.

Specyfikacje i informacje zamówieniowe



Ochrona nadstołowa z lampą LED na szynie sufitowej



Nadstołowe osłony ochronne

Ochrona radiologiczna montowana na suficie i nadstołowo minimalizuje dawkę promieniowania rozproszonego dla głowy, soczewki oka i górnej części ciała – i umożliwia natychmiastowy dostęp do pacjenta w nagłych przypadkach. Instalacje stacjonarne lub jezdne na szynach sufitowych są możliwe, opcjonalnie z zintegrowaną lampą LED.

- Przezroczyste osłony z akrylu ołowiowego zapewniające dobrą widoczność przy ciągłej ochronie.
- Stacjonarny, montowany na ścianie lub na szynie (jezdny) – w zależności od wymagań.
- Przegub kulowy 360° lub poziomy przegub obrotowy do elastycznego pozycjonowania.
- Opcjonalnie ze zintegrowaną lampą LED operacyjną/diagnostyczną.



354



351



350



354/P/88-207/LR



308



System LED



Nadstołowe osłony ochronne

Zawieszona osłona z mocowaniem środkowym

354



Przezroczysta, centralnie montowana osłona radiologiczna górnej części ciała – z wycięciem narożnym konturu pacjenta lub bez niego. Centralny przegub kulowy umożliwia obrót o 360° i pochylenie w orientacji pionowej.

Dane techniczne

Równoważnik ołowiu	0,5 mm akryl ołowiowy
Rozmiary osłon	85 × 80 cm (wycięcie narożne) · 76 × 61 cm (standard) · 76 × 61 cm (wycięcie narożne) · 40 × 50 cm
Ruch	przegub kulowy 360° (orientacja pionowa)
Opcjonalnie	elastyczne panele ołowiowe 0,5 mm na dolnym profilu · długości kolumn sufitowych na wymiar

Wykonanie · Kod	Rozmiar i montaż
354/P/76-001	76 × 61 cm + kontur pacjenta · stacjonarny montaż sufitowy
354/P/76-0031	76 × 61 cm + kontur pacjenta · jezdny wózek sufitowy i szyna
354/P/76-005	76 × 61 cm + kontur pacjenta · montaż na ścianie
354/P/76-007	76 × 61 cm + kontur pacjenta · tylko osłona
354/76-001	76 × 61 cm · stacjonarny montaż sufitowy
354/76-0031	76 × 61 cm · jezdny wózek sufitowy i szyna
354/76-005	76 × 61 cm · montaż na ścianie
354/45-001	40 × 50 cm · stacjonarny montaż sufitowy
354/45-0031	40 × 50 cm · jezdny wózek sufitowy i szyna
354/45-005	40 × 50 cm · montaż na ścianie

Kod montażu: -001 stacjonarny montaż sufitowy (kolumna 80 cm i ramię nośne) · -0031 jezdny wózek sufitowy i szyna (250 / 420 cm) · -005 montaż na ścianie · -006 osłona i ramię nośne · -007 tylko osłona. Opcjonalna dolna zasłona: 354 i 351 P LR. 85 × 61 cm z konturem pacjenta na zapytanie.

Zawieszona osłona z poziomym przegubem obrotowym

351



Przezroczysta osłona radiologiczna górnej części ciała w orientacji poziomej – z wycięciem narożnym konturu pacjenta lub bez niego (wycięcie narożne tylko dla 60 × 80 cm). Obraca się wokół centralnej osi poziomej.

Dane techniczne

Równoważnik ołowiu	0,5 mm akryl ołowiowy
Rozmiary osłon	60 × 80 cm · 60 × 80 cm (wycięcie narożne) · 40 × 50 cm
Ruch	poziomy przegub obrotowy (oś centralna)
Opcjonalnie	elastyczne panele ołowiowe 0,5 mm na dolnym profilu · długości kolumn sufitowych na wymiar

Wykonanie · Kod	Rozmiar i montaż
351/P/68-001	60 × 80 cm + kontur pacjenta · stacjonarny montaż sufitowy
351/P/68-0031	60 × 80 cm + kontur pacjenta · jezdny wózek sufitowy i szyna
351/P/68-005	60 × 80 cm + kontur pacjenta · montaż na ścianie
351/68-001	60 × 80 cm · stacjonarny montaż sufitowy
351/68-0031	60 × 80 cm · jezdny wózek sufitowy i szyna
351/68-005	60 × 80 cm · montaż na ścianie
351/45-001	40 × 50 cm · stacjonarny montaż sufitowy
351/45-0031	40 × 50 cm · jezdny wózek sufitowy i szyna
351/45-005	40 × 50 cm · montaż na ścianie

Kod montażu: -001 stacjonarny montaż sufitowy (kolumna 80 cm i ramię nośne) · -0031 jezdny wózek sufitowy i szyna (250 / 420 cm) · -005 montaż na ścianie · -006 osłona i ramię nośne · -007 tylko osłona. Opcjonalna dolna zasłona: 354 i 351 P LR.

Zawieszona osłona oczu i tarczycy

350



Przezroczysta osłona przeznaczona specjalnie do ochrony oczu i tarczycy z elastyczną dolną zasłoną. Obraca się wokół centralnej osi poziomej.

Dane techniczne

Osłona	przezroczyste szkło ołowiowe · min. 2,2 mm Pb
Dolna zasłona	elastyczny · 0,5 mm Pb
Rozmiary osłon	40 × 50 cm · 30 × 40 cm
Ruch	poziomy przegub obrotowy (oś centralna)

Wykonanie · Kod	Rozmiar i montaż
350/45-001	40 × 50 cm · stacjonarny montaż sufitowy
350/45-0031	40 × 50 cm · jezdny wózek sufitowy i szyna
350/45-005	40 × 50 cm · montaż na ścianie
350/45-006	40 × 50 cm · osłona i ramię nośne
350/45-007	40 × 50 cm · tylko osłona
350/34-001	30 × 40 cm · stacjonarny montaż sufitowy
350/34-0031	30 × 40 cm · jezdny wózek sufitowy i szyna
350/34-005	30 × 40 cm · montaż na ścianie
350/34-006	30 × 40 cm · osłona i ramię nośne
350/34-007	30 × 40 cm · tylko osłona

Kod montażu: -001 stacjonarny montaż sufitowy (kolumna 80 cm i ramię nośne) · -0031 jezdny wózek sufitowy i szyna (250 / 420 cm) · -005 montaż na ścianie · -006 osłona i ramię nośne · -007 tylko osłona.

Osłona z akrylu ołowiowego z zasłoną · Elastyczna osłona nadstołowa

354/P/88-207/LR · 308



354/P/88-207/LR · Akryl ołowiowy z zasłoną

Centralnie montowana osłona z akrylu ołowiowego z wycięciem narożnym konturu pacjenta i elastyczną zasłoną, do mocowania na ramieniu nośnym VALiA MD21+; centralny przegub środkowy z obrotem o 360°.

Dane techniczne	
Wymiary	85 × 80 cm
Akryl ołowiowy	0,5 mm Pb (@150 kV)
Zasłona	0,5 mm Pb, na dolnym profilu 80 cm
Wycięcie narożne	konfigurowalne po lewej lub prawej stronie
Masa	15,8 kg · dostarczany w częściach



308 · Nadstołowa osłona ołowiowa, elastyczna

Osłona nadstołowa z zachodzącymi panelami z odchylaną częścią środkową (mocowanie na zatrzask). Elastyczny winyl ołowiowy, wraz z ramieniem nośnym.

Dane techniczne	
Wymiary	50 cm wysokości × 100 cm szerokości
Równoważnik ołowiu	elastyczny 0,5 mm Pb (winyl ołowiowy)
Część środkowa	odchylana, mocowana na zatrzask
Montaż	stacjonarny · ściana · szyna sufitowa (250 cm)

Uwaga: Do elastycznej osłony 308 dostępne są systemy kombinowane z 2 ramionami nośnymi i głowicą lampy na zapytanie.

Oświetlenie LED

354/P76/LED · 351/P68/LED · 350/45/LED



Oświetlenie + lampa LED na szynie sufitowej

Oświetlenie nadstołowe 354, 351 i 350 są dostępne jako kombinacja ze zintegrowaną lampą LED operacyjną/diagnostyczną. Instalacje stacjonarne lub montowane na szynie; w przypadku urządzeń zasilanych elektrycznie wymagane jest prowadzenie kabli (przewodnik kablowy).

Kombinacje oświetlenie/LED

354/P76/LED	montowanie środkowe 76 × 61 cm + LED
351/P68/LED	przegub obrotowy 60 × 80 cm + LED
350/45/LED	oczy i tarczyca 40 × 50 cm + LED
351/68/LED130F	oświetlenie obrotowe 60 × 80 cm (bez wycięcia narożnego) + LED 130F

Opcja LED	Moc
LED 130F	70 000 luksów · głowica lampy 33 cm · 19 diod LED
LED 150F	110 000 luksów · głowica lampy 40 cm · 26 diod LED
LED 300DF SC	160 000 luksów · głowica lampy 55 cm · 36 diod LED

Montaż: Stacjonarny z kolumną sufitową 80 cm i 2 ramionami nośnymi (-001) lub szyna sufitowa 250 / 420 cm z wózkiem (-0031), opcjonalnie z przewodem kablowym (przewodzenie kabli). Niestandardowe długości kolumn i szyn na zapytanie.

Montaż sufitowy i zawieszenie

3001/TC · 300/COLUMN · 300/P/014 · 300/P/012



3001/TC · Szyna sufitowa i wózek

Solidna, opatentowana aluminiowa szyna sufitowa firmy KENEX z lekko poruszającym się wózkiem (1 wózek w zestawie). Maksymalnie 2 wózki umożliwiają niezależny ruch do 4 urządzeń. Opcjonalny przewód kablowy wpasowuje się równo w szynę, prowadzi kable zasilające lub kontrastu i jest również możliwy do domontowania.


Wykonanie · Kod	Opis
3001/TC/250	Aluminiowa szyna sufitowa 2,5 m
3001/TC/420	Aluminiowa szyna sufitowa 4,2 m
3001/TC/250/EC	Prowadnik kablowy 2,5 m · prowadzenie kabli
3001/TC/420/EC	Prowadnik kablowy 4,2 m · prowadzenie kabli

Elementy montażowe i instalacyjne



300/COLUMN · Kolumna sufitowa z podwójnym przegubem

Stalowa kolumna sufitowa z dwoma przegubami jako nośna podstawa dla osłony i ramienia nośnego; długości na wymiar.

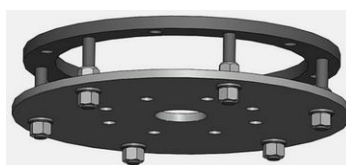

300/P/014 · Pierścień i płyta kotwiąca

Do małych pustek sufitowych od 8,5–30 cm; bezpieczne mocowanie kolumny sufitowej do stropu konstrukcyjnego.



300/P/012 · Kotwa do pustki sufitowej

Platforma montażowa do przestrzeni między sufitem podwieszanym a masywnym (do 90 cm). Dostarczana w częściach, precyzyjnie regulowana; kolumna nie wchodzi w skład.

Uwaga: Prowadzenie kabli (prowódca kablowy) jest wymagane, gdy zawieszane są urządzenia zasilane elektrycznie (np. lampy LED). Niestandardowe długości szyn i kolumn na zapytanie.

KONTAKT

Twój partner w zakresie ochrony radiologicznej.

Pośredniczymy w sprzedaży i dostarczamy certyfikowane wyroby medyczne. Ponadto, niezależnie od producenta, sprowadzamy niemal każdy produkt i kompleksowo wyposażamy całe obszary w ramach projektów.

medeqon GmbH

Biuro inżynierskie techniki medycznej
Bergstrasse 42/5/3
2102 Hagenbrunn · Austria

office@medeqon.com

+43 1 3580045

www.medeqon.com