

Mobiler Strahlenschutz.

Spezifikationen & Bestellinformationen



Übertisch-Bleischild 326/05 · höhenverstellbar



Mobiler Strahlenschutz

Mobiler Strahlenschutz bietet flexiblen Schutz vor Streustrahlung – direkt an der Tischseite oder frei im Raum positionierbar. Viele Modelle sind höhenverstellbar und bieten mindestens 0,5 mm Pb Bleigleichwert. So schaffen Sie eine wirksame Schutzzone genau dort, wo sie gebraucht wird.

- Flexibel positionierbar – an den Tisch heranfahren oder bei Bedarf umstellen.
- Höhenverstellbare, ausbalancierte Modelle für schnelle Anpassung ohne Installation.
- Bleiacryl-Sichtfenster bzw. Bleiglasfenster für freie Sicht bei durchgehendem Schutz.
- Robuste Fahrgestelle mit abschließbaren Lenkrollen.



310/B-3



326/05



314/05




303/B2/90



303/B3/90

Mobiles Bleischild · höhenverstellbar

310/B-3

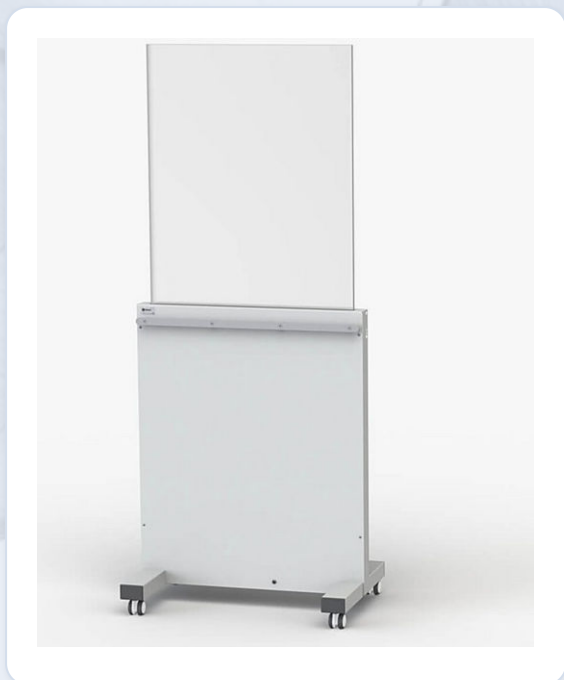

Mobiles, höhenverstellbares Bleischild – ideal für beengte Bereiche nahe der Tischseite. Kompakt und leicht zu manövrieren; das ausbalancierte Fenster ist nahezu gewichtslos und lässt sich schnell in der Höhe verstellen. Im abgesenkten Zustand nimmt es nur wenig Platz ein.

Technische Daten	
Unteres Paneel	78 cm breit × 102 cm hoch · 1,0 mm Pb (@150 kV)
Bleiacryl-Fenster	70 cm breit · 0,5 mm Pb (@150 kV)
Höhenverstellung	115–188 cm (ab Boden), ausbalanciert
Ausführung	Stahl, weiß (RAL 9010)
Gewicht	ca. 61 kg (netto)
Zubehörschiene	werkseitig in voller Breite (zwei Größen)

Variante / Code	Beschreibung
310/B-3/31	Schild mit Zubehörschiene 769 × 10 × 25 mm
310/B-3/91	Schild mit Zubehörschiene 769 × 8 × 25 mm
317/05-01	Seitliche Schutzpaneele – 85 cm hoher flexibler 0,5 mm Pb Vorhang am doppelgelenkigen Schwenkarm; +68 cm je Paneel, max. 214 cm mit zwei Paneelen; links / rechts / beidseitig · ca. 5,8 kg

Merkmale

- Kompakt und leicht in Position zu bringen.
- Gerätehandsteuerungen an optionaler Zubehörschiene montierbar.

Übertisch-Bleischild · höhenverstellbar

326/05



Übertisch-Bleischild mit den Eigenschaften decken- und tischmontierter Schilde in einer mobilen Einheit. Es reduziert die Strahlenexposition für den ganzen Körper deutlich und schafft eine große Schutzzone, in der der Anwender arbeiten kann – einfach in Höhe und Breite verstellbar, ohne Installation.

Technische Daten

Bleiacryl-Fenster	50 × 116 cm, ausbalanciert, mit Eckausschnitt
Bleigleichwert	0,5 mm Pb durchgängig
Höhe	max. 169 cm angehoben · 139 cm abgesenkt
Flexible Vorhänge	80 cm hoch, Breite 45–80 cm verstellbar
Fahrgestell	für C-Bogen-Bewegung unter dem Tisch geformt

Merkmale

- Fenster über dem Patienten positionierbar, Eckausschnitt für Quer-über-Tisch-Einsatz.
- Frontvorhang bis zur Tischseite ausziehbar – schützt auch assistierendes Personal.

Mobiles Schutzpaneel-Schild

314/05



Kompaktes mobiles Schutzpaneel-Schild zum Schutz von Patient oder Anwender. Das flexible Paneel bietet 0,5 mm Pb – mit flexiblem Innenkern und robuster Außenhülle: strapazierfähig, leicht zu reinigen und delaminiert nicht. Höhenverstellbare Teleskopsäule mit Federunterstützung.

Technische Daten

Bleigleichwert	0,5 mm Pb
Höhenverstellung	85–120 cm · federunterstützte Teleskopsäule
Basis	56 × 56 cm
Paneel	70 cm breit × 60 cm hoch

Variante / Code	Beschreibung
314/05-01	Einzel-Schutzpaneel · 60 × 70 cm (H × B) · ca. 17 kg
314/05-02	Doppel-Paneel mit zusätzlichem festem, überlappendem Paneel unten · 120 × 70 cm (H × B) · ca. 23 kg

Mobile Schutzschirme

303/B2/90 · 303/B3/90

Massive Paneelkonstruktion mit Bleikern, beidseitig mit Hochdruck-Laminat beschichtet und mit stoßfester ABS-Kantenumleimung. Bündig verglastes Bleiglasfenster; robuste Beine mit gebremsten Lenkrollen und Griffen zum leichten Verfahren.



303/B2/90 · Mobiler Schutzschirm




303/B3/90 · Panoramischer Schutzschirm

Technische Daten	
Maße	200 × 90 cm (Höhe × Breite)
Bleigleichwert	2,2 mm Pb durchgängig
Sichtfenster	25 × 25 cm · bündig verglast · Bleiglas 2,2 mm Pb
Fenstermitte	152 cm ab Boden
Gewicht	ca. 110 kg

Technische Daten	
Maße	200 × 90 cm (Höhe × Breite)
Bleigleichwert	2,2 mm Pb durchgängig
Panoramafenster	62 × 25 cm · bündig verglast · Bleiglas 2,2 mm Pb
Fenstermitte	152 cm ab Boden
Gewicht	ca. 110 kg


Verfügbare Farben

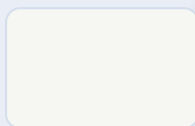


004 Weiß



006 Creme

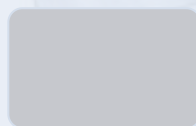

026 Hellgrau

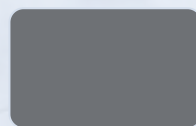

019 Dunkelgrau



014 Türkisblau



003 Pink

Farbdarstellung nur zur Orientierung.

KONTAKT

Ihr Partner für Strahlenschutz.

Wir vermitteln und liefern zertifizierte Medizinprodukte. Darüber hinaus beschaffen wir herstellerunabhängig nahezu jedes Produkt und stellen ganze Bereiche projektbasiert aus.

medeqon GmbH

Ingenieurbüro für Medizintechnik

Bergstrasse 42/5/3

2102 Hagenbrunn · Österreich

office@medeqon.com

+43 1 3580045

www.medeqon.com