

Mobilna ochrona radiologiczna.

Specyfikacje i informacje zamówieniowe



Nadstołowa osłona ołowiowa 326/05 · regulowana na wysokość



Mobilna ochrona radiologiczna

Mobilna ochrona radiologiczna zapewnia elastyczną ochronę przed promieniowaniem rozproszonym – z możliwością ustawienia bezpośrednio przy boku stołu lub swobodnie w pomieszczeniu. Wiele modeli jest regulowanych na wysokość i zapewnia co najmniej 0,5 mm Pb równoważnika ołowiu. Dzięki temu tworzą Państwo skuteczną strefę ochronną dokładnie tam, gdzie jest potrzebna.

- Elastyczne ustawianie – dosunięcie do stołu lub przestawienie w razie potrzeby.
- Regulowane na wysokość, wyważone modele do szybkiego dostosowania bez instalacji.
- Okno wziernikowe z akrylu ołowiowego lub okno ze szkła ołowiowego zapewniające swobodny widok przy ciągłej ochronie.
- Wytrzymałe podwozia z kółkami jezdnyymi z blokadą.



310/B-3



326/05



314/05



303/B2/90



303/B3/90



Mobilna osłona ołowiowa · regulowana na wysokość

310/B-3

Mobilna, regulowana na wysokość osłona ołowiowa – idealna do ciasnych obszarów w pobliżu boku stołu. Kompaktowa i łatwa w manewrowaniu; wyważone okno jest niemal nieważkie i można je szybko regulować na wysokość. W opuszczonej pozycji zajmuje niewiele miejsca.

Dane techniczne

Panel dolny	78 cm szerokości × 102 cm wysokości · 1,0 mm Pb (@150 kV)
Okno z akrylu ołowiowego	70 cm szerokości · 0,5 mm Pb (@150 kV)
Regulacja wysokości	115–188 cm (od podłogi), wyważone
Wykonanie	Stal, biały (RAL 9010)
Masa	ok. 61 kg (netto)
Szyna akcesoriów	fabrycznie, na całej szerokości (dwa rozmiary)

Wariant / Kod	Opis
310/B-3/31	Osłona z szyną akcesoriów 769 × 10 × 25 mm
310/B-3/91	Osłona z szyną akcesoriów 769 × 8 × 25 mm
317/05-01	Boczne panele ochronne – elastyczna zasłona 0,5 mm Pb o wysokości 85 cm na dwuprzegubowym ramieniu obrotowym; +68 cm na panel, maks. 214 cm z dwoma panelami; lewy / prawy / obustronnie · ok. 5,8 kg

Cechy

- Kompaktowa i łatwa w ustawieniu.
- Ręczne sterowniki urządzeń montowane na opcjonalnej szynie akcesoriów.

Nadstołowa osłona ołowiowa · regulowana na wysokość

326/05



Nadstołowa osłona ołowiowa łącząca właściwości osłon montowanych na suficie i na stole w jednej mobilnej jednostce. Znacznie redukuje ekspozycję całego ciała na promieniowanie i tworzy dużą strefę ochronną, w której użytkownik może pracować – łatwo regulowana na wysokość i szerokość, bez instalacji.

Dane techniczne

Okno z akrylu ołowiowego	50 × 116 cm, wyważone, z wycięciem narożnym
Równoważnik ołowiu	0,5 mm Pb ciągly
Wysokość	maks. 169 cm podniesiona · 139 cm opuszczona
Elastyczne zasłony	80 cm wysokości, szerokość regulowana 45–80 cm
Podwozie	uksztaltowane pod ruch ramienia C pod stołem

Cechy

- Okno ustawiane nad pacjentem, wycięcie narożne do zastosowania w poprzek stołu.
- Przednia zasłona wysuwana do boku stołu – chroni również personel asystujący.

Mobilna osłona panelowa

314/05



Kompaktowa mobilna osłona panelowa do ochrony pacjenta lub użytkownika. Elastyczny panel zapewnia 0,5 mm Pb – z elastycznym rdzeniem wewnętrznym i wytrzymałą powłoką zewnętrzną: wytrzymały, łatwy do czyszczenia i nie rozwarstwia się. Regulowana na wysokość teleskopowa kolumna ze wspomaganie sprężynowym.

Dane techniczne

Równoważnik ołowiu	0,5 mm Pb
Regulacja wysokości	85–120 cm · teleskopowa kolumna ze wspomaganie sprężynowym
Podstawa	56 × 56 cm
Panel	70 cm szerokości × 60 cm wysokości

Wariant / Kod	Opis
314/05-01	Pojedynczy panel ochronny · 60 × 70 cm (wys. × szer.) · ok. 17 kg
314/05-02	Podwójny panel z dodatkowym stałym, zachodzącym panelem u dołu · 120 × 70 cm (wys. × szer.) · ok. 23 kg

Mobilne parawany ochronne

303/B2/90 · 303/B3/90

Masywna konstrukcja panelowa z rdzeniem ołowiovym, pokryta obustronnie laminatem wysokociśnieniowym i z odpornym na uderzenia obrzeżem ABS. Licowane okno ze szkła ołowiwego; wytrzymałe nogi z kółkami jezdnymi z hamulcem i uchwytami do łatwego przemieszczania.



303/B2/90 · Mobilny parawan ochronny




303/B3/90 · Panoramiczny parawan ochronny


Dane techniczne	
Wymiary	200 × 90 cm (wysokość × szerokość)
Równoważnik ołowiu	2,2 mm Pb ciągły
Okno wzornikowe	25 × 25 cm · licowane · szkło ołowiove 2,2 mm Pb
Środek okna	152 cm od podłogi
Masa	ok. 110 kg

Dane techniczne	
Wymiary	200 × 90 cm (wysokość × szerokość)
Równoważnik ołowiu	2,2 mm Pb ciągły
Okno panoramiczne	62 × 25 cm · licowane · szkło ołowiove 2,2 mm Pb
Środek okna	152 cm od podłogi
Masa	ok. 110 kg


Dostępne kolory

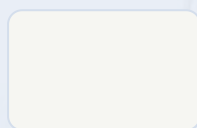


004 Białe

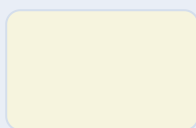

006 Kremowy

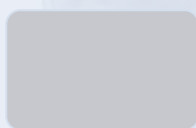


026 Jasnoszary

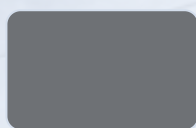

019 Ciemnoszary



014 Turkusowy

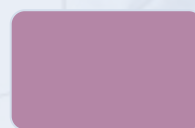

003 Różowy

Odwzorowanie kolorów wyłącznie orientacyjne.

KONTAKT

Twój partner w zakresie ochrony radiologicznej.

Pośredniczymy w sprzedaży i dostarczamy certyfikowane wyroby medyczne. Ponadto, niezależnie od producenta, sprowadzamy niemal każdy produkt i kompleksowo wyposażamy całe obszary w ramach projektów.

medeqon GmbH

Biuro inżynierskie techniki medycznej
Bergstrasse 42/5/3
2102 Hagenbrunn · Austria

office@medeqon.com

+43 1 3580045

www.medeqon.com