


Tischmontierter Strahlenschutz.

Spezifikationen & Bestellinformationen



Tischmontierter Strahlenschutz · 312/E-021

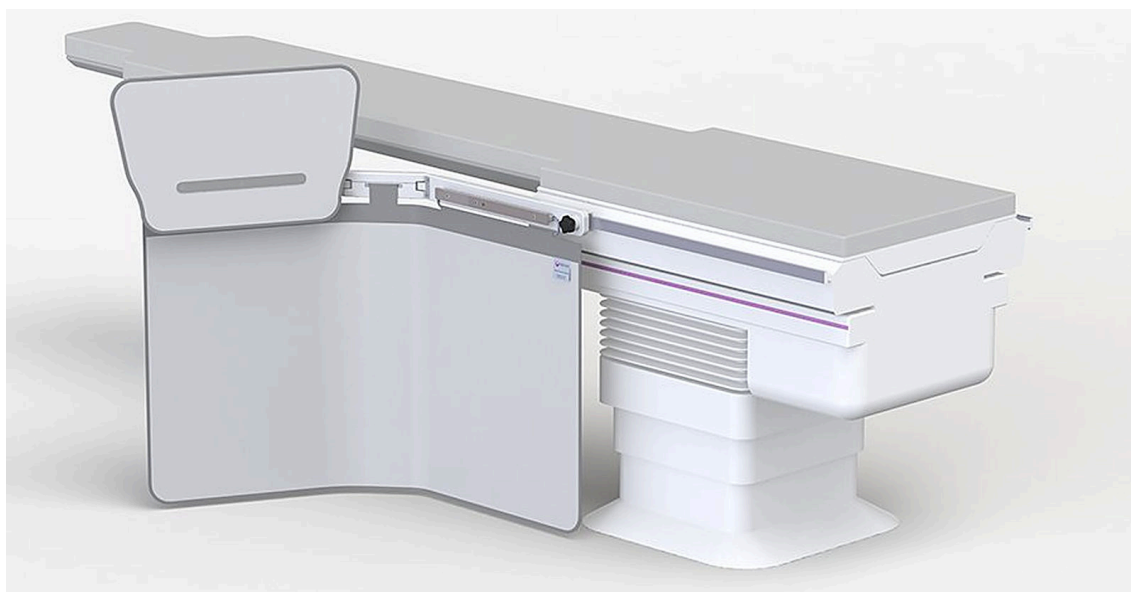

Inhalt


Über diese Produktreihe	3
Konstruktion & Key-Features	4
Schild-Konfigurationen · 78–162 cm	5
Kollisionsgeschützte Schilde · 92–162 cm	11
Aufsatzschilde · Optionen, Höhen & Kompatibilität	15
Kopfende-Schilde	19
Fußende-Schild	23
Aufbewahrung · Wandhalter & mobile Ständer	24
Kontakt	27



Über diese Produktreihe

KENEX-Unterkörper-Schilde reduzieren die vom Tisch bzw. vom Körper des Patienten ausgehende Streustrahlung erheblich. Sie bestehen aus einer leichten, langlebigen Struktur mit verstärktem Doppelreibgelenk oder Einzelreibgelenk und einem Schwenkarm, der einen flexiblen Schutzvorhang mit 0,5 mm Pb Bleigleichwert trägt. Optionale, halbflexible Aufsatzschilde bieten zusätzlichen Schutz für den Oberkörper.


- Alle Schilde lassen sich beidseitig am Tisch montieren, sodass der Schwenkarm stets zum Kopfende zeigt.
- Die Befestigungshalterung wird auf die Tischschiene aufgeschoben und passt sich schnell an 25 mm oder 28,6 mm hohe Schienen an (max. 11 mm dick).
- Automatische Verschleißnachstellung sorgt für konstante Gelenkreibung – auch bei in jede Richtung gekipptem Tisch.
- Der hängende Vorhang bildet eine durchgehende Schutzzone für Radiolog:innen bzw. Kardiolog:innen.
- Der Vorhang legt sich um die untertischseitige Röntgenröhre, ohne die Bewegung zu behindern.
- In Kombination mit deckenmontierten KENEX-Systemen ergänzen sich Ober- und Unterkörperschutz zu einer wirksamen Streustrahlen-Barriere.

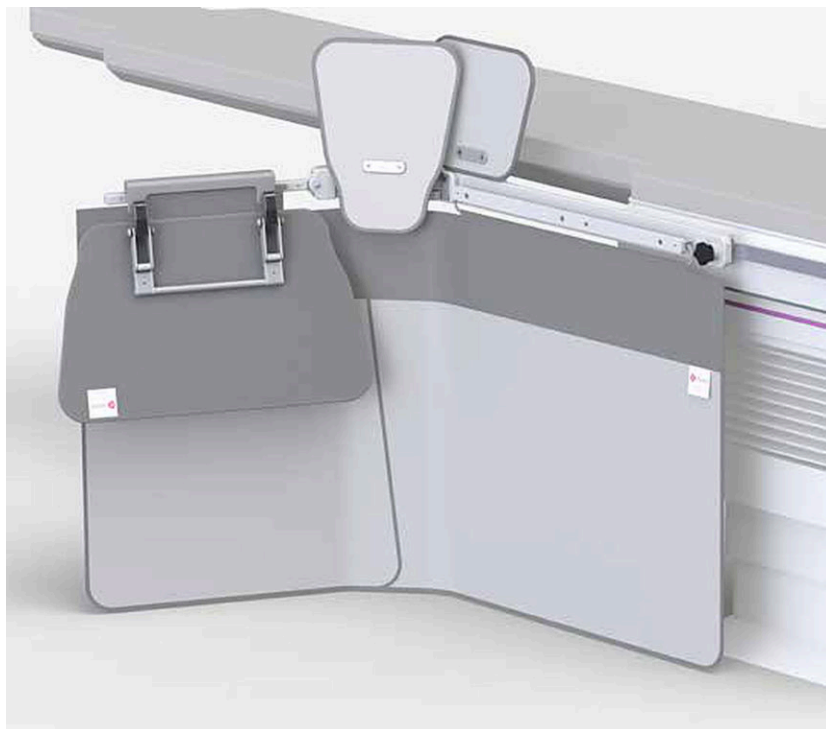

312/DS-039/6/3 · Unterkörper-Schild mit Aufsätzen


Konstruktion & Key-Features

Integrierte Zubehörschiene

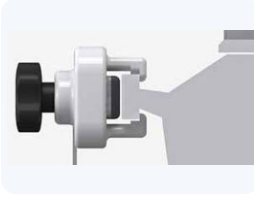

Alle Schilde ab 100 cm Breite werden mit zwei integrierten Zubehörschienen geliefert (10×25 mm montiert, 9,5×28,6 mm mitgeliefert). Bediengeräte lassen sich nah am Anwender anbringen.

Stabile Gelenkbolzen

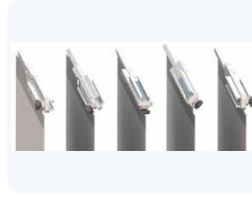

Interne Edelstahl-Bolzen (10 mm Ø) halten die Komponenten sicher und bieten stabile, dauerhaft belastbare Drehpunkte.

Beidseitige Montage



Alle Modelle lassen sich schnell links oder rechts am Tisch anbringen und bei Bedarf auf die andere Seite umsetzen.

Selbstjustierendes Gelenk



Ein wartungsfreier Mechanismus hält die eingestellte Reibung und verhindert unerwünschte Vorhangbewegung – für eine lange Lebensdauer.

Schienenbreiten-Anpassung



Sichere Befestigung an 25 mm oder 28,6 mm hohen Tischschienen, vor Ort konfigurierbar (max. 11 mm dick).

Vorhang-Konstruktion



Flexibler Innenkern mit robuster Außenhülle (0,5 mm Pb) – strapazierfähig, leicht zu reinigen, delaminiert nicht. Optional als drei überlappende Panels (Zusatz /P).

Kollisionsschutz



Patentierter Mechanismus: Der Schwenkarm weicht bei Kollision mit dem C-Bogen nach oben aus – schützt Schild und Gerät.

Griff mit Schutzkragen



Griff aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff, geschützt durch einen massiven Kragen um den Griffschaft.

Tischmontierte Schilde **Schild-Konfigurationen**

Die KENEX-Reihe für den Unterkörperschutz reicht von 78 cm bis 162 cm Breite. Jedes Schild wird mit einem flexiblen Schutzvorhang mit 0,5 mm Pb Bleigleichwert geliefert. Aufsatzschilde erweitern den Schutz und sind je nach Produkt bereits enthalten oder separat erhältlich (Kompatibilität siehe Seite 16).

78 cm breite Schutzschilde

Bestehend aus:

- Vorhangpanel 78 cm breit × 70 cm hoch (optional als drei überlappende Panels).
- Einzelreibgelenk für präzise Positionierung.
- Aufsatzschilde bei einigen Produkten enthalten – Kompatibilität siehe Seite 16.



312/E-006



312/E-006/P · drei überlappende Panels



312/E-005


78 cm breit Produktcode	Vorhangpanel		Aufsatzschilde · 57 cm	
	einteilig	drei überl.	Lift-off 312/DS/3,32	Fold-down 312/DS/3,33
312/E-005	●			
312/E-005/P		●		
312/E-006	●		●	
312/E-006/P		●	●	
312/E-007	●			●
312/E-007/P		●		●

● enthalten · Weitere Aufsatzschilde verfügbar – Kompatibilität siehe Seite 16

92 cm breite Schutzschilde

Bestehend aus:

- Vorhangpanel 92 cm breit × 70 cm hoch (optional als drei überlappende Panels).
- Doppelreibgelenk für präzise Positionierung.
- Aufsatzschilde bei einigen Produkten enthalten – Kompatibilität siehe Seite 16.

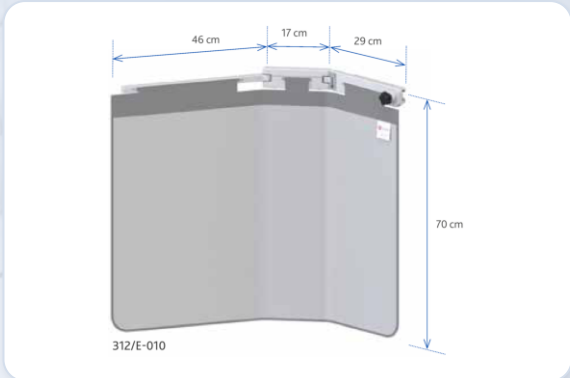

92 cm breit Produktcode	Vorhangpanel		Aufsatzschilde · 57 cm	
	einteilig	drei überl.	Lift-off 312/DS/3,32	Fold-down 312/DS/3,33
312/E-010	●			
312/E-010/P		●		
312/E-011	●		●	
312/E-011/P		●	●	
312/E-012	●			●
312/E-012/P		●		●

● enthalten · Weitere Aufsatzschilde verfügbar – Kompatibilität siehe Seite 16

100 cm breite Schutzschilde

Bestehend aus:


- Vorhangpanel 100 cm breit × 70 cm hoch (optional als drei überlappende Panels).
- Einzelreibgelenk für präzise Positionierung.
- Zwei integrierte Zubehörschienen 35 cm: 10×25 mm (montiert) / 9,5×28,6 mm (mitgeliefert); optional 7,7×25 mm.
- Aufsatzschilde bei einigen Produkten enthalten – Kompatibilität siehe Seite 16.



312/E-016



312/E-016/P

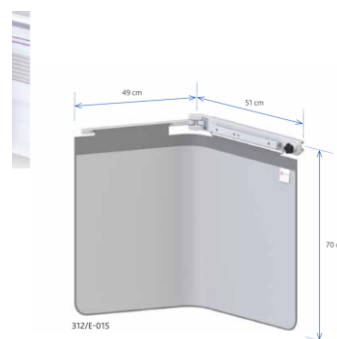

312/E-015

100 cm breit Produktcode	Vorhangpanel		Zubehörschiene · 35 cm		Aufsatzschilde · 57 cm	
	einteilig	drei überl.	10×25 mm 9,5×28,6 mm	7,7×25 mm	Lift-off 312/DS/3.32	Fold-down 312/DS/3.33
312/E-015	●		●			
312/E-015/P		●	●			
312/E-015/8	●			●		
312/E-015/8P		●		●		
312/E-016	●		●		●	
312/E-016/P		●	●		●	
312/E-016/8	●			●	●	
312/E-016/8P		●		●	●	
312/E-017	●		●			●
312/E-017/P		●	●			●
312/E-017/8	●			●		●
312/E-017/8P		●		●		●

● enthalten · Weitere Aufsatzschilde verfügbar – Kompatibilität siehe Seite 16

114 cm breite Schutzschilde

Bestehend aus:


- Vorhangpanel 114 cm breit × 70 cm hoch (optional als drei überlappende Panels).
- Doppelreibgelenk für präzise Positionierung.
- Zwei integrierte Zubehörschienen 35 cm: 10×25 mm (montiert) / 9,5×28,6 mm (mitgeliefert); optional 7,7×25 mm.
- Aufsatzschilde bei einigen Produkten enthalten – Kompatibilität siehe Seite 16.



312/E-020



312/E-020/3

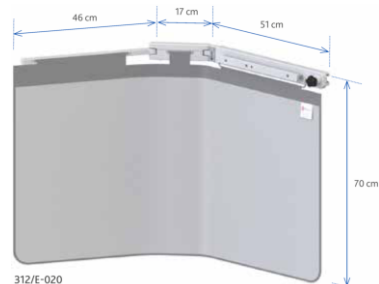

312/E-020

114 cm breit Produktcode	Vorhangpanel		Zubehörschiene · 35 cm		Aufsatzschilde · 57 cm		Aufsatzschilde · 27 cm	
	einteilig	drei überl.	10×25 mm 9,5×28,6 mm	7,7×25 mm	Lift-off 312/DS/3.32	Fold-down 312/DS/3.33	Lift-off 312/DS/3.30	Lift-off 312/DS/3.41
312/E-020	●		●					
312/E-020/P		●	●					
312/E-020/8	●			●				
312/E-020/8P		●		●				
312/E-020/3	●		●		●		●	●
312/E-020/3/P		●	●		●		●	●
312/E-020/3/8	●			●	●		●	●
312/E-020/3/8P		●		●	●		●	●
312/E-021	●		●		●			
312/E-021/P		●	●		●			
312/E-021/8	●			●	●			
312/E-021/8P		●		●	●			
312/E-022	●		●			●		
312/E-022/P		●	●			●		
312/E-022/8	●			●		●		
312/E-022/8P		●		●		●		

● enthalten · Weitere Aufsatzschilde verfügbar – Kompatibilität siehe Seite 16

137 cm breite Schutzschilde

Bestehend aus:


- Vorhangpanel 137 cm breit × 75 cm hoch.
- Doppelreibgelenk für präzise Positionierung.
- Zwei integrierte Zubehörschienen 57 cm: 10×25 mm (montiert) / 9,5×28,6 mm (mitgeliefert).
- Aufsatzschilde bei einigen Produkten enthalten – Kompatibilität siehe Seite 16.



312/DS-039/4



312/DS-039/4/3

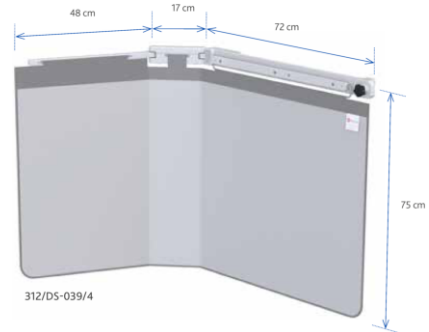

312/DS-039/4

137 cm breit Produktcode	Vorhangpanel	Zubehörschiene · 57 cm	Aufsatzschilde · 57 cm		Aufsatzschilde · 27 cm	
	einteilig	10×25 mm 9,5×28,6 mm	Lift-off 312/DS/3.32	Fold-down/Lift-off 312/DS/3.115	Lift-off 312/DS/3.30	Lift-off 312/DS/3.41
312/DS-039/4	●	●				
312/DS-039/4/3	●	●		●	●	●
312/DS-0412/4	●	●	●		●	●

● enthalten · Weitere Aufsatzschilde verfügbar – Kompatibilität siehe Seite 16

162 cm breite Schutzschilde

Bestehend aus:


- Vorhangpanel 162 cm breit × 75 cm hoch.
- Zwei Doppelreibgelenke für präzise Positionierung.
- Zwei integrierte Zubehörschienen 57 cm: 10×25 mm (montiert) / 9,5×28,6 mm (mitgeliefert).
- Aufsatzschilde bei einigen Produkten enthalten – Kompatibilität siehe Seite 16.



312/DS-039/9



312/DS-039/9/4

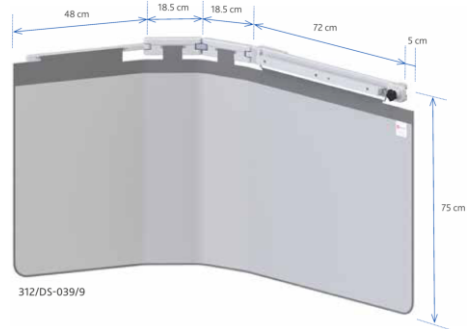

162 cm breit Produktcode	Vorhangpanel	Zubehörschiene · 57 cm	Aufsatzschilde · 57 cm	Aufsatzschilde · 27 cm	
	einteilig	10×25 mm 9,5×28,6 mm	Fold-down/Lift-off 312/DS/3,115	Lift-off 312/DS/3,30	Lift-off 312/DS/3,41
312/DS-039/9	●	●			
312/DS-039/9/4	●	●	●	● ×2	●

● enthalten · Weitere Aufsatzschilde verfügbar – Kompatibilität siehe Seite 16

> Tischmontierte Schilde Kollisionsgeschützte Konfigurationen

Kollisionsgeschützte Unterkörper-Schilde besitzen einen patentierten Mechanismus: Der Schwenkarm weicht bei Kollision mit dem C-Bogen nach oben aus – so werden weder C-Bogen noch Schild beschädigt und die Untersuchung wird nicht unterbrochen. Jedes Schild wird mit einem flexiblen 0,5 mm Pb Schutzvorhang geliefert.

92 cm · kollisionsgeschützt

Bestehend aus:

- Vorhangpanel 92 cm breit × 70 cm hoch (312/DS-008 & /3: 75 cm; optional drei überlappende Panels).
- Doppelreibgelenk für präzise Positionierung.
- Patentierter Kollisionsschutz – Schwenkarm weicht bei Kollision nach oben aus.
- Aufsatzschilde bei einigen Produkten enthalten – Kompatibilität siehe Seite 16.



92 cm breit Produktcode	Vorhangpanel		Aufsatzschilde · 57 cm		Aufsatzschilde · 27 cm
	zweiteilig	drei überl.	Lift-off 312/DS/3,32	Fold-down/Lift-off 312/DS/3,115	Lift-off 312/DS/3,30
312/E-013	●		●		
312/E-013/P		●	●		
312/DS-008	●				
312/DS-008/3	●			●	● ×2

● enthalten · Weitere Aufsatzschilde verfügbar – Kompatibilität siehe Seite 16

114 cm · kollisionsgeschützt

Bestehend aus:


- Vorhangpanel 114 cm breit × 70 cm hoch (optional drei überlappende Panels).
- Doppelreibgelenk für präzise Positionierung.
- Zwei integrierte Zubehörschienen 35 cm: 10×25 mm (montiert) / 9,5×28,6 mm (mitgeliefert); optional 7,7×25 mm.
- Patentierter Kollisionsschutz; Aufsatzschilde – Kompatibilität siehe Seite 16.



312/E-023



312/E-023/P

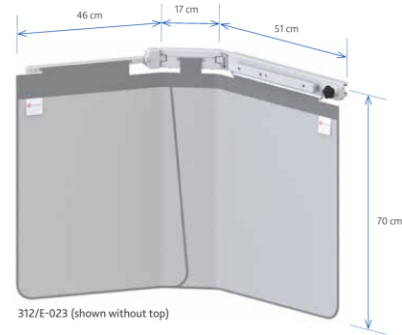

114 cm breit Produktcode	Vorhangpanel		Zubehörschiene · 35 cm		Aufsatzschilde · 57 cm
	zweiteilig	drei überl.	10×25 mm 9,5×28,6 mm	7,7×25 mm	Lift-off 312/DS/3.32
312/E-023	●		●		●
312/E-023/P		●	●		●
312/E-023/8	●			●	●
312/E-023/8P		●		●	●


● enthalten · Weitere Aufsatzschilde verfügbar – Kompatibilität siehe Seite 16

137 cm · kollisionsgeschützt

Standard-Ausführung



312/DS-039/6

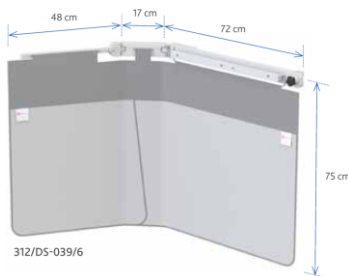

137 cm breit Produktcode	Vorhangpanel	Zubehörschiene · 57 cm	Aufsatzschilde · 57 cm		Aufsatzschilde · 27 cm	
	zweiteilig	10×25 mm 9,5×28,6 mm	Lift-off 312/DS/3.32	Fold-down/Lift-off 312/DS/3.115	Lift-off 312/DS/3.30	Lift-off 312/DS/3.41
312/DS-039/6	●	●				
312/DS-039/6/3	●	●		●	●	●
312/DS-0412/6	●	●	●		●	●

● enthalten · Weitere Aufsatzschilde verfügbar – Kompatibilität siehe Seite 16

Für seitlich fahrende Tische · tiefe Halterung


Tiefe Befestigungshalterung für transversale Tischbewegung. Vorhangpanel 137 cm × 75 cm, Doppelreibgelenk; zwei Zubehörschienen 65 cm.



312/DS-060



seitliche Tischbewegung

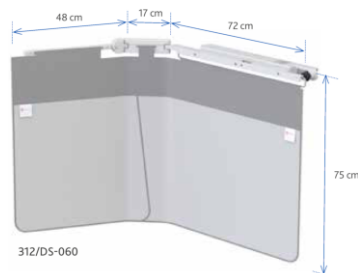

137 cm · tiefe Halterung Produktcode	Vorhangpanel	Zubehörschiene · 65 cm	Aufsatzschilde · 57 cm		Aufsatzschilde · 27 cm	
	zweiteilig	10×25 mm 9,5×28,6 mm	Lift-off 312/DS/3.32	Fold-down/Lift-off 312/DS/3.115	Lift-off 312/DS/3.30	Lift-off 312/DS/3.122
312/DS-060	●	●				
312/DS-060/1/3	●	●		●	●	●

● enthalten · Weitere Aufsatzschilde verfügbar – Kompatibilität siehe Seite 16

162 cm · kollisionsgeschützt

Bestehend aus:


- Vorhangpanel 162 cm breit × 75 cm hoch.
- Zwei Doppelreibgelenke für präzise Positionierung.
- Zwei integrierte Zubehörschienen 57 cm: 10×25 mm (montiert) / 9,5×28,6 mm (mitgeliefert).
- Patentierter Kollisionsschutz; Aufsatzschilde – Kompatibilität siehe Seite 16.



312/DS-039/10



312/DS-039/10/4

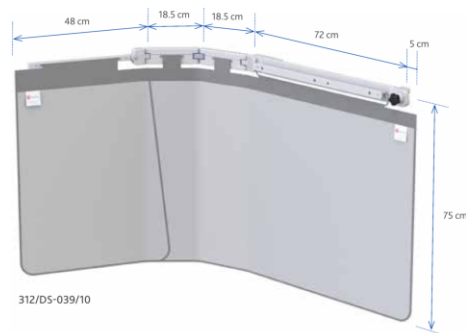

162 cm breit Produktcode	Vorhangpanel	Zubehörschiene · 57 cm	Aufsatzschilde · 57 cm	Aufsatzschilde · 27 cm	
	zweiteilig	10×25 mm 9,5×28,6 mm	Fold-down/Lift-off 312/DS/3,115	Lift-off 312/DS/3,30	Lift-off 312/DS/3,41
312/DS-039/10	●	●			
312/DS-039/10/4	●	●	●	● ×2	●

● enthalten · Weitere Aufsatzschilde verfügbar – Kompatibilität siehe Seite 16

Tischmontierte Schilde **Aufsatzschilde – Optionen**

KENEX-Aufsatzschilde bestehen aus demselben 0,5 mm Pb Schutzmaterial wie die Vorhänge des Hauptschilds. Ein flexibles Kunststoffmaterial lässt sie 25 cm über die Tischschiene hinausragen und bietet zusätzlichen, höheren und breiteren Schutz. Ihre spezielle Form – oben breiter – verhindert, dass beim Zusammenschieben Lücken entstehen. Die Kompatibilität von Aufsatz- und Hauptschilden finden Sie auf den folgenden Seiten.

Lift-off-Aufsätze

Massive Edelstahl-Zentrierstifte halten die Aufsätze sicher in Position. 27 cm breite, gekürzte Aufsätze sind kürzer gefertigt, um Bediengeräte an der Schiene nicht zu behindern.



**312/DS/3.32 ·
Lift-off 57 cm**



**312/DS/3.30 ·
Lift-off 27 cm**



**312/DS/3.41 ·
Lift-off 27 cm
(gekürzt)**

Fold-down-Aufsätze

57 cm Fold-down-Aufsätze lassen sich zum leichteren Patientenzugang schnell wegklappen – ohne Abnehmen und Umsetzen. Fold-down/Lift-off-Aufsätze können zusätzlich abgenommen und auf einem optionalen Wandhalter abgelegt werden (siehe Abschnitt Aufbewahrung).



Position der 312/DS-039/6/3-Aufsätze



312/DS/3.33 · Fold-down 57 cm

Aufsatz-Sets

312/E-025 · Standard-Höhen-Set

Set aus drei Lift-off-Aufsätzen in Standardhöhe. Höhe 25 cm über der Zubehörschiene.

Kompatibel mit 312/E-020, /E-021, /E-022, /E-023, 312/DS-039/6 & Varianten.



312/E-027 · Reduzierte-Höhen-Set

Set aus drei Lift-off-Aufsätzen in reduzierter Höhe. Höhe 15 cm über der Zubehörschiene.

Kompatibel mit 312/E-020, /E-021, /E-022, /E-023, 312/DS-039/6 & Varianten.





Höhen & Typen

Aufsatzschilde sind in Standardhöhe (25 cm über der Zubehörschiene) und in reduzierter Höhe (15 cm) erhältlich – jeweils 57 cm oder 27 cm breit. Die Übersicht ordnet jeden Aufsatz nach Höhe, Breite und Ausführung; die zugehörige Schild-Kompatibilität finden Sie auf den folgenden Seiten.

Standard-Höhe · 25 cm

57 cm breit



312/DS/3.32/3
Lift-off



312/DS/3.32
Lift-off



312/DS/3.33
Fold-down



312/DS/3.115
Fold-down / Lift-off

Reduzierte Höhe · 15 cm

57 cm breit



312/DS/3.106
Lift-off



312/DS/3.128
Lift-off



312/DS/3.139
Fold-down



312/DS/3.167
Fold-down / Lift-off

27 cm breit



312/DS/3.30
Lift-off



312/DS/3.41
Lift-off (gekürzt)



312/DS/3.122
Lift-off (gekürzt)

27 cm breit



312/DS/3.108
Lift-off



312/DS/3.110
Lift-off (gekürzt)



312/DS/3.130
Lift-off (gekürzt)



Aufsatzschilde

Kompatibilität · 57 cm

☒ im Schild enthalten
 ☐ kompatibel / optional
 ☐ ×2 zwei montierbar

Produktcode	57 cm breite Aufsatzschilde							
	Lift-off (Kollision)		Lift-off		Fold-down (abnehmbar, nicht Lift-off)		Fold-down / Lift-off	
	Standardhöhe 312/DS/3.32/3	Reduzierte Höhe 312/DS/3.106	Standardhöhe 312/DS/3.32	Reduzierte Höhe 312/DS/3.128	Standardhöhe 312/DS/3.33	Reduzierte Höhe 312/DS/3.139	Standardhöhe 312/DS/3.115	Reduzierte Höhe 312/DS/3.167
78 cm breit								
312/E-005			☐	☐	☐	☐		
312/E-006			☒	☐	☐	☐		
312/E-007			☐	☐	☒	☐		
92 cm breit								
312/E-010			☐	☐	☐	☐		
312/E-011			☒	☐	☐	☐		
312/E-012			☐	☐	☒	☐		
100 cm breit								
312/E-015			☐	☐	☐	☐		
312/E-016			☒	☐	☐	☐		
312/E-017			☐	☐	☒	☐		
114 cm breit								
312/E-020			☐	☐	☐	☐		
312/E-021			☒	☐	☐	☐		
312/E-022			☐	☐	☒	☐		
137 cm breit								
312/DS-039/4			☐	☐			☐	☐
312/DS-039/4/3			☐	☐			☒	☐
312/DS-0412/4			☒	☐			☐	☐
162 cm breit								
312/DS-039/9			☐	☐			☐	☐
312/DS-039/9/4			☐	☐			☒	☐
92 cm breit · kollisionsgeschützt								
312/E-013			☒	☐			☐	☐
312/DS-008			☐	☐			☐	☐
312/DS-008/3			☐	☐			☒	☐
114 cm breit · kollisionsgeschützt								
312/E-023			☒	☐			☐	☐
137 cm breit · kollisionsgeschützt								
312/DS-039/6			☐	☐			☐	☐
312/DS-039/6/3			☐	☐			☒	☐
312/DS-0412/6			☒	☐			☐	☐
312/DS-060			☐	☐			☐	☐
312/DS-060/1/3			☐	☐			☒	☐
162 cm breit · kollisionsgeschützt								
312/DS-039/10			☐	☐			☐	☐
312/DS-039/10/4			☐	☐			☒	☐

Aufsatzschilde

Kompatibilität · 27 cm

☒ im Schild enthalten
 ☐ kompatibel / optional
 ☐ ×2 zwei montierbar

Produktcode	27 cm breite Aufsatzschilde					
	Lift-off		Lift-off (gekürzt)		Lift-off (gekürzt)	
	Standardhöhe 312/DS/3.30	Reduzierte Höhe 312/DS/3.108	Standardhöhe 312/DS/3.41	Reduzierte Höhe 312/DS/3.110	Standardhöhe 312/DS/3.122	Reduzierte Höhe 312/DS/3.130
78 cm breit						
312/E-005	☐	☐				
312/E-006	☐	☐				
312/E-007	☐	☐				
92 cm breit						
312/E-010	☐ ×2	☐ ×2				
312/E-011	☐ ×2	☐ ×2				
312/E-012	☐ ×2	☐ ×2				
100 cm breit						
312/E-015			☐	☐		
312/E-016			☐	☐		
312/E-017			☐	☐		
114 cm breit						
312/E-020	☐	☐	☐	☐		
312/E-021	☐	☐	☐	☐		
312/E-022	☐	☐	☐	☐		
137 cm breit						
312/DS-039/4	☐	☐	☐	☐		
312/DS-039/4/3	☒	☐	☒	☐		
312/DS-0412/4	☒	☐	☒	☐		
162 cm breit						
312/DS-039/9	☐ ×2	☐ ×2	☐	☐		
312/DS-039/9/4	☒ ×2	☐ ×2	☒	☐		
92 cm breit · kollisionsgeschützt						
312/E-013	☐ ×2	☐ ×2				
312/DS-008	☐ ×2	☐ ×2				
312/DS-008/3	☒ ×2	☐ ×2				
114 cm breit · kollisionsgeschützt						
312/E-023	☐	☐	☐	☐		
137 cm breit · kollisionsgeschützt						
312/DS-039/6	☐	☐	☐	☐		
312/DS-039/6/3	☒	☐	☒	☐		
312/DS-0412/6	☒	☐	☒	☐		
312/DS-060	☐	☐			☐	☐
312/DS-060/1/3	☒	☐			☒	☐
162 cm breit · kollisionsgeschützt						
312/DS-039/10	☐ ×2	☐ ×2	☐	☐		
312/DS-039/10/4	☒ ×2	☐ ×2	☒	☐		

Tischmontierte Schilde

Kopfende-Schilde

Kopfende-Schilde reduzieren die vom Tisch bzw. vom Körper des Patienten ausgehende Streustrahlung erheblich. Sie bestehen aus einer leichten, langlebigen Struktur mit flexiblem Schutzvorhang mit 0,5 mm Pb Bleigleichwert.

- Das Schild wird auf die Carbon-Tischplatte aufgeschoben und hält seine Position auch bei gekipptem Tisch.
- Die schwenkbaren Seitenflügel lassen sich um den Anwender formen, einzeln nach vorne ausziehen oder platzsparend wegklappen; die Schwenkarme sind für volle C-Bogen-Bewegung schnell neu positionierbar.
- Jedes Schild ist für einen bestimmten Tisch gefertigt und optional mit Wand-Aufbewahrung erhältlich.

313/A2 · Maßgefertigte Kopfende-Schilde

Individuelle Lösungen je nach Größe und Tischtyp. Hinweis: Bei Bestellung ist ein Maßblatt auszufüllen (als PDF auf der Produktseite oder auf Anfrage erhältlich).

Produktcode	Wandhalter
313/A2 · Maßblatt erforderlich	☐

☒ enthalten · ☐ optional

313/A2-001 & 313/A2-008 · für Siemens Healthineers Artis zee

313/A2-001 · 120 cm breit

1× 56 cm feste Mittelsektion · 2× 32 cm Schwenkarme · 80 cm Vorhang · Wandhalter




313/A2-001



gefaltet · Wandhalter

313/A2-008 · 122 cm breit

1× 58 cm feste Mittelsektion · 2× 32 cm Schwenkarme · 80 cm Vorhang · Wandhalter

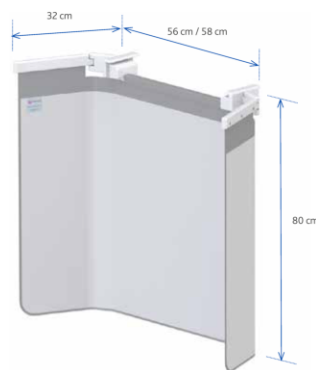

Produktcode	Wandhalter
313/A2-001 · für 525 mm Artis / 520 mm TruSystem 7500 (Artis zee)	☒
313/A2-008 · für 550 mm Artis zee Multipurpose (MP)	☒

☒ enthalten · ☐ optional

313/A2-010 · für GE Healthcare Elegance


Bestehend aus: 1× Tisch-Adapterhalterung · 1× 37 cm feste Mittelsektion · 2× Schwenkarme (24 & 68 cm breit) · 60 cm Vorhang · 3× 29 cm Lift-off-Aufsätze · Wandhalter.



313/A2-010 · ohne Aufsätze



313/A2-010 · Wandhalter

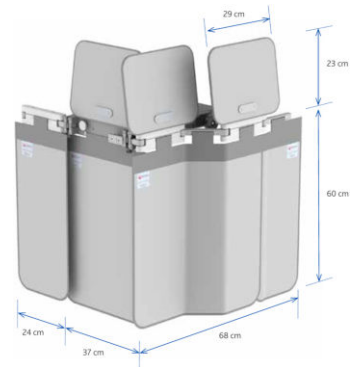


Produktcode	Wandhalter	29 cm Lift-off-Aufsätze
313/A2-010 · für GE Healthcare Elegance	☒	☒ ×3

☒ enthalten · ☐ optional

313/A2-014 · für Canon Medical (Toshiba) CAT-880B

114 cm breit · 1× 50 cm feste Mittelsektion · 2× 32 cm Schwenkarme · 78,5 cm Vorhang · Wandhalter.

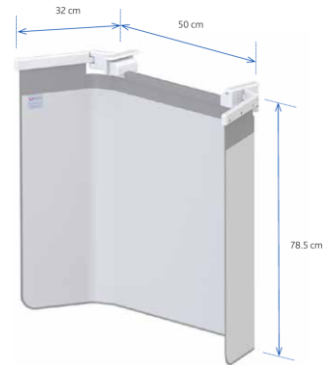**313/A2-014****gefaltet****Produktcode**


313/A2-014 · für 450 mm Kipp-/Wiege-Tisch CAT-880B

Wandhalter

☒ enthalten · ☐ optional

313/A2-018 · für Baxter Carbon FloatLine & SQ14 X-TRA

120 cm breit · 1× 56 cm feste Mittelsektion · 2× 32 cm Schwenkarme · 80 cm Vorhang · Wandhalter.

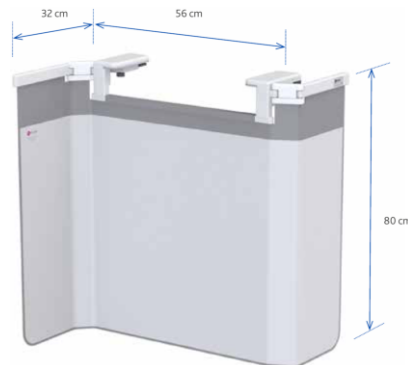**313/A2-018****Produktcode**

313/A2-018 · für 520 mm Carbon FloatLine & SQ14 X-TRA

Wandhalter

☒ enthalten · ☐ optional

313/A3 · für Philips Allura AD7


Bestehend aus: 121 cm breit · 1× 57 cm feste Mittelsektion · 2× 32 cm Schwenkarme · 80 cm Vorhang · 1× 57 cm Fold-down-Aufsatz.



313/A3-001



313/A3-002 · Wandhalter

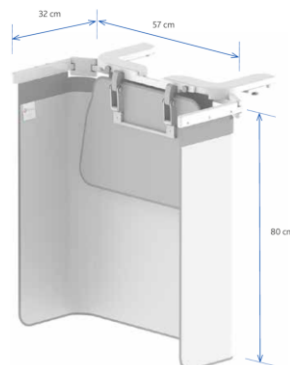

Produktcode	Wandhalter	57 cm Fold-down-Aufsatz
313/A3-001 · für 500 mm Allura AD7	☐	☒
313/A3-002 · für 500 mm Allura AD7 (inkl. Wandhalter)	☒	☒

☒ enthalten · ☐ optional



Tischmontierte Schilde

Fußende-Schild

Das obere Fußende-Schild schützt vor Streustrahlung und zusätzlich vor möglichen Blutspritzern bei interventionellen Eingriffen.

- Für den Einsatz quer über den Tisch zum Fußende.
- Passt auf beide 25 mm hohen Tischiinnen (7,7–10 mm dick).
- Durchgängiger Bleigleichwert: 0,5 mm Pb.


Hinweis: Bei Bestellung ist ein Maßblatt auszufüllen (als PDF auf der Produktseite oder auf Anfrage erhältlich).

311/TC/004 · Oberes Fußende-Tischschild

1× Bleiacryl-Fenster ca. 60 cm hoch × 80 cm breit · 1× flexibler Schutzvorhang unterhalb des Acryls, 20 cm hoch · 2× Griffe zur Positionierung.



311/TC/004

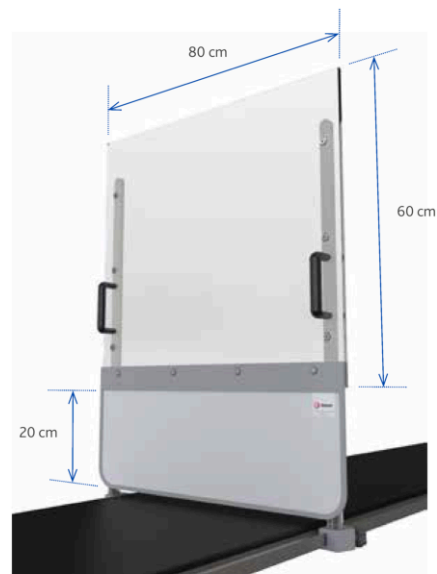

311/TC/004

Tischmontierte Schilde **Aufbewahrung · Wandhalter**

312/W-LBT · Wandhalter-Set

Wandhalter-Set, bestehend aus:

- 1× 312/W-LB (für Unterkörper-Schild)
- 1× 312/W-TOP (für Aufsatzschilde)




312/W-LBT

312/W-LB · Wandhalter für Unterkörper-Schild

Praktischer Aufbewahrungsort, wenn Schilde vom Tisch abgenommen sind. Aufnahme für 1× KENEX Unterkörper-Schild (Typ 312).




312/W-LB

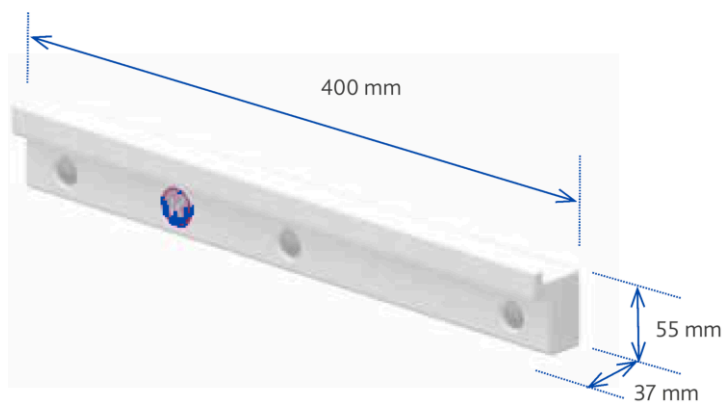

312/W-TOP · Wandhalter für Aufsatzschilde

Aufbewahrungsort für abgenommene Aufsatzschilde. Aufnahme für 1× 57 cm + 2× 27 cm Aufsatzschilde.

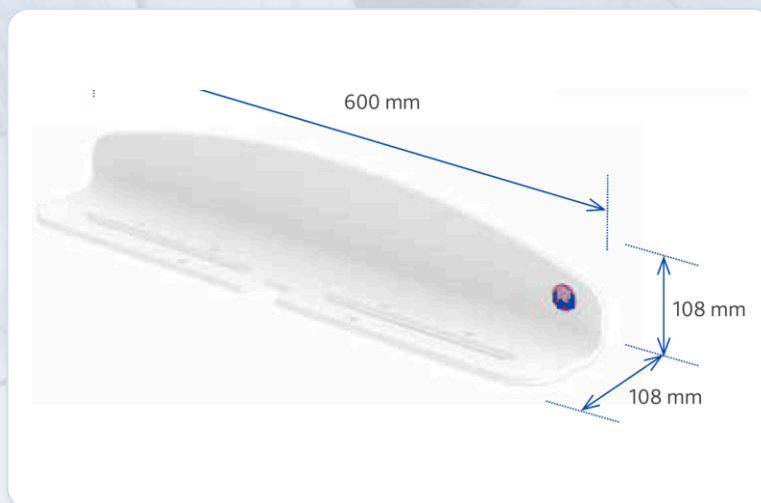

Kompatibilität · 57 cm Aufsatzschilde

Produktcode	312/DS/3.32/3	312/DS/3.106	312/DS/3.32	312/DS/3.128	312/DS/3.33	312/DS/3.139	312/DS/3.115	312/DS/3.167
312/W-TOP	☐	☐	☐	☐			☐	☐

Kompatibilität · 27 cm Aufsatzschilde

Produktcode	312/DS/3.30	312/DS/3.108	312/DS/3.41	312/DS/3.110	312/DS/3.122	312/DS/3.130
312/W-TOP	☐	☐	☐	☐	☐	☐

☐ kompatibel

> Tischmontierte Schilde Aufbewahrung · Mobile Ständer

Mobile Ständer für Abteilungen mit wenig oder ungeeignetem Platz für Wandhalter. Kleine Stellfläche im geparkten Zustand, große abschließbare Lenkrollen mit Frontschutz gegen Bodenkabel sowie eine schwere, kippsichere Basis.

1342/A2/E-001

1× Tischschild (Typ 312) · 1× Aufsatz-Set (1×57 + 2×27 cm) · 1× Kopfende-Schild (313/A2-008 oder 313/A2-001)



1342/A2/E-001

1342/A3/E-001

1× Tischschild (Typ 312) · 1× Aufsatz-Set (1×57 + 2×27 cm) · 1× Kopfende-Schild (313/A3-001)



1342/A3/E-001

1342/A2/F

2× Unterkörper-Schilde (Typ 312) · 2× Aufsatz-Sets (2×57 + 4×27 cm)



1342/A2/F



Produktcode	Unterkörper-Schild Typ 312	Kopfende-Schild Typ 313	Aufsatz-Set 1×57 + 2×27 cm
1342/A2/E-001 · kompatibel mit Kopfende 313/A2-008 & 313/A2-001	☐	☐	☐
1342/A3/E-001 · kompatibel mit Kopfende 313/A3-001	☐	☐	☐
1342/A2/F	☐ ×2		☐ ×2 Sets

☐ kompatibel

KONTAKT

Ihr Partner für Strahlenschutz.

Wir vermitteln und liefern zertifizierte Medizinprodukte. Darüber hinaus beschaffen wir herstellerunabhängig nahezu jedes Produkt und stellen ganze Bereiche projektbasiert aus.

medeqon GmbH

Ingenieurbüro für Medizintechnik

Bergstrasse 42/5/3

2102 Hagenbrunn · Österreich

office@medeqon.com

+43 1 3580045

www.medeqon.com